


## Ion Eye Massage with Microcurrent & Negative Ion Technology EM-700

(Máy massage giảm nếp nhăn và thâm quầng mắt Lifetrons EM-700)



### Tính năng

- Kết hợp công nghệ rung tần số thấp với ion âm
- Tần suất rung 150 lần/s giúp cải thiện tuần hoàn máu, kích thích cơ và giảm mệt mỏi
- Công nghệ ion âm giúp tăng cường khả năng hấp thụ các loại kem hoặc serum vào sâu trong da
- Công nghệ Microcurrent giúp chống lại các nếp nhăn, quầng thâm, tăng sinh collagen, nâng cơ và làm săn chắc vùng da quanh mắt
- Nhẹ và thiết kế cầm tay với vẻ ngoài thanh lịch

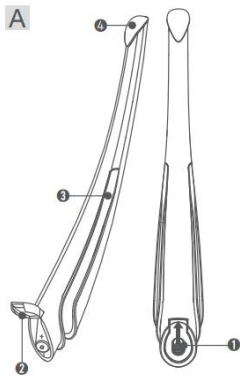

Hình minh họa

### Hướng dẫn sử dụng

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Lifetrons. Hướng dẫn sử dụng này sẽ chỉ ra giúp bạn các bước tiến hành và các biện pháp phòng ngừa an toàn. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách và giữ để tham khảo trong tương lai

#### A. Lắp pin

Giữ sản phẩm bằng một tay và kéo đai bấm pin ra khỏi ❶ cho đến khi ❷ bật mở ra với ngón tay khác. Lắp pin vào đúng vị trí cực dương “+” của ❸, đẩy ❹ và đóng lại ❶ đảm bảo nó được lắp khít.

#### B. Cách sử dụng

- Hãy tẩy trang và làm sạch da trước khi sử dụng, nhẹ nhàng thoa một lớp mỏng sản phẩm chăm sóc da/mắt lên xung quanh da vùng mắt.
- Cầm phía trên ❶, máy hoạt động khi ❷ tiếp xúc với da của bạn. Nhẹ nhàng dùng lực ❸ ấn vào các điểm hoặc massage di chuyển vòng tròn xung quanh khu vực mắt sử dụng cùng với các sản phẩm dành cho da mắt.

#### Chú ý

- Đảm bảo rằng da được rửa sạch và giữ ẩm trước khi sử dụng máy massage điều đó máy sẽ hoạt động bình thường.
- Đây là lời khuyên cho mỗi lần điều trị không quá 10 phút và thực hiện 3 -4 lần/tuần
- Thay pin mới sau mỗi tuần sử dụng.

#### C. Cách tắt máy

Để ❶ hoặc ❷ ngừng hoạt động thì không để máy tiếp xúc với da nữa.

#### Biện pháp phòng ngừa an toàn

Xin hãy làm theo các quy tắc được vạch ra trong hướng dẫn này để đảm bảo sự an toàn và hoạt động của máy

- Ngưng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu có bất kỳ tình huống bất thường, dị ứng hoặc khó chịu xảy ra trong quá trình sử dụng.
- Sản phẩm này là một máy chăm sóc da và không được làm cho mục đích y tế.
- Sản phẩm không tương thích để sử dụng trên phần cơ thể có gắn silicon, kim loại hoặc các vật lạ khác. Không sử dụng trực tiếp trên mắt.
- Bạn nên đợi ít nhất 06 tháng sau khi trị liệu khuôn mặt như nâng mặt hoặc tiêm Botox trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Vệ sinh sản phẩm trước khi sử dụng
- Không được sử dụng bất kỳ loại chất lỏng nào để làm sạch sản phẩm. Hãy nhớ rằng bề mặt của sản phẩm chỉ nên được lau bằng vải khô sạch.
- Sản phẩm này có phủ sơn đặc biệt - khi vệ sinh, không sử dụng bất kỳ dung dịch ăn mòn nào có thể gây hư hỏng cho sơn hoặc bề mặt
- Sửa chữa, tháo hoặc thay đổi sản phẩm này là bị nghiêm cấm. Xử lý không đúng cách có thể gây ra sự ngắt mạch, hư hỏng sản phẩm hoặc thậm chí cháy nổ. Bảo dưỡng và bảo hành sẽ bị vô hiệu nếu những thay đổi sai quy định đã được thực hiện đối với sản phẩm.
- Xin vui lòng liên hệ với một đại lý được ủy quyền để được nhận dịch vụ sau bán hàng nếu sản phẩm có vấn đề
- Hãy cẩn thận với bất kỳ cạnh, bề mặt không đều, các bộ phận bằng kim loại, phụ kiện hoặc bao bì để tránh gây vết thương hoặc hư hỏng. Lưu ý, sản phẩm này không nên được đặt trong miệng của bạn
- Không sử dụng sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao hoặc mức độ ẩm cao (ví dụ: phòng tắm...); lý tưởng, sản phẩm nên được sử dụng ở một nơi thông thoáng không có bụi quá nhiều và không tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời
- Không chèn các vật lạ hoặc chất lỏng vào trong sản phẩm; điều này có thể làm hỏng sản phẩm
- Không được thả sản phẩm hoặc va đập vào các vật khác. Tránh làm hỏng, va chạm và tạo áp lực quá mức do luôn cầm sản phẩm cẩn thận
- Không đặt sản phẩm gần từ trường hoặc điện trường mạnh - điều này có thể gây ra lỗi cho sản phẩm
- Không sử dụng sản phẩm này ở những nơi nguy hiểm

- Sản phẩm có thể phát nổ nếu bị ném vào trong lửa
- Không sử dụng ở phía trong và tránh sử dụng gần trung tâm cổ họng để tránh kích thích tuyến giáp
- Không sử dụng trên các vết loét, vết thương hay vùng bị nhiễm trùng. Không bao giờ được sử dụng bên trong (tức là trong miệng, mũi...)

#### Trẻ em

Tránh xa tầm tay trẻ em. Không cho phép trẻ chơi với sản phẩm hoặc phụ kiện của nó. Chúng có thể làm bị thương bản thân hoặc người khác và có thể vô tình làm hư hại sản phẩm. Sản phẩm và phụ kiện đi kèm có thể chứa các bộ phận nhỏ, có thể bị tách ra và tạo nên nguy hiểm gây khó thở

#### Cách xử lý thiết bị điện và điện tử



Ký hiệu này chỉ ra rằng tất cả các thiết bị điện và điện tử đi kèm với sản phẩm này không được coi là chất thải sinh hoạt. Thay vào đó, nên để ở điểm thu gom thích hợp để tái chế các thiết bị điện tử. Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được xử lý đúng cách, bạn đang giúp ngăn ngừa hậu quả tiêu cực cho môi trường và sức khỏe con người. Để tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với văn phòng thành phố địa phương, cơ quan bảo vệ môi trường, dịch vụ xử lý rác thải gia đình hoặc nơi mua sản phẩm để tìm hiểu thêm các phương pháp tái chế.

#### Pin

Pin AAA thay thế khi hết pin và nguồn pin đảm bảo chất lượng tránh xảy ra sự cố. Nếu là pin sạc bạn nên sử dụng hết mức pin có sẵn ban đầu, sau đó sạc lại sản phẩm ít nhất 2 lần nữa để đảm bảo hiệu suất tốt nhất có thể. Pin có thể được sạc lại và xả hàng trăm lần. Tuy nhiên, nó cuối cùng sẽ bị cũ đi - đây không phải là lỗi và tương ứng với việc sử dụng hàng ngày bình thường. Khi thời gian hoạt động hoặc thời gian chờ ngắn hơn đáng kể, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy pin đã hết tuổi thọ. Xin vui lòng không thực hiện sửa chữa, thay thế, hoặc cài đặt mà không liên hệ với một đại lý được ủy quyền của Lifetrons

#### Thời hạn bảo hành

Nếu trong vòng 12 tháng kể từ khi mua sản phẩm này hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm này đã được chứng minh là bị lỗi do nguyên nhân hư hỏng do tay nghề hoặc khuyết về linh kiện, chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc thay thế cùng một sản phẩm miễn phí hoặc linh kiện với điều kiện:

- Hóa đơn gốc hoặc hóa đơn bán hàng với ngày mua hàng được thể hiện với đơn vị bị lỗi
- Lifetrons không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông tin bị mất dưới bất kỳ hình thức nào và sẽ không hoàn lại cho bất kỳ tổn thất nào
- Hạn bảo hành chỉ có giá trị nếu chứng từ gốc mua sản phẩm này do đại lý được ủy quyền của Lifetrons phát hành, ghi rõ ngày mua, được thể hiện với sản phẩm cần sửa chữa hoặc thay thế  
Lifetrons có quyền từ chối dịch vụ bảo hành nếu thông tin này đã được gỡ bỏ hoặc thay đổi sau khi mua sản phẩm ban đầu từ đại lý
- Bảo hành không bao gồm các hư hỏng của sản phẩm do sử dụng các phụ kiện hoặc các thiết bị ngoại vi khác không phải là Lifetrons với các phụ kiện ban đầu có

gắn nhãn dùng cho sản phẩm. Bảo hành không bao gồm bất kỳ thiệt hại gây ra bởi lạm dụng, huy hoại hoặc bề vỡ

5. Bảo hành không bao gồm các lỗi sản phẩm thay thế, sửa chữa hoặc tháo lắp bởi bất kì người nào không được nhà sản xuất ủy quyền
6. Bất kì cái nào bị lỗi hay bộ phận nào bị hỏng sẽ trở thành tài sản của nhà sản xuất

#### **Thông Tin Thêm**

Đăng kí mua sản phẩm trực tuyến của Lifetrons Beauté tại [www.lifetrons.vn](http://www.lifetrons.vn).

Hãy ghé thăm website [www.lifetrons.vn](http://www.lifetrons.vn) hoặc liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng [info@lifetrons.vn](mailto:info@lifetrons.vn) để biết thêm về các sản phẩm mới và ưu đãi đặc biệt của chúng tôi.

Hướng dẫn sử dụng này ban đầu được viết bằng Tiếng Anh sau đó được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác. Các bản dịch tiếp theo không được đảm bảo sự chính xác. Trong trường hợp, sai biệt giữa bản Tiếng Anh với bất kì bản ngôn ngữ nào khác, phiên bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi duy nhất theo quyết định của Lifetrons Switzerland AG, Lifetrons International Ltd hoặc Li-tek mà không cần báo trước. Bất kì sản phẩm hay phụ kiện nào không được liệt kê ở mục “Có gì bên trong” là không bao gồm và không tương thích với sản phẩm. Hình ảnh của sản phẩm chỉ dùng cho mục đích tham khảo, màu sắc có thể khác so với sản phẩm thực tế.