

Ultra Facial Lift with Microcurrents & Light Therapy EP-400B-WH

(Máy nâng cơ mặt và cải thiện sắc tố da Lifetrans EP-400B)



Tính năng

- Thiết kế 3 in 1 với các đầu massage có thể thay thế dành để chăm sóc mắt và mặt
- 4 mức cường độ trị liệu khuôn mặt phụ thuộc vào các nhu cầu của da bạn
- Rung micro-vibration tần số thấp có thể giúp kích thích cơ mặt, cải thiện tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi và hồi sinh làn da
- Công nghệ rung Microcurrents có thể làm nét và thay đổi màu sắc cơ mặt giúp nâng cơ và săn chắc hiệu quả trên da
- Ánh sáng photon đỏ có thể giúp làm giảm các nếp nhăn, thúc đẩy sản sinh collagen, làm mờ các vết nhăn, đánh tan quầng thâm và thậm chí màu da
- Giúp tăng cường sự hấp thụ các hoạt chất chăm sóc da của bạn

Thông số kỹ thuật

- Chất liệu: Nhựa ABS, Thép không gỉ dùng trong y tế, Mạ điện
- Dung lượng pin: 1200 mAh loại pin Lithium polymer
- Nguồn ra Micro-USB: 5V
- Nguồn cấp điện: sạc lại thông qua cổng micro-USB
- Thời gian sạc: 3 giờ
- Tần số rung Micro-vibration: 130/200 Hz Max
- Độ dài bước sóng ánh sáng đỏ: 630+/-10 nm
- Kích thước: 123 x 61 x 35.5 mm
- Trọng lượng: 120g

Bộ sản phẩm


- 01 Thân máy chính Ultra Facial Lift
- 01 Đầu massage mặt Facial
- 01 Đầu massage mắt Eye
- 01 Đầu ánh sáng photon Đỏ
- 01 Cáp sạc Micro-USB
- 01 Kính bảo vệ mắt
- 01 Sách HDSĐ

Thời hạn bảo hành: Bảo hành quốc tế 12 tháng


Lưu ý:

- Sản phẩm này không chống thấm nước – không để các thành phần điện bên trong tiếp xúc với chất lỏng hoặc độ ẩm
- Tránh xa tầm tay của trẻ em, các bộ phận nhỏ có thể gây khó thở khi nuốt phải


- Hãy đảm bảo rằng máy được sạc đầy trước khi sử dụng

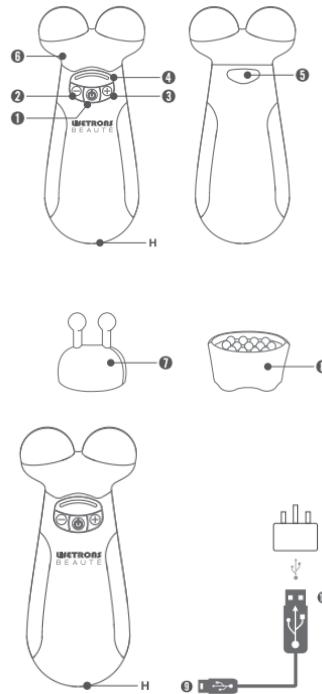

B

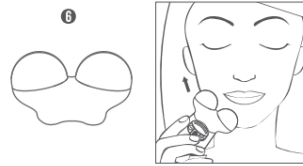

C

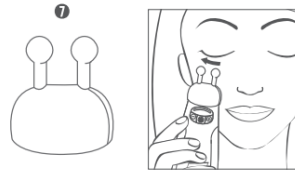

D



Hình minh họa

Hướng dẫn sử dụng

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Lifetrans. Hướng dẫn sử dụng này sẽ chỉ ra giúp bạn các bước tiến hành và các biện pháp phòng ngừa an toàn. Vui lòng đọc kỹ hướng

dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách và giữ để tham khảo trong tương lai

A. Thay đổi đầu trị liệu

- Ấn **Ⓚ** ở mặt lưng máy để tháo rời đầu trị liệu
- Lựa chọn đầu trị liệu **Ⓚ**, **Ⓚ**, **Ⓚ** mà bạn muốn sử dụng và gắn nó vào thân máy

Chú ý: Máy sẽ không rung khi sử dụng đầu ánh sáng photon đỏ. Không thay đổi đầu trị liệu khi máy đang bật

B. Đầu trị liệu Microcurrent Facial

- Sử dụng đầu trị liệu massager Microcurrent Facial để xác định và làm rõ đường nét trên khuôn mặt ở các vùng như hàm, hàm dưới, má và trán
- Làm sạch da và chắc chắn tẩy sạch các lớp trang điểm trước khi sử dụng. Gel, Serum, kem dưỡng hoặc kem dưỡng ẩm (không bao gồm) phải được đảm bảo dùng theo các bước dưới đây để đảm bảo tính dẫn điện, tính chất, vận hành và lợi ích tối đa của máy
- Gắn đầu trị liệu mặt **Ⓚ** vào phần thân của máy. Ấn nút nguồn **Ⓚ** một lần để bật máy. Điều chỉnh cường độ phù hợp với bạn bằng cách ấn nút lên (+) hoặc xuống (-) nằm ở mặt trước của máy. Mức độ mặc định của máy là 0 (không rung)
- Nhẹ nhàng nhấn hai đầu quả cầu lên mặt bạn nâng và giữ ở vị trí trong 5 giây hoặc nhẹ nhàng lướt máy theo chiều thẳng đứng hướng lên trên
- Thiết bị sẽ tự động ngắt sau 10 phút sử dụng liên tục. Chăm sóc da bạn hàng ngày sau khi trị liệu
- Để đạt kết quả tốt nhất hãy trị liệu trong 10 phút, 2-3 lần mỗi tuần

C. Trị liệu mắt và môi với công nghệ Microcurrent

- Sử dụng đầu massager trị liệu mắt và môi ở mục tiêu xung quanh khu vực mắt và môi như là môi trên, môi dưới, viền môi, mí trên, mí dưới long mày
- Làm sạch da và chắc chắn tẩy sạch các lớp trang điểm trước khi sử dụng. Gel, Serum, kem dưỡng hoặc kem dưỡng ẩm (không bao gồm) phải được đảm bảo dùng theo các bước dưới đây để đảm bảo tính dẫn điện, tính chất, vận hành và lợi ích tối đa của máy
- Gắn đầu điều trị mắt và môi **Ⓚ** vào phần thân máy. Ấn nút nguồn **Ⓚ** một lần để bật máy. Điều chỉnh cường độ phù hợp với bạn bằng cách ấn nút lên (+) hoặc xuống (-) nằm ở mặt trước của máy. Mức độ mặc định của máy là 0 (không rung)
- Nhẹ nhàng nhấn hai đầu quả cầu lên mặt bạn nâng và giữ ở vị trí trong 5 giây hoặc nhẹ nhàng lướt máy theo chiều thẳng đứng hướng lên trên. Xem bản vẽ để biết thêm chi tiết
- Thiết bị sẽ tự động ngắt sau 10 phút sử dụng liên tục. Chăm sóc da bạn hàng ngày sau khi trị liệu
- Để đạt kết quả tốt nhất hãy trị liệu trong 10 phút, 2-3 lần mỗi tuần

D. Trị liệu bằng ánh sáng photon đỏ

- Sử dụng ánh sáng photon đỏ nhằm mục tiêu làm giảm nếp nhăn, đốm đen và tổn màu da bạn ngoài ra còn tăng cường sản sinh collagen
- Làm sạch da và chắc chắn tẩy sạch các lớp trang điểm trước khi sử dụng
- Gắn đầu ánh sáng photon đỏ vào thân máy
- Đeo kính bảo vệ phần mắt
- Bật thiết bị và bắt đầu điều trị
- Đặt ánh sáng tiếp xúc trực tiếp với da trong 5-8 giây trước khi di chuyển sang khu vực khác
- Thiết bị sẽ tự động tắt sau 10 phút sử dụng liên tục. Chăm sóc da hàng ngày sau khi sử dụng thiết bị
- Để đạt kết quả tốt nhất hãy trị liệu trong 10 phút, 2-3 lần/tuần

Chú ý: Luôn phải đeo kính bảo vệ mắt khi sử dụng ánh sáng photon tích hợp. Nó sẽ gây tổn thương và có cho mắt nếu nhìn trực tiếp vào ánh sáng photon

E. Cài đặt mức độ cường độ

Máy có 4 mức cường độ cho chế độ rung điều trị mặt và mắt. Chúng tôi khuyên bạn bắt đầu với mức độ đầu tiên

sau đó tăng dần theo thời gian tùy thuộc vào nhu cầu của da bạn. Lưu ý mức độ mặc định là 0 (không có dòng điện)

1. Ấn **1** Máy bật và mức cường độ bắt đầu là 0 (1 đèn xanh dương sáng)
2. Ấn **2** một lần: Chuyển đổi cường độ lên mức 1 (2 đèn xanh dương sáng)
3. Ấn **3** hai lần: Chuyển đổi cường độ lên mức 2 (3 đèn xanh dương sáng)
4. Ấn **4** ba lần: Chuyển đổi cường độ lên mức 3 (4 đèn xanh dương sáng)
5. Ấn **5** bốn lần : Chuyển đổi cường độ lên mức 4 (5 đèn xanh dương sáng)
6. Ấn **6** để giảm xuống mức cường độ thấp hơn

Chú ý: Máy sẽ tự động tắt sau 10 phút hoạt động liên tục. Nếu bạn muốn rút ngắn thời gian sử dụng, đơn giản ấn nút nguồn trong 1 giây. Máy sẽ báo bíp trong 3 giây trước khi tắt

F. Sạc lại thiết bị

1. Kết nối với bộ phận **7** (đầu cắm micro-USB) tới **H** (cổng micro-USB)
2. Kết nối với bộ phận **8** (đầu cắm USB) tới cổng USB với nguồn điện (ví dụ: Bộ sạc AC với nguồn điện USB)

G. Hiện thị của pin

1. **Pin yếu:** tất cả đèn LED xanh dương nháy 5 lần và máy báo beep 5 lần trước khi tắt máy (chỉ khi máy đang sử dụng)
2. **Đang sạc:** Đèn LED màu xanh dương **9** sáng để cho biết trạng thái sạc
3. **Sạc đầy:** Không đèn nào sáng

Biện pháp phòng ngừa an toàn

Xin hãy làm theo các quy tắc được vạch ra trong hướng dẫn này để đảm bảo sự an toàn và hoạt động của máy

1. Ngưng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu có bất kỳ tình huống bất thường, dị ứng hoặc khó chịu xảy ra trong quá trình sử dụng.
2. Sản phẩm này là một máy chăm sóc da và không được làm cho mục đích y tế.
3. Sản phẩm không tương thích để sử dụng trên phần cơ thể có gắn silicon, kim loại hoặc các vật lạ khác. Không sử dụng trực tiếp trên mắt.
4. Bạn nên đợi ít nhất 06 tháng sau khi trị liệu khuôn mặt như nâng mặt hoặc tiêm Botox trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.
5. Vệ sinh sản phẩm trước khi sử dụng
6. Không được sử dụng bất kỳ loại chất lỏng nào để làm sạch sản phẩm. Hãy nhớ rằng bề mặt của sản phẩm chỉ nên được lau bằng vải khô sạch.
7. Sản phẩm này có phủ sơn đặc biệt - khi vệ sinh, không sử dụng bất kỳ dung dịch ăn mòn nào có thể gây hư hỏng cho sơn hoặc bề mặt
8. Sửa chữa, tháo hoặc thay đổi sản phẩm này là bị nghiêm cấm. Xử lý không đúng cách có thể gây ra sự ngắn mạch, hư hỏng sản phẩm hoặc thậm chí cháy nổ. Bảo dưỡng và bảo hành sẽ bị vô hiệu nếu những thay đổi sai quy định đã được thực hiện đối với sản phẩm.
9. Xin vui lòng liên hệ với một đại lý được ủy quyền để được nhận dịch vụ sau bán hàng nếu sản phẩm có vấn đề
10. Hãy cẩn thận với bất kỳ cạnh, bề mặt không đều, các bộ phận bằng kim loại, phụ kiện hoặc bao bì để tránh gây vết thương hoặc hư hỏng. Lưu ý, sản phẩm này không nên được đặt trong miệng của bạn
11. Không sử dụng sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao hoặc mức độ ẩm cao (ví dụ: phòng tắm...); lý tưởng, sản phẩm nên được sử dụng ở một nơi thông thoáng không có bụi quá nhiều và không tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời
12. Không chèn các vật lạ hoặc chất lỏng vào trong sản phẩm; điều này có thể làm hỏng sản phẩm

13. Không được thả sản phẩm hoặc va đập vào các vật khác. Tránh làm hỏng, va chạm và tạo áp lực quá mức do luôn cầm sản phẩm cẩn thận
14. Không đặt sản phẩm gần từ trường hoặc điện trường mạnh – điều này có thể gây ra lỗi cho sản phẩm
15. Không sử dụng sản phẩm này ở những nơi nguy hiểm
16. Sản phẩm có thể phát nổ nếu bị ném vào trong lửa
17. Không sử dụng ở phía trong và tránh sử dụng gần trung tâm cổ họng để tránh kích thích tuyến giáp
18. Không sử dụng trên các vết loét, vết thương hay vùng bị nhiễm trùng. Không bao giờ được sử dụng bên trong (tức là trong miệng, mũi...)
19. Không sử dụng nếu mang thai, có máy điều hòa nhịp tim, tiền sử bệnh tim hoặc các tình trạng bệnh khác

Trẻ em

Tránh xa tầm tay trẻ em. Không cho phép trẻ chơi với sản phẩm hoặc phụ kiện của nó. Chúng có thể làm bị thương bản thân hoặc người khác và có thể vô tình làm hư hại sản phẩm. Sản phẩm và phụ kiện đi kèm có thể chứa các bộ phận nhỏ, có thể bị tách ra và tạo nên nguy hiểm gây khó thở

Cách xử lý thiết bị điện và điện tử



Ký hiệu này chỉ ra rằng tất cả các thiết bị điện và điện tử đi kèm với sản phẩm này không được coi là chất thải sinh hoạt. Thay vào đó, nên để ở điểm thu gom thích hợp để tái chế các thiết bị điện tử. Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được xử lý đúng cách, bạn đang giúp ngăn ngừa hậu quả tiêu cực cho môi trường và sức khỏe con người. Để tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với văn phòng thành phố địa phương, cơ quan bảo vệ môi trường, dịch vụ xử lý rác thải gia đình hoặc nơi mua sản phẩm để tìm hiểu thêm các phương pháp tái chế.

Pin

Bạn nên sử dụng hết mức pin có sẵn ban đầu, sau đó sạc lại sản phẩm ít nhất 2 lần nữa để đảm bảo hiệu suất tốt nhất có thể. Pin có thể được sạc lại và xả hàng trăm lần. Tuy nhiên, nó cuối cùng sẽ bị cũ đi – đây không phải là lỗi và tương ứng với việc sử dụng hàng ngày bình thường. Khi thời gian hoạt động hoặc thời gian chờ ngắn hơn đáng kể, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy pin đã hết tuổi thọ. Xin vui lòng không thực hiện sửa chữa, thay thế, hoặc cài đặt mà không liên hệ với một đại lý được ủy quyền của Lifetrons

Thời hạn bảo hành

Nếu trong vòng 12 tháng kể từ khi mua sản phẩm này hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm này đã được chứng minh là bị lỗi do nguyên nhân hư hỏng do tay nghề hoặc khuyết về linh kiện, chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc thay thế cùng một sản phẩm miễn phí hoặc linh kiện với điều kiện:

1. Hóa đơn gốc hoặc hóa đơn bán hàng với ngày mua hàng được thể hiện với đơn vị bị lỗi
2. Lifetrons không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông tin bị mất dưới bất kỳ hình thức nào và sẽ không hoàn lại cho bất kỳ tổn thất nào
3. Hạn bảo hành chỉ có giá trị nếu chứng từ gốc mua sản phẩm này do đại lý được ủy quyền của Lifetrons phát hành, ghi rõ ngày mua, được thể hiện với sản phẩm cần sửa chữa hoặc thay thế. Lifetrons có quyền từ chối dịch vụ bảo hành nếu thông tin này đã được gỡ bỏ hoặc thay đổi sau khi mua sản phẩm ban đầu từ đại lý
4. Bảo hành không bao gồm các hư hỏng của sản phẩm do sử dụng các phụ kiện hoặc các thiết bị ngoại vi khác không phải là Lifetrons với các phụ kiện ban đầu có gắn nhãn dùng cho sản phẩm. Bảo hành

- không bao gồm bất kỳ thiệt hại gây ra bởi lạm dụng, hủy hoại hoặc bề vỡ
5. Bảo hành không bao gồm các lỗi sản phẩm thay thế, sửa chữa hoặc tháo lắp bởi bất kỳ người nào không được nhà sản xuất ủy quyền
6. Bất kỳ cái nào bị lỗi hay bộ phận nào bị hỏng sẽ trở thành tài sản của nhà sản xuất

Thông Tin Thêm

Đăng kí mua sản phẩm trực tuyến của Lifetrons Beauté tại www.lifetrons.vn.

Hãy ghé thăm website www.lifetrons.vn hoặc liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng info@lifetrons.vn để biết thêm về các sản phẩm mới và ưu đãi đặc biệt của chúng tôi.

Hướng dẫn sử dụng này ban đầu được viết bằng Tiếng Anh sau đó được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác. Các bản dịch tiếp theo không được đảm bảo sự chính xác. Trong trường hợp, sai biệt giữa bản Tiếng Anh với bất kỳ bản ngôn ngữ nào khác, phiên bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi duy nhất theo quyết định của Lifetrons Switzerland AG, Lifetrons International Ltd hoặc Li-tek mà không cần báo trước. Bất kỳ sản phẩm hay phụ kiện nào không được liệt kê ở mục “Có gì bên trong” là không bao gồm và không tương thích với sản phẩm. Hình ảnh của sản phẩm chỉ dùng cho mục đích tham khảo, màu sắc có thể khác so với sản phẩm thực tế.