



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẮM NƯỚC GIA ĐÌNH RIO DCIC PROFESSIONAL WATER JET FLOSSER & ORAL IRRIGATOR



Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Máy tắm nước gia đình RIO DCIC từ tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:

- Soạn tin theo cú pháp: **RIO <khoảng cách> MÃ BẢO HÀNH** gửi về **8079**



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn



Ví dụ: RIO 50263482 gửi 8079

- Thời hạn bảo hành sản phẩm sẽ được tính từ ngày Quý khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành.
- Chế độ bảo hành 1 đổi mới trong vòng 6 tháng đầu.
- Nếu Quý khách bảo hành sản phẩm khi chưa kích hoạt Rio Beauty sẽ tính từ ngày xuất kho.

CÁC CẢNH BÁO

- **Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**
- Thiết bị này không được dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi. Với trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc chưa có kinh nghiệm về sử dụng sản phẩm thì phải được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn.
- Thiết bị này chỉ được tương ứng với mức điện áp thấp an toàn được đánh dấu trên thiết bị. Nếu có bất kỳ bộ phận nào của bộ đổi nguồn hoặc dây điện bị hỏng, hãy ngừng sử dụng. Liên hệ với Trung tâm bảo hành để được thay thế.
- Không cho thiết bị vào nước. Không sử dụng dung môi hoặc các chất tẩy rửa có tính mài mòn để vệ sinh thiết bị.
- Không sử dụng sản phẩm này nếu nó không hoạt động đúng cách, hoặc nó đã bị rơi, hư hỏng.
- Đảm bảo thiết bị đã tắt và ngắt khỏi nguồn điện trước khi đổ đầy nước hoặc vệ sinh bình chứa nước.
- Để xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.
- Không để thiết bị ở nơi gần chậu rửa.
- Không tự ý mở bên trong thiết bị.
- Tránh xa bất kỳ thiết bị nào nhạy cảm với nước để tránh gây tai nạn.
- Để tránh vi khuẩn lây lan, đảm bảo thiết bị và vòi phun được rửa kỹ bằng nước xà phòng và để khô trước khi cất giữ.
- Không đổ nước quá 40 độC vào bình chứa nước.
- Chỉ cho nước xúc miệng vào bình chứa nước. Một số dung dịch kháng khuẩn (ví dụ đã được quy định) có thể làm giảm tuổi thọ của sản phẩm.
- Không sử dụng thiết bị vào mục đích khác ngoài mục đích vệ sinh răng miệng.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----


- Nếu bạn đã có phẫu thuật răng lợi hoặc miệng trong vòng 2 tháng qua, hãy tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng sản phẩm.
- Không ấn mạnh vòi phun vào răng hoặc nướu. Làm như vậy có thể gây thương tích cho răng hoặc nướu.
- Chúng tôi khuyên bạn nên thay vòi phun 6 tháng/ lần.
- Không sử dụng thiết bị nếu bạn có vết thương hở trên lưỡi hoặc trong khoang miệng.
- Không sử dụng thiết bị nếu bạn đang đeo bất kỳ loại trang sức nào trong miệng. Hãy tháo nó trước khi sử dụng.

CẤU TẠO CỦA THIẾT BỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn

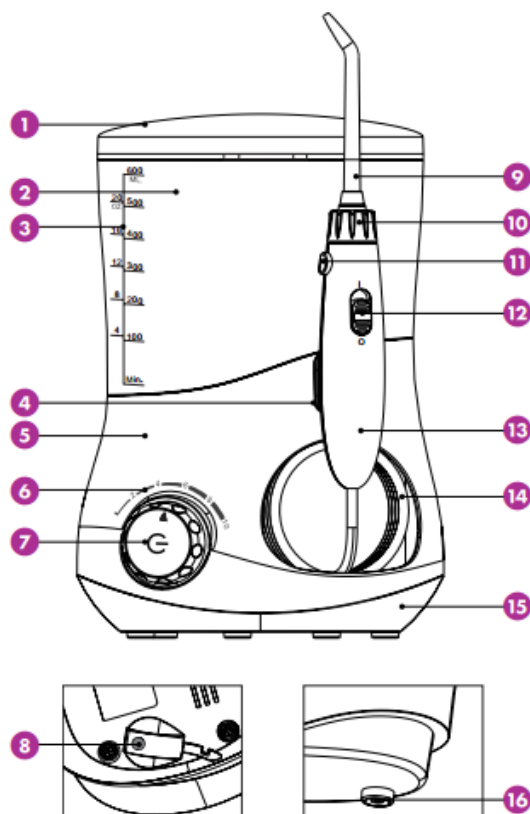


- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Nắp bình đựng đầu vòi xịt | 8. Ổ nguồn điện. |
| 2. Bình chứa nước. | 9. Vòi xịt. |
| 3. Vạch mức nước. | 10. Đầu nối vòi xịt. |
| 4. Bộ phận giữ tay cầm. | 11. Nút tháo vòi xịt |
| 5. Thân máy. | 12. Nút bật/ tắt. |
| 6. Các mức công suất. | 13. Thân vòi xịt. |
| 7. Nút điều khiển: | 14. Ống dây dẫn nước. |
| • Bấm- Điều khiển Bật/ Tắt. | 15. Chân đế. |
| • Xoay- Điều chỉnh áp lực. | 16. Chân đế của thiết bị. |




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn

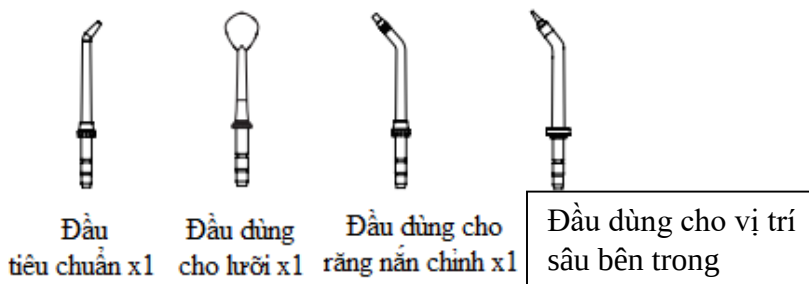

BƯỚC CHUẨN BỊ

Đặt thiết bị trên một bề mặt phẳng tránh xa các vật sắc nhọn, đảm bảo dây khô và không bị hỏng. Thiết bị được trang bị một bộ nguồn đặc biệt với đầu nối cắm DC.

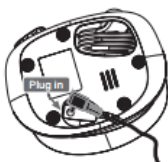

BƯỚC 1:

Cắm bộ nguồn vào ổ nối DC ở đáy đế và cắm dây nguồn vào ổ cắm điện.



BƯỚC 2:

Tháo hộp đựng vòi xịt.



BƯỚC 3:

Mở bình chứa nước và cho nước dưới 40 độ vào bình.

Lưu ý: Dùng nước qua máy lọc hoặc nước tinh khiết.




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn




BƯỚC 4: Đóng nắp bình nước.

LẮP VÀ THAY THẾ VÒI XỊT

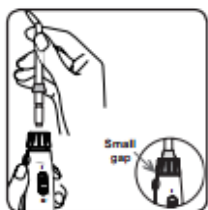

Lắp vòi xịt


Lắp đầu vào giữa đầu nối vòi xịt cho đến khi bạn cảm thấy nó được đặt vào đúng vị trí. Nhẹ nhàng thử kéo đầu ra để đảm bảo nó được khóa chặt tại chỗ.

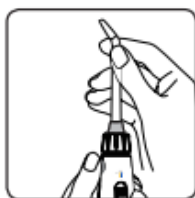

Tháo vòi xịt

Nhấn nút tháo trên tay cầm và kéo vòi xịt ra.

CÁCH SỬ DỤNG

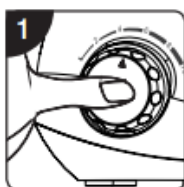

BƯỚC 1

Khi sử dụng lần đầu tiên, chỉ cần trở đầu vòi vào bồn rửa, sau đó nhấn nút chính để bật thiết bị.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn




BƯỚC 2

Xoay nút chính trên thiết bị để điều chỉnh mức công suất. Trượt nút trên tay cầm sang vị trí “O” để tạm dừng nguồn nước.




BƯỚC 3

Tiếp theo đứng cạnh bồn rửa và đặt đầu xịt vào trong miệng của bạn, và sau đó trượt Pause chuyển sang vị trí “I”. Giữ miệng của bạn hơi mở để tránh nước bắn ra ngoài.

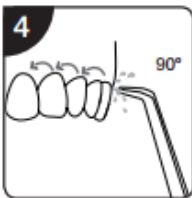

BƯỚC 4

Đặt đầu xịt ở góc 90 độ vào răng và nướu răng.

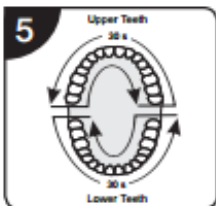

BƯỚC 5

Di chuyển tia nước chậm dọc theo răng. Nguồn nước sẽ tạm dừng ở khoảng 30 giây để nhắc nhở bạn di chuyển đến vùng nướu tiếp theo, ví dụ bên trong,

7



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn

bên ngoài, phía trên và dưới cùng. Thiết bị sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi chu kỳ hai phút hoàn tất.

ĐỂ TẮT THIẾT BỊ

Trượt nút chuyển đổi tạm dừng trên tay cầm sang vị trí “O” để tạm dừng nguồn nước. Và sau đó nhấn nút ON/OFF.

SAU KHI SỬ DỤNG

BƯỚC 1

Tháo bình chứa nước và đổ bỏ nước chưa sử dụng hết.

BƯỚC 2

Trượt nút chuyển Pause sang vị trí “I”, trở đầu vòi vào bồn rửa và bật nguồn để xả nước bên trong thiết bị, sau đó trượt nút Pause đến vị trí “O” một lần nữa. Tắt thiết bị và rút bộ đổi nguồn.

BƯỚC 3



Rút đầu xịt khỏi vòi cắm và cất đầu xịt vào khay đựng đầu xịt.

- Để làm sạch đầu vòi, hãy tháo đầu vòi bằng cách ấn nút đẩy đầu vòi ra. Rửa sạch dưới vòi nước và lau khô thật kỹ.
- Đảm bảo rằng hộp đựng và vòi xịt được để đúng vị trí trước khi cất thiết bị.

BƯỚC 4



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----




Sử dụng một miếng vải sạch để lau khô thiết bị.

CHỨC NĂNG CÁC ĐẦU XỊT



Đầu làm sạch lưới

Để làm sạch lưới của bạn, nhẹ nhàng đặt đầu làm sạch lưới vào giữa đường trung tâm của lưới của bạn. Sử dụng thiết lập cài đặt áp suất nước/ tần suất xung ở mức đầu tiên và tăng dần theo yêu cầu.

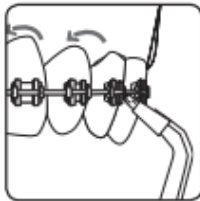

Đầu dành cho chỉnh hình răng

Đầu chỉnh nha dành riêng cho những người đeo niềng răng. Đó là lý tưởng để làm sạch các khu vực khó tiếp cận xung quanh khu vực niềng răng.

Từ từ trượt đầu dọc theo đường nướu răng, tạm dừng thời gian ngắn để điều chỉnh chổi lông để làm sạch khu vực giữa răng và quanh niềng răng chỉnh hình.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn



Đầu dành cho vùng nha chu

Đầu xịt được thiết kế đặc biệt dành riêng cho vùng nha chu. Chỉ sử dụng ở mức công suất thấp.

Đặt đầu xịt vào răng nghiêng góc 45 độ và nhẹ nhàng đẩy đầu xịt vào từng kẽ răng để đạt được hiệu quả tối ưu.

BẢO DƯỠNG

- Chỉ sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa trung tính để làm sạch.
- Không sử dụng dung môi hoặc các chất mài mòn (ví dụ như giấm hay chất tẩy trắng răng) vì chúng có thể làm hỏng thiết bị.
- Không sử dụng nước ở nhiệt độ trên 40 độC.
- Giữ thiết bị tránh xa nhiệt độ cao và tránh ánh nắng trực tiếp.

Bộ phận máy chính

1. Tháo bình chứa nước và xả nước còn lại bên trong thiết bị.
2. Làm sạch bằng cách sử dụng một miếng vải ẩm sạch với xà phòng, sau đó lau khô bằng vải khô mềm.
3. Không nhấn chìm thiết bị trong nước để rửa sạch.

Xử lý

1. Rửa sạch bằng nước và lau khô bằng vải mềm.
2. Không uốn cong, kéo hoặc xoắn vòi nước.

Bình chứa nước



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn

1. Rửa bằng nước và lau bằng vải mềm, khô.
2. Đảm bảo bình chứa nước được cố định chắc chắn ở vị trí trước khi lau chùi.

Vòi xịt

1. Rửa bằng nước và lau bằng vải mềm, khô.
2. Đặt vòi xịt vào ngăn chứa.
3. Thay thế các vòi xịt tiêu chuẩn và vòi xịt rửa lưới sáu tháng một lần, và các đầu xịt khác ba tháng một lần.

Bộ sạc

Lau phần kim loại của phích cắm điện bằng vải khô sáu tháng một lần.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách giải quyết
Máy không hoạt động	Động cơ không chạy	Hãy chắc chắn Adapter được kết nối chắc chắn với ổ cắm và cắm vào nguồn điện.
		Đảm bảo ổ cắm và nguồn điện được bật.
Áp lực nước rất thấp	Vòi xịt dính bụi bẩn	Làm sạch hoặc thay bằng vòi xịt mới.
	Vòi xịt bị biến dạng	Thay thế bằng vòi xịt mới.
	Van bể bị kẹt bụi bẩn	Làm sạch van và đổ đầy nước sạch
Nước không chảy ra	Bình chứa nước rỗng	Đổ đầy bình nước
	Tạm dừng bật	Đảm bảo chức năng tạm dừng đang hoàn toàn ở vị trí “I”
	Van bình chứa không mở	Nhấn xuống và đảm bảo rằng nó được lắp đúng cách.
Bình chứa bị rò rỉ	Bị thiếu van	Thay thế bằng một van mới
	Van không được lắp đúng cách	Tháo van ra và lắp đặt lại một lần nữa.
Đầu xịt bị vỡ	Đầu tip bị mòn	Thay thế bằng vòi xịt mới



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn



XỬ LÝ CHẤT THẢI

Các chất thải của thiết bị điện và điện tử (WEEE) theo Quy định 2012/19/EU của Châu Âu đã được đưa ra để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế tốt nhất nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, xử lý các chất độc hại và tránh làm tăng bãi chôn lấp rác. Sản phẩm được phân loại là thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy đảm bảo rằng khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa, chúng sẽ được xử lý đúng theo quy định của chính quyền địa phương. Chúng không được xử lý cùng với chất thải gia đình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đầu vào: DC 12V 1.5A, 18W

Áp lực nước: 30-110PSI.



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Sản phẩm này chỉ sử dụng trong gia đình.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Website: riobeauty.vn



Sản phẩm này tuân thủ pháp luật hiện hành của Châu Âu.



Socket Input centre pin positive.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

VPGD: B9 lô 20 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội;

Chi nhánh HCM: F10 Đường số 30, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0243.6988.383

Website: Riobeauty.vn