



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẮM NƯỚC DU LỊCH RIO DCIR2



Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Máy tắm nước du lịch RIO DCIR2 từ tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:

1. Đối với những sản phẩm đang lưu hành theo số tổng đài cũ 8079, Quý khách vui lòng kích hoạt chuyển sang số tổng đài 0942.81.84.86.

Cụ thể, Quý khách soạn tin nhắn:

RIO <dấu cách> MÃ BẢO HÀNH gửi 0942.818486.



Ví dụ: RIO 50234130 gửi 0942.818486.




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

2. Đối với những sản phẩm được gắn tem bảo hành Icheck

Cách 1: Quý khách Cào và quét QR code bằng app Icheck

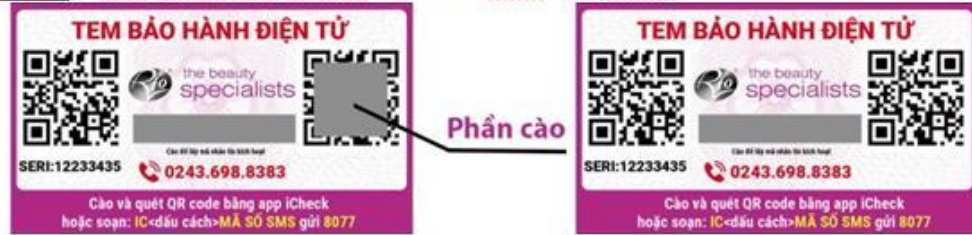

Cách 2: Quý khách cào mã số bảo hành in trên tem Icheck (dán ngoài vỏ hộp sản phẩm)

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>MÃ SỐ SMS gửi 8077



Ví dụ: Sau khi cào, hiện thị mã bảo hành là: j8z7p8ww71

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>j8z7p8ww71 gửi 8077

- Thời hạn bảo hành sản phẩm sẽ được tính từ ngày Quý khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành.
- Chế độ bảo hành 1 đổi mới trong vòng 6 tháng đầu.
- Nếu Quý khách bảo hành sản phẩm khi chưa kích hoạt Rio Beauty sẽ tính từ ngày xuất kho.

CÁC CẢNH BÁO

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Thiết bị này không được dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi. Với trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc chưa có kinh nghiệm về sử dụng sản phẩm thì phải được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn.
- Thiết bị này được cung cấp bởi điện áp thấp an toàn được ghi rõ trên thiết bị. Nếu bất kỳ bộ phận nào của bộ sạc hoặc dây cắm bị hỏng, hãy ngưng sử dụng ngay. Liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng để có phụ kiện thay thế.
- Không cho sản phẩm vào nước. Không sử dụng các chất tẩy rửa để lau chùi thiết bị.
- Chỉ sử dụng bên ngoài
- Không nên sử dụng sản phẩm này nếu nó hoạt động không đúng, hoặc nếu nó đã bị rơi hoặc hư hỏng.
- Đảm bảo thiết bị đã tắt và đã ngắt kết nối khỏi nguồn điện khi cho nước vào bình chứa hoặc trong lúc làm sạch bình chứa nước.
- Để thiết bị xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.
- Không để sản phẩm ở gần khu vực có thể bị rơi vào bồn tắm.



Bodi-Tek®
Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

- Không sử dụng gần với các thiết bị khác vì nguồn nước của thiết bị có thể gây tai nạn hỏng hóc cho thiết bị khác.
- Để tránh vi khuẩn lây lan, hãy đảm bảo bình chứa và vòi xịt nước được rửa kỹ với nước xà bông và lau khô trước khi cất.
- **Không đổ nước trên 40 độ C vào bình chứa.**
- Chỉ đổ nước thông thường hoặc các loại nước súc miệng vào bình chứa. Một số loại nước kháng khuẩn khác có thể làm giảm tuổi thọ của sản phẩm.
- Không sử dụng cho bất kỳ mục đích ngoài khác ngoài vấn đề vệ sinh răng miệng.
- Nếu bạn có vấn đề với nha khoa trong vòng 2 tháng trở lại đây, hãy hỏi ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng thiết bị này.
- Không nhấn vòi phun quá mạnh vào răng và nướu vì có thể gây thương tổn cho răng và nướu của bạn.
- Chúng tôi khuyên bạn nên thay vòi phun 6 tháng 1 lần.
- Không sử dụng thiết bị nếu bạn có vết thương hở trên lưỡi hoặc bên trong miệng.
- Không sử dụng thiết bị khi bạn đeo các đồ trang sức trong khoang miệng. Hãy bỏ chúng ra trước khi sử dụng thiết bị.
- Không sử dụng với nước súc miệng có chứa i-ốt, thuốc tẩy hoặc nước chè.
- **Chỉ sử dụng nước đã qua máy lọc hoặc nước tinh khiết, không dùng với nước máy trực tiếp. Nhà cung cấp sẽ không bảo hành sản phẩm do lỗi người sử dụng.**

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Việc lạm dụng sản phẩm này có thể gây hại:

- Sản phẩm này chỉ được sử dụng theo đúng mục đích đã được ghi rõ trong bản hướng dẫn sử dụng này.
- Không tự ý mở bên trong thiết bị.
- Làm sạch bình chứa nước và vòi phun nước bằng xà bông với nước ấm, lau khô thiết bị và bình chứa nước sau mỗi lần sử dụng và bảo quản. Hạn chế để nước chảy vào các nút chức năng của thiết bị.
- Ngừng sử dụng sản phẩm này nếu bạn cảm thấy đau hoặc nhạy cảm trong quá trình sử dụng, tìm lời khuyên chuyên môn từ nha sĩ của bạn.

CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN



Bodi-Tek®
Look Good | Feel Good




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

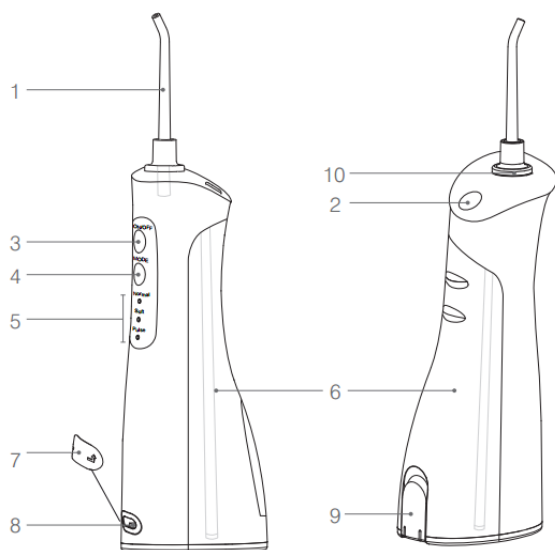

1. Vòi xịt.
2. Nút tháo vòi xịt.
3. Nút bật/ tắt thiết bị.
4. Nút chọn chương trình (MODE)
5. Đèn chỉ báo chương trình đang hoạt động (MODE)
6. Bình chứa nước.
7. Nắp đậy ổ cắm sạc.
8. Ổ cắm sạc
9. Nắp đậy bình chứa nước
10. Ổ cắm vòi xịt.

Lưu ý: Khi sử dụng lần đầu tiên, có thể có một lượng chất lỏng còn lại trong bình chứa nước. Đây là nước cất được sử dụng để kiểm tra hiệu suất lưu lượng nước cho thiết bị khi xuất xưởng, vì vậy không có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe hay vệ sinh.

SẠC PIN

Quan trọng: Hãy sạc đầy pin trong 24h trước lần sử dụng đầu tiên. Các lần sạc sau đó mất khoảng 4h. Cắm cáp USB vào ổ cắm điện của máy và kết nối với nguồn điện.




Quan trọng: Đảm bảo không có nước trong ổ cắm trước khi kết nối với nguồn điện.



Đèn “Pulse” sẽ sáng đỏ khi thiết bị đang sạc. Đèn chuyển màu xanh khi thiết bị đã được sạc đầy.

CÀI ĐẶT

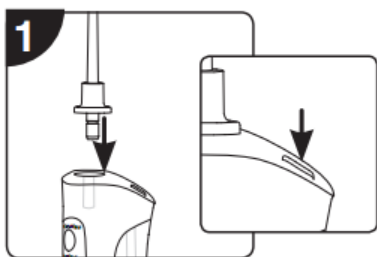

Lắp đầu xịt vào ổ cắm đầu xịt.
Nhấn nút tháo vòi xịt khi cần tháo vòi xịt.




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

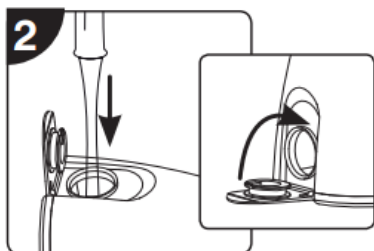

Mở nắp đầy bình chứa nước và đổ đầy nước. Sau đó đóng bình chứa.

Quan trọng: Hãy đảm bảo thiết bị đã tắt trong quá trình đổ nước vào bình chứa.

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG (CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT)


Normal: Dùng để loại bỏ các hạt thức ăn bị kẹt giữa kẽ răng

Soft: Dùng cho nướu nhạy cảm

Pusle: Dùng để thâm nhập vùng răng sâu hơn, loại bỏ mảng bám gây vi khuẩn, massage nướu, vệ sinh vùng giữa nướu và răng.


Giữ cho miệng của bạn hơi mở để cho phép lượng nước xịt vào răng và chảy ra ngoài. Do có phun nước trong quá trình sử dụng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trên một bồn rửa để việc vệ sinh và thoát nước được thuận lợi .

Lưu ý: Bạn có thể phải cho thêm nước vào bình trong quá trình sử dụng nếu quá trình vệ sinh răng diễn ra lâu hơn .

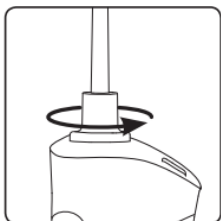

Bạn có thể hướng đầu xịt vào các vùng răng khác nhau bằng cách xoay vòi xịt theo hướng 360 độ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

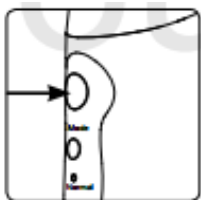

Bật nút ON/OFF để bật máy. Nhấn nút chương trình (chế độ cài đặt) để chọn một chương trình và bắt đầu xịt nước vào răng của bạn .

Lưu ý: thiết bị sẽ tự động tắt sau 2 phút.




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

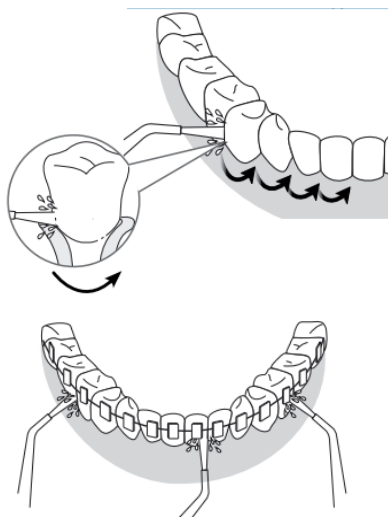


Hướng dòng chảy của tia nước một góc 90 độ so với răng tại đường nướu răng và di chuyển chậm theo các kẽ răng, làm sạch đường nướu bên trong và bên ngoài, cả trên và dưới răng (như hình vẽ)

Làm sạch kỹ lưỡng giữa các kẽ răng, và xung quanh răng (như hình vẽ)


Ngưng sử dụng sản phẩm nếu bạn thấy bị đau hoặc răng nhạy cảm trong quá trình điều trị, hãy hỏi ý kiến bác sĩ nha khoa để có lời khuyên hữu ích.

SAU MỖI LẦN SỬ DỤNG

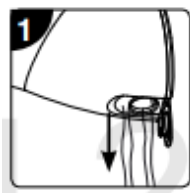


Tắt thiết bị OFF.

Mở nắp đậy chứa nước và đổ hết nước còn lại trong bình chứa ra ngoài.

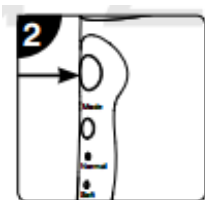

Nhấn nút ON/OFF để thoát hết nước còn lại trong bình chứa và vòi xịt.

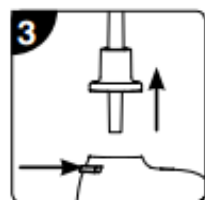

Nhấn nút để tháo vòi xịt.

Lưu ý: Để ngăn vi khuẩn lây lan, đảm bảo rằng bình chứa nước và vòi xịt được rửa kỹ bằng nước xà bông ấm và lau khô trước khi bảo quản.

Khuyến cáo vòi xịt nên được thay thế 6 tháng 1 lần.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

Mức điện áp cổng sạc USB: DC 5V/ 500mA

Model: DCIR2



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho các lần sử dụng tiếp theo




Sản phẩm này chỉ sử dụng cho cá nhân và bên trong nhà (không sử dụng ngoài trời)



Sản phẩm này hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của thị trường Châu Âu.

XỬ LÝ CHẤT THẢI

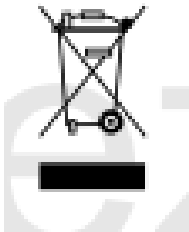

Các chất thải của thiết bị điện và điện tử (WEEE) theo Quy định 2012/19/EU của Châu Âu đã được đưa ra để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế tốt nhất nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, xử lý các chất độc hại và tránh làm tăng bãi chôn lấp rác. Sản phẩm được phân loại là thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy đảm bảo rằng khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa, chúng sẽ được xử lý đúng theo quy định của chính quyền địa phương. Chúng không được xử lý cùng với chất thải gia đình.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

VPGD: B9 lô 20 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội;

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 0243.6988.383 Hotline: 098.5225.550

Website: Riobeauty.vn