



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TRIỆT LÔNG CÁ NHÂN LUX™ RIO IPHH IPL HAIR REMOVER



Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm máy triệt lông cá nhân công nghệ IPL RIO IPHH từ tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.


HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:

1. Đối với những sản phẩm đang lưu hành theo số tổng đài cũ 8079, Quý khách vui lòng kích hoạt chuyển sang số tổng đài 0942.81.84.86.

Cụ thể, Quý khách soạn tin nhắn:

RIO <dấu cách> MÃ BẢO HÀNH gửi 0942.818486.

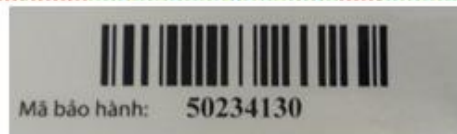

Ví dụ: RIO 50234130 gửi 0942.818486.




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

2. Đối với những sản phẩm được gắn tem bảo hành Icheck

Cách 1: Quý khách Cào và quét QR code bằng app Icheck

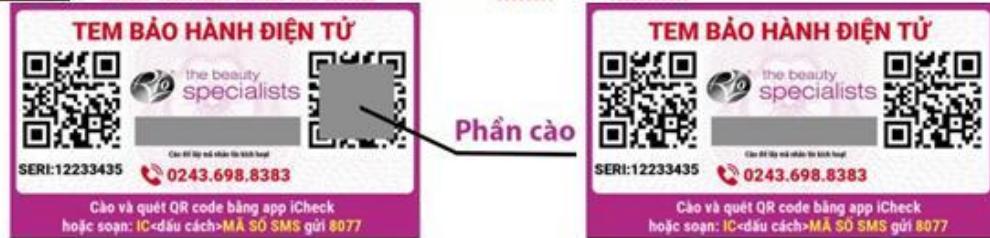

Cách 2: Quý khách cào mã số bảo hành in trên tem Icheck (dán ngoài vỏ hộp sản phẩm)

Soạn tin nhắn: IC<đấu cách>MÃ SỐ SMS gửi 8077



Ví dụ: Sau khi cào, hiện thị mã bảo hành là: j8z7p8ww71

Soạn tin nhắn: IC<đấu cách>j8z7p8ww71 gửi 8077

- Thời hạn bảo hành sản phẩm sẽ được tính từ ngày Quý khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành.
- Chế độ bảo hành 1 đổi mới trong vòng 6 tháng đầu.
- Nếu Quý khách bảo hành sản phẩm khi chưa kích hoạt Rio Beauty sẽ tính từ ngày xuất kho.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Máy triệt lông Rio Lux IPL được thiết kế để loại bỏ vùng lông không mong muốn mà không cần phải tốn kém và không gây đau đớn. Phương pháp triệt lông của máy được chứng minh khoa học, an toàn và hiệu quả và đã được thử nghiệm lâm sàng trong suốt 15 năm. Kết quả thường cho thấy hiệu quả rõ rệt sau 4 lần sử dụng, bạn sẽ thấy vùng lông đã triệt được giảm đáng kể sau khoảng 8-10 lần triệt lông. Kết quả phụ thuộc vào màu lông của từng cá nhân và chu kỳ mọc lại, vì vậy một số người có thể đạt được kết quả mong muốn sau một vài lần triệt trong khi với người khác có thể cần thêm thời gian hơn.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG



Khi thiết bị được đặt vào vùng da cần triệt, các xung ánh sáng sẽ tác động vào tận gốc của nang lông để vô hiệu hóa chúng mà không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Các nang lông bị vô hiệu hóa trong thời gian dài cho đến khi phá hủy hoàn toàn phần chân lông. Năng lượng ánh sáng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

bị hút bởi Melanin sắc tố có trong lông làm nang lông nóng nhanh, và sức nóng sẽ phá hủy các tế bào quyết định sự phát triển của lông.

CÁC CẢNH BÁO

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- **KHÔNG SỬ DỤNG BẤT KỲ LOẠI KEM/ CÁC CHẤT LÀM MÁT DA (LÔ HỘI...) NÀO NGAY TRƯỚC KHI TRIỆT LÔNG, VIỆC NÀY SẼ LÀM HỒNG ĐÈN CẢM BIẾN. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO HÀNH SẢN PHẨM CHO LỖI NÀY.**
- Thiết bị này không được dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Với trẻ em từ 12 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc chưa có kinh nghiệm về sử dụng sản phẩm thì phải được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Không sử dụng thiết bị ở vùng da xung quanh mắt.
- Cảnh báo nguy hiểm: trước khi sử dụng vui lòng tháo tất cả các đồ trang sức (kim loại).
- Không sử dụng gần các vật liệu dễ gây cháy nổ.
- Không sử dụng các thiết bị này trong môi trường ẩm ướt (gần bồn tắm, vòi hoa sen,...)
- Không sử dụng thiết bị khi bị dính nước vào bên trong thiết bị
- Không nhúng thiết bị vào nước.

Các tông màu da và kiểu lông không phù hợp sử dụng thiết bị này:

IPL không thích hợp cho các màu da sẫm, ví dụ như da của người gốc Afro- Caribe, người Châu Phi, Ấn Độ hay Pakistan. Xem “ loại da thích hợp” và luôn luôn thực hiện đối chiếu bảng da trước khi sử dụng.

IPL không thích hợp đối với vùng lông màu đỏ, vàng nhạt, ghi xám hoặc trắng.

Vùng da không sử dụng thiết bị:

Không sử dụng ở vùng da có hình xăm, bao gồm cả xăm thẩm mỹ vĩnh viễn, mụn nhọt, mụn trứng cá, mụn com, mụn cóc, lông mọc trên các nốt đen hoặc nốt ruồi, tàn nhang, vùng da bệnh tật, bị tổn thương, vết bỏng, núm vú, bộ phận sinh dục (vùng bikini có thể sử dụng) hoặc hậu môn, vùng da bị giãn tĩnh mạch, chàm, loét, bệnh vẩy nến, vết thương hở, trên vùng có các sắc tố da bất thường như bạch tạng.

Không sử dụng thiết bị nếu:

- Bạn đang mang thai hoặc cho con bú, có tiền sử bị động kinh hoặc đang dùng thuốc kích thích. Tuyệt đối không dùng IPL nếu bạn có tiền sử bị động kinh. Các loại thuốc thông thường có thể gây nhạy cảm với ánh sáng, nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào thì nên kiểm tra các cảnh báo nhạy cảm và nếu có nghi ngờ vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ. Các thuốc thông thường có thể gây ra nhạy cảm ánh sáng bao gồm: một số thuốc lợi tiểu, một số thuốc kháng sinh, thuốc chống trầm cảm ba vòng và các thuốc được kê toa cho bệnh liên quan đến tuyết giáp, da bị lở loét và bệnh khớp.
- Không sử dụng thiết bị nếu bạn có tiền sử hoặc đang bị ung thư da.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

- Không sử dụng thiết bị nếu bạn đang bị tiểu đường, bệnh thận, bệnh tim hoặc các vấn đề về tuyến giáp.
- Không sử dụng thiết bị liên tục cho một vùng da cần triệt.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị cho bất kỳ phần nào của cơ thể nếu bạn muốn sau này lông phát triển trở lại ở phần đó.

Các phản ứng có thể xảy ra:

Hầu hết mọi người cảm thấy da nóng lên trong khi sử dụng thiết bị. Một số người cảm thấy da đỏ nhẹ. Thông thường các trường hợp này sẽ biến mất trong vòng 24h, một số trường hợp đặc biệt nó có thể lên tới 72h.

Cần ngưng sử dụng thiết bị nếu gặp phải các phản ứng sau đây:

- Trường hợp da nóng rát. Cần làm mát vùng cần triệt, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lô hội làm mát da. Nếu các triệu chứng trên vẫn còn sau 48h, hãy liên hệ với bác sĩ.
- Đau, ngứa, đỏ ở khu vực điều trị. Nếu xảy ra hiện tượng phỏng rộp hoặc bong, hãy liên hệ ngay với nhân viên y tế.
- Khi bạn nghi ngờ có hiện tượng phóng điện từ, phóng tĩnh điện. Hãy ngưng sử dụng, tắt thiết bị và khởi động lại để phục hồi hoạt động.

CẤU TẠO CỦA THIẾT BỊ

- 1 Nút khởi động
- 2 Các mức công suất
- 3 Nút ON/OFF
- 4 Đèn cảm biến
- 5 Ổ cắm nguồn



CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG CỦA LÔNG




Bodi-Tek®
Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

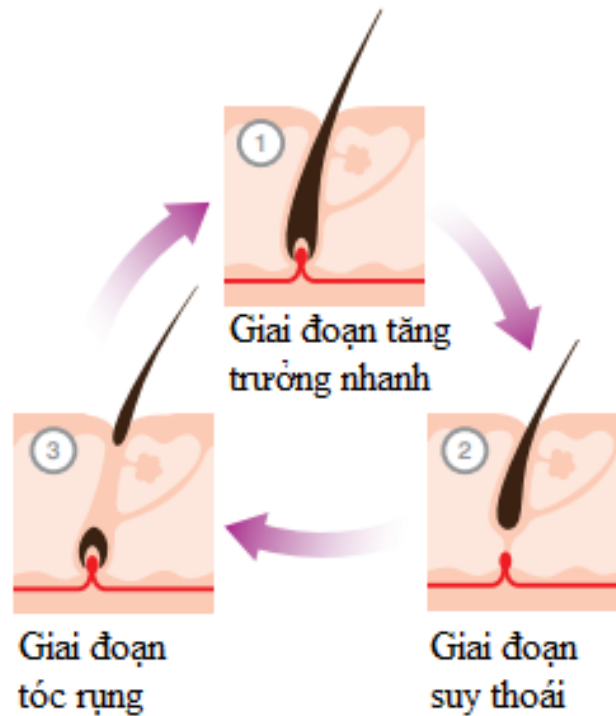

Triệt lông hiệu quả nhất khi lông đang ở giai đoạn tăng trưởng nhanh. Tại một thời điểm nào đó chỉ có một tỉ lệ phần trăm lông trong giai đoạn tăng trưởng nhanh (tỉ lệ phần trăm thực tế thay đổi ở cùng 1 khu vực với kiểu người khác nhau). Để biết được vùng lông có đang ở trong giai đoạn tăng trưởng nhanh tốt nhất là lập kế hoạch triệt lông theo từng tháng cụ thể.

Một kế hoạch triệt lông điển hình sẽ là:

- Phương pháp triệt từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 4: 2 tuần/ lần.
- Phương pháp triệt từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 8 : 4 tuần/ lần
- Phương pháp triệt từ tháng thứ 8 trở đi: 4-6 tuần/ lần hoặc theo yêu cầu cụ thể.

BIỂU ĐỒ CÁC LOẠI DA

IPL phù hợp từ vùng da sáng màu cho tới các vùng da vàng, da rám nắng hoặc da sẫm màu. Để triệt lông hiệu quả thì lông cần phải tối hơn màu da xung quanh. Kết quả tốt nhất là sử dụng trên vùng da sáng màu và lông sẫm màu. Bạn có thể thấy có các mức độ công suất khác nhau để phù hợp với từng vùng da cần triệt. Mỗi vùng triệt cần được kiểm tra màu sắc da để phù hợp với từng mức công suất trên thiết bị. Vui lòng tham khảo “Biểu đồ da” bên dưới để xác định chính xác màu da/ loại da của bạn.


Kiểu da	Màu sắc da	Tông màu da	Đặc điểm da	Mức công suất sử dụng
I	Da rất trắng		Da luôn bị cháy nắng, không bao giờ bị rám nắng	



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

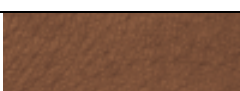II	Da trắng		Thường xuyên cháy nắng	Tùy thuộc vào mức độ test, sử dụng được cả 5 mức công suất
III	Da nâu		Mức độ cháy nắng nhẹ	Tùy thuộc vào mức độ test, có thể sử dụng mức công suất từ 1 đến 4
IV	Da cháy nắng		Hiếm khi cháy nắng, dễ bị rám nắng	
V	Da sẫm màu		Rất hiếm khi cháy nắng	Tùy thuộc vào mức độ test, có thể sử dụng mức công suất từ 1 đến 3
VI	Da đen		Không bao giờ bị cháy nắng	Không phù hợp để sử dụng IPL

KIỂM TRA VÙNG DA CẦN TRIỆT LÔNG

24h trước khi triệt lông, cần kiểm tra phản ứng vùng da cần triệt bằng cách triệt thử nghiệm một vùng nhỏ. Thử nghiệm sẽ xác định được mức công suất tối đa cho vùng da của bạn.

Đối với mỗi khu vực (ví dụ cánh tay, chân) sử dụng các mức công suất từ nhỏ đến mức tối đa cho loại da của bạn (tham khảo ở bảng phân loại màu da). Sử dụng nút nguồn để tăng mức công suất từng bước một. Sử dụng thiết bị dọc theo khu vực cần triệt lông với các mức công suất khác nhau trên da tùy từng lần triệt.

Nếu bạn cảm thấy có bất kỳ sự khó chịu nào thì mức công suất mà bạn vừa sử dụng sẽ là mức công suất tối đa mà bạn nên sử dụng.

Mẩn đỏ có thể xảy ra, nhưng không thường xuyên trong vòng 1 giờ kể từ khi triệt. Tuy nhiên nếu vết mẩn đỏ vẫn còn sau 24h sẽ cho thấy mức công suất mà bạn vừa sử dụng là quá cao so với loại da của bạn.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Mỗi vùng cơ thể sẽ có màu da khác nhau, nên bạn cần cài đặt mức công suất khác nhau cho các vùng da khác nhau. Mỗi vùng da cần được kiểm tra để có mức công suất phù hợp.

LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu phần “Các cảnh báo” trước khi sử dụng sản phẩm

- Tháo bỏ toàn bộ trang sức khỏi gần khu vực da cần triệt lông.
- Bảo đảm bạn đã test khu vực cần triệt trước 24h triệt và nhận biết được mức công suất tối đa dành cho bạn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BƯỚC 1: Trước khi sử dụng, đảm bảo vùng da cần triệt được cạo sạch sẽ và khô.



Bodi-Tek®
 Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

BƯỚC 2: Lắp chân cắm vào bộ nguồn của thiết bị.



BƯỚC 3: Trượt phích cắm như hình bên.

BƯỚC 4: Cắm cáp Adapter vào máy sau đó cắm vào nguồn điện.

BƯỚC 5: Nhấn nút nguồn để mở máy. Chỉ báo mức năng lượng màu vàng sẽ sáng lên theo sau là đèn báo màu xanh lá cây “ON/ OFF/ READY”

BƯỚC 6: Nhấn nút nguồn để chọn mức công suất phù hợp với loại da của bạn. Khi một mức được chọn, đèn báo sẽ hiển thị màu vàng ở mức đó.

BƯỚC 7: Để sử dụng, nhấn đầu cảm biến của thiết bị lên vùng da cần triệt lông. Khi bề mặt thiết bị tiếp xúc hoàn toàn với da, đèn báo màu xanh lục “ON/ OFF/ READY” sẽ bắt đầu nhấp nháy.

BƯỚC 8: Nhấn nút khởi động để tạo ra 1 xung ánh sáng. Bạn sẽ cảm thấy ấm và ngứa nhẹ trên da của bạn.

BƯỚC 9: Di thiết bị trên vùng da cần triệt lông, tránh vùng không có lông. Sau đó chuyển thiết bị sang vùng triệt tiếp theo. Các dấu hiệu nổi trên da thể hiện cho bạn biết vùng da đó đã được triệt lông. Mỗi lần sử dụng thiết bị triệt lông, không triệt quá 1 lần trên cùng 1 vùng da.

BƯỚC 10: Sau khi sử dụng xong, hãy tắt thiết bị bằng cách giữ nút nguồn trong 2 giây. Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện.

CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG TẮT

Thiết bị tự động tắt sau 10 phút không sử dụng và đèn chỉ báo “ON/ OFF/ READY” sẽ chuyển sang màu vàng. Để sử dụng lại, nhấn nút nguồn để đặt lại mức công suất theo yêu cầu.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

SỬ DỤNG CHO VÙNG MẶT



Để triệt lông vùng mặt, mỗi lần nháy đèn phải cách nhau ít nhất 5 giây và không bao giờ được dùng quá 10 phút cho mỗi lần triệt.

Máy triệt lông IPL có thể được sử dụng an toàn trên vùng mặt được khoanh bằng các đường chấm trắng như bên hình.

Lưu ý:

- Không được nhìn vào ánh đèn Flash trong quá trình triệt lông.
- Không sử dụng trên lông mi, tóc trên đầu hoặc lông mày.
- Không triệt vùng xung quanh mắt hoặc môi.

CHĂM SÓC DA MẶT SAU KHI TRIỆT LÔNG

Sau khi triệt lông vùng mặt, cần lưu ý:

- Vùng vừa triệt cần tránh ánh sáng mặt trời.
- Bôi kem chống nắng bảo vệ da trong suốt quá trình triệt lông, và ít nhất 2 tuần sau lần triệt cuối cùng.
- Không sử dụng kem dưỡng, nước hoa hồng, nước tẩy trang hoặc các chất có mùi thơm trên vùng da mặt vừa được triệt.

CÁC CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI

Khi đang triệt, bạn thấy cảm giác như thế nào?

Hầu hết mọi người đều cảm thấy nóng trên nền da vùng triệt. Có cảm giác hơi rát (tương tự như vết bỏng nhẹ) nếu bạn sử dụng mức công suất quá cao hoặc vùng da cần triệt chưa được cạo sạch lông. Nam giới có thể có cảm giác khó chịu hơn nữ giới do lông trên cơ thể nam giới thường dày hơn của nữ giới- tuy nhiên cảm giác này sẽ nhanh chóng biến mất.

Tôi có thể sử dụng IPL trên vùng da nhạy cảm không?

Tất nhiên là được, do IPL chỉ có tác dụng với lông/ tóc do đó vùng da xung quanh không bị ảnh hưởng.

Da của tôi sẽ như thế nào sau khi triệt lông tại vùng da đó?

Thông thường sẽ không có sự thay đổi nào đáng kể. Da có thể bị đỏ một chút sau khi triệt, nhưng bình thường vết đỏ sẽ giảm dần sau 24h. Có thể có một số vết đỏ quanh vùng nang lông- điều này là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên nếu vết đỏ không giảm hoặc bị viêm sau 24h, điều này có nghĩa là bạn đã chọn mức năng lượng cao hơn so với loại da của bạn. Nên trước khi triệt lông bạn cần tham khảo kỹ bảng phân loại các loại da trước khi sử dụng.

Sau khi triệt lông, cần lưu ý những điều gì?



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

Nên tránh nắng hoặc phơi nắng ít nhất 48h sau khi triệt.

Sử dụng kem chống nắng nếu da phải tiếp xúc với ánh nắng. Cũng tránh sử dụng các loại tẩy trang hoặc các loại mặt nạ. Tránh bơi trong nước có chứa Clo hoặc tắm trong bồn tắm có nước quá nóng. Chất Clo trong nước có thể gây ngứa da.

Tôi nên sử dụng lặp lại IPL như thế nào?

Thời gian cho lần triệt tiếp theo là bao lâu không quan trọng. Ban đầu chúng tôi khuyên bạn nên triệt lông trong khoảng thời gian 2 tuần, mặc dù một số người thích triệt 1 tuần 1 lần và người khác thì có thể 1 tháng 1 lần tùy thuộc vào sở thích của từng cá nhân và vùng cần triệt. Miễn là nang lông và vùng da cần triệt không đỏ, đau hoặc viêm, điều trị có thể lặp lại sau ít nhất 48 giờ. Tránh việc triệt lông quá mức trên cùng 1 khu vực trong cùng 1 thời gian. Điều này khiến cho làn da có thể bị đỏ hoặc sưng. Để duy trì làn da sạch không còn lông và đảm bảo các nang lông đã bị triệt không mọc lại, hãy lặp lại quá trình triệt lông mỗi 4 đến 6 tuần hoặc theo nhu cầu.

Có những thói quen nào tốt cho da sau khi triệt mà tôi nên tham khảo không?

Nếu bạn muốn, bạn có thể sử dụng các loại kem dưỡng có chức năng làm mát da, túi nước đá hoặc khăn ẩm để làm mát vùng da vừa được triệt, mặc dù vậy chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng xà bông trên các vùng da vừa được triệt trong 24h. Khi triệt vùng nách, tránh sử dụng các loại khử mùi, chống mồ hôi trong 2-3 ngày. Tránh ánh nắng mặt trời không cần thiết trong 48h.

Tôi cần triệt lông trong bao nhiêu lần?

Điều này phụ thuộc vào mỗi một vùng da, mật độ lông mọc, chu kỳ tăng trưởng và màu sắc của lông ở mỗi người khác nhau. Lông đen trên làn da trắng là đáp ứng tốt nhất, nhưng cả 2 loại lông đen và lông sẫm màu cần sử dụng nhiều lần hơn để hiệu quả được kéo dài hơn. Ban đầu với mỗi lần triệt lông, bạn sẽ thấy sự giảm dần rõ rệt của lông ở vùng triệt. Để duy trì làn da sạch lông và để đảm bảo nang lông bị vô hiệu hóa không còn phát triển, lặp lại việc triệt lông mỗi 4-6 tuần hoặc theo yêu cầu.

Tôi có thể sử dụng phương pháp triệt lông khác ở giữa các lần triệt lông bằng IPL không?

Bởi vì triệt lông bằng IPL là triệt lông tận trong nang lông, các phương pháp loại bỏ lông khác như nhổ lông, tẩy lông, waxing không phù hợp cho việc sử dụng cùng với phương pháp triệt lông IPL. Tẩy lông cũng không phù hợp vì nó loại bỏ các sắc tố và làm cho triệt lông bằng IPL không hiệu quả. Cạo lông, sử dụng kem cạo râu là hoàn toàn phù hợp giữa các lần triệt lông bằng IPL.

Tại sao lông vẫn mọc trở lại ở vùng mà tôi vừa triệt?

Thông thường trong 1 đến 2 tuần sau khi triệt lông vẫn mọc lại. Sau 2 tuần, bạn sẽ thấy rằng lông tự rụng, bạn không nên can thiệp mà để lông rụng một cách tự nhiên. Một số sợi lông sẽ không bị ảnh hưởng khi sử dụng IPL- hoặc có thể do kỹ thuật triệt lông chưa đúng hoặc có thể lông đang ở giai đoạn chuẩn bị mọc. Những sợi lông này sẽ được triệt ở lần triệt tiếp theo.

Dùng IPL lâu dài có hại cho da của tôi không?

Trong 15 năm qua, việc sử dụng ánh sáng cảm biến từ IPL để loại bỏ lông cừu đã được ghi nhận trong các tạp chí chuyên ngành, và không có báo cáo nào về các phản ứng phụ hay các thương tổn liên quan đến việc sử dụng máy IPL này.

CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG



Bodi-Tek®
Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

IPL không gây ra sự khó chịu đáng kể nào. Bạn có thể cảm thấy một chút nóng lên ở vùng da vừa triệt.

Nếu bạn cảm thấy đau hoặc không thoải mái, có thể do bạn đã cài đặt mức công suất quá cao.

- Không che khe thông gió ở mặt sau của thiết bị trong quá trình sử dụng.
- Không đặt thiết bị trên các bề mặt mềm như thảm, khăn, chăn... vì có thể chặn các lỗ thông hơi làm mát ở phía dưới phím điều khiển.
- Không sử dụng thiết bị sau khi uống rượu, khi bạn không khỏe hoặc thấy mệt mỏi.
- Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị sóng ngắn hoặc lò vi sóng.
- Thiết bị có thể bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nhiễu điện từ. Nếu nghi ngờ các hiện tượng như vậy, hãy tắt thiết bị sau đó khởi động lại.
- Không nên bỏ qua bất kỳ tính năng an toàn nào.
- Không sử dụng sản phẩm này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mô tả trong bản hướng dẫn sử dụng này.
- Sản phẩm này chỉ dùng tại gia đình. Nó không phải là sản phẩm dùng cho các dịch vụ chuyên nghiệp như Spa.

BẢO DƯỠNG

- Chỉ sử dụng sản phẩm này với bộ nguồn đi kèm sản phẩm.
- Sau mỗi lần sử dụng, luôn rút phích cắm của bộ nguồn khỏi ổ điện và để tránh xa tầm tay của trẻ em.
- Nếu có bất kỳ hư hỏng nào đối với một bộ phận nào đó của thiết bị, kể cả bộ nguồn, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức.
- Nếu bộ nguồn điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi chính nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hoặc các đại lý ủy quyền để tránh gây nguy hiểm cho người dùng.
- Không tự ý tháo dỡ thiết bị, hoặc tự sửa chữa. Nếu bạn có vấn đề gì về sản phẩm, hãy liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc đại lý phân phối.
- Để vệ sinh thiết bị, hãy lau bằng khăn vải mềm ẩm.
- Trong quá trình triệt lông, lông sẽ nằm lại ở bề mặt của bóng đèn, điều này làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thiết bị. Nếu bạn nhận thấy có bất kỳ sợi lông nào dính trên bề mặt bóng đèn, hãy tắt thiết bị và làm sạch bằng vải mịn hoặc bông mềm, để đảm bảo không còn bất kỳ sợi lông nào bị dính lại.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Đơn vị
 - Nguồn sáng: ánh sáng cảm biến

Nhiệt độ môi trường
 - Sử dụng ở nhiệt độ môi trường: 0-35 độ C

Độ ẩm
 - Độ ẩm hoạt động: 10%- 60%



Bodi-Tek®
 Look Good | Feel Good




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

- Diện tích tiếp xúc vùng da: 30 x 10mm
- Bước sóng đầu ra: >550nm
- Đầu vào: 12V 3A, 36W
- Bảo quản ở nhiệt độ: - 5 -40 độ C
- Độ ẩm bảo quản: 5% -90%

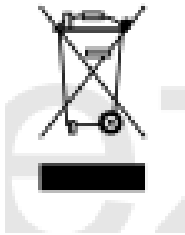

XỬ LÝ CHẤT THẢI

Các chất thải của thiết bị điện và điện tử (WEEE) theo Quy định 2012/19/EU của Châu Âu đã được đưa ra để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế tốt nhất nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, xử lý các chất độc hại và tránh làm tăng bãi chôn lấp rác. Sản phẩm được phân loại là thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy đảm bảo rằng khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa, chúng sẽ được xử lý đúng theo quy định của chính quyền địa phương. Chúng không được xử lý cùng với chất thải gia đình.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

VPGD: B9 lô 20 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội;

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 0243.6988.383 Hotline: 098.5225.550

Website: Riobeauty.vn