



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383 / Website: riobeauty.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY MẶT NẠ CHĂM SÓC DA CAO CẤP RIO FCLT



Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Máy mặt nạ chăm sóc da cao cấp RIO FCLT từ tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Do mất Collagen và độ đàn hồi khi chúng ta già đi, làn da trở nên mỏng hơn, khô hơn và bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn, vết nhăn. Lão hóa da cũng dễ bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của nám và



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383 / Website: riobeauty.vn

tàn nhang. Ngoài ra lớp hạ bì của da có thể mất từ 20 đến 80% độ dày của nó trong quá trình lão hóa. FaceLITE sử dụng hai bước sóng ánh sáng đã được chứng minh: 633nm (ánh sáng đỏ) và 830nm (gần ánh sáng hồng ngoại). Những bước sóng này được thể hiện trong các nghiên cứu lâm sàng để kích thích tế bào sản sinh ra Collagen và elastin thông qua một quá trình gọi là photobiomodulation.

Máy mặt nạ chăm sóc da cao cấp RIO FCLT được thiết kế để cung cấp ánh sáng trực tiếp vào da, đảm bảo lượng ánh sáng tối đa chiếu vào các mục tiêu của nó tránh lãng phí.

CÁC CẢNH BÁO

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho các lần sử dụng tiếp theo.
- Thiết bị này không dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi và những người có vấn đề về thể chất, giác quan hoặc tinh thần.
- Thiết bị này phải được cung cấp ở mức điện áp cực thấp an toàn tương ứng với dấu trên thiết bị. Nếu bất kỳ thành phần nào của bộ chuyển đổi nguồn hoặc dây điện bị hỏng, hãy ngưng sử dụng và liên hệ với nhà phân phối để được giải quyết.
- Không ngâm sản phẩm vào nước. Không sử dụng sản phẩm với dung môi hoặc chất mài mòn.
- Không sử dụng sản phẩm này nếu sản phẩm không hoạt động đúng hoặc sản phẩm bị rơi/hư hỏng.
- Không sử dụng thiết bị nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào có thể gây nhạy cảm với ánh sáng. Điều này có thể gây ra phản ứng da nghiêm trọng.
- Nhạy cảm với ánh sáng là tác dụng phụ của nhiều loại thuốc khác nhau. Chúng có thể là thuốc kháng sinh, thuốc hóa trị hoặc thuốc lợi tiểu. Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ loại thuốc nào, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ đang điều trị cho bạn.
- Không sử dụng thiết bị này vào mục đích khác ngoài những điều kiện được liệt kê trong chỉ định sử dụng.
- Không sử dụng thiết bị nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Thiết bị này không được thử nghiệm trên phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cho đó nguy cơ đối với thai nhi, trẻ sơ sinh hoặc phụ nữ đang mang thai là không rõ.
- Không sử dụng hệ thống đèn LED của thiết bị nếu bạn bị Lupus ban đỏ, bệnh chàm nhạy cảm hoặc bệnh bạch tạng.
- Không sử dụng thiết bị nếu bạn bị nhạy cảm với ánh sáng. Chúng tôi khuyên bạn trước khi sử dụng thiết bị nên kiểm tra độ nhạy với ánh sáng.
- Trong quá trình sử dụng nếu bạn cảm thấy nóng hoặc da mặt khó chịu, tắt thiết bị ngay lập tức.



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383 / Website: riobeauty.vn

- Chỉ sử dụng thiết bị với mặt nạ Hydrogel được đề xuất. Các mặt nạ khác chưa được thử nghiệm với thiết bị này.
- Không sử dụng thiết bị này nếu không làm sạch mặt của bạn, tẩy trang sạch sẽ trước khi sử dụng. Một số thành phần trong kem dưỡng hoặc các lớp trang điểm có thể làm giảm hiệu quả điều trị.
- Không được sử dụng thiết bị gần với nước hoặc khu vực dễ bị đổ nước vào thiết bị.
- Giữ thiết bị tránh xa các bề mặt nóng.
- Không sử dụng thiết bị nếu mặt nạ, cáp sạc USB hoặc bộ điều khiển bị hư hỏng.
- Dây đeo của thiết bị có chứa hỗn hợp Polyester, nylon và lycra. Nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong hỗn hợp trên, bạn có thể không sử dụng được dây đeo đầu của thiết bị này.
- Không sử dụng thiết bị này nếu bạn thấy đau đầu gây ra bởi đèn LED.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383 / Website: riobeauty.vn

1. Đối với những sản phẩm đang lưu hành theo số tổng đài cũ 8079. Quý khách vui lòng kích hoạt chuyển sang số tổng đài 0942.81.84.86.

Cụ thể. Quý khách soạn tin nhắn:

RIO <dấu cách> MÃ BẢO HÀNH gửi 0942.818486.

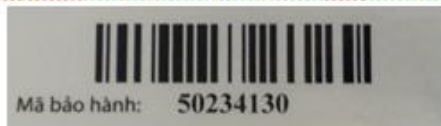

Ví dụ: RIO 50234130 gửi 0942.818486.

2. Đối với những sản phẩm được gắn tem bảo hành Icheck

Cách 1: Quý khách Cào và quét QR code bằng app Icheck



Phần cào



Cách 2: Quý khách cào mã số bảo hành in trên tem Icheck (dán ngoài vỏ hộp sản phẩm)

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>MÃ SỐ SMS gửi 8077



Phần cào



Ví dụ: Sau khi cào, hiện thị mã bảo hành là: j8z7p8ww71

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>j8z7p8ww71 gửi 8077

- Thời hạn bảo hành sản phẩm sẽ được tính từ ngày Quý khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành.
- Chế độ bảo hành 1 đổi mới trong vòng 6 tháng đầu.
- Nếu Quý khách bảo hành sản phẩm khi chưa kích hoạt Rio Beauty sẽ tính từ ngày xuất kho.

CẤU TẠO



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383 / Website: riobeauty.vn



- | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Mặt nạ | 2. Bộ điều khiển | 3. Nút bật/ tắt |
| 4. Đèn chỉ báo vạch pin | 5. Ổ cắm USB type C | 6. Cáp sạc USB |
| 7. Dây đeo qua đầu | 8. Túi đựng | |

KIỂM TRA ĐỘ NHẠY VỚI THIẾT BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, bạn phải kiểm tra độ nhạy với ánh sáng của thiết bị.

1. Đặt FaceLITE trên mặt trong cánh tay của bạn.
2. Bật thiết bị, nếu bất kỳ lúc nào da bạn cảm thấy nóng hoặc khó chịu, DỪNG sử dụng thiết bị ngay lập tức.
3. Sau khi trị liệu hãy chờ ít nhất 6 giờ. Nếu thấy vùng da trị liệu xuất hiện màu đỏ và hoặc ngứa thì faceLITE không phù hợp với bạn.

HƯỚNG DẪN CÁCH SẠC THIẾT BỊ



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383 / Website: riobeauty.vn

Để sạc faceLITE, hãy cắm đầu cáp USB- tupe C vào bộ điều khiển. Lắp đầu nối USB vào nguồn điện. 3 đèn LED trên bộ điều khiển sẽ bắt đầu nhấp nháy để báo hiệu sạc. Khi sạc đầy cả 3 đèn LED sẽ sáng cùng lúc.

Lưu ý: Hãy sạc khi đèn LED cuối cùng bắt đầu nhấp nháy. faceLITE sẽ không hoạt động trong khi sạc.

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

Trước mỗi lần sử dụng, khi thiết bị đang tắt, hãy làm sạch mặt nạ faceLITE (xem trong phần hướng dẫn bảo quản thiết bị)

FaceLITE đi kèm dây đeo có thể điều chỉnh cho phép bạn thoải mái đeo mặt nạ.

PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU

Để có kết quả tốt nhất nên trị liệu trong 3-5 ngày/ tuần, tối thiểu 4 tuần. Trị liệu này nên được thực hiện theo yêu cầu, theo lối sống và tình trạng của da.

Các bước thực hiện với FaceLITE thông thường:

1. Làm sạch và tẩy trang cho da để loại bỏ các loại make-up đang có trên da.
2. Để lắp mặt nạ, luồn dây đeo qua 2 lỗ ở 2 bên của mặt nạ sau đó nối với nhau bằng phần dính chặt có trên dây.
3. Đặt thiết bị faceLITE trên đầu và áp chặt vào mặt, điều chỉnh dây đeo cho vừa khít với đầu bạn.
4. Nhấn nút Bật/tắt trên bảng điều khiển để bật thiết bị. Thiết bị sẽ tự động tắt sau 10 phút sử dụng.
5. Khi kết thúc điều trị hãy tháo mặt nạ ra.
6. Sử dụng các loại serum, kem dưỡng ẩm của bạn.

Lưu ý: Ngay sau khi trị liệu, trên da có thể xuất hiện màu đỏ. Điều này sẽ biến mất trong vòng 1-2 giờ.

Trị liệu kết hợp FaceLITE với mặt nạ Hydrogel:

FaceLITE có thể được kết hợp với mặt nạ Hydrogel để tăng cường kết quả (Vui lòng xem hướng dẫn được cung cấp kèm với FaceLITE)

Mặt nạ Hydrogel được áp dụng sau khi làm sạch da và trước khi đặt faceLITE lên mặt. Lấy mặt nạ Hydrogel ra khỏi bao bì và đặt trực tiếp lên da. Vuốt phẳng mặt nạ để ôm khít khuôn mặt. Sau đó sử dụng faceLITE trong 10 phút. Mặt nạ Hydrogel có thể được giữ tối đa trong 30 phút.

BẢO QUẢN THIẾT BỊ



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383 / Website: riobeauty.vn

Trước mỗi lần sử dụng, khi thiết bị đang tắt, hãy làm sạch FaceLITE theo hướng dẫn làm sạch dưới đây:

1. Đảm bảo thiết bị không sạc trong lúc vệ sinh.
2. Làm sạch mặt nạ bằng khăn ẩm sạch. Các vết bẩn có thể được làm sạch bằng cách lau nhẹ nhàng với cồn 70%. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào khác vì những sản phẩm này có thể làm hỏng bề mặt nhựa của FaceLITE.
3. Làm sạch bộ điều khiển bằng vải sạch ẩm.

Cất giữ faceLITE ở nhiệt độ phòng trong điều kiện khô ráo. Sử dụng túi đựng được cung cấp đi kèm. Không để faceLITE trong điều kiện bụi bẩn, trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời hoặc trong điều kiện ẩm ướt.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề thường gặp	Nguyên nhân	Giải pháp
Không có ánh sáng đỏ hoặc hồng ngoại	Hết pin	Sạc bộ điều khiển
Không có ánh sáng đỏ hoặc hồng ngoại	Thiết bị đang được sạc	Rút cáp sạc ra khỏi bộ điều khiển

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: FCLT

Điện đầu vào bộ điều khiển: 5V 350mA

Điện đầu vào mặt nạ: 5V 280mA (CC)



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383 / Website: riobeauty.vn



Sản phẩm này tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn hiện hành của EU



Thiết bị này không thích hợp sạc trong nhà tắm



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho các lần sử dụng tiếp theo.



Biểu tượng này cho biết đầu nối USB



Thiết bị này chỉ sử dụng ở trong nhà



Biểu tượng này cho biết thiết bị sử dụng Pin Lithium Ion Polymer



Biểu tượng này có ý nghĩa giữ thiết bị tránh xa ánh sáng mặt trời trực tiếp



Biểu tượng này đề cập đến số thứ tự Catalogue cho mặt nạ FaceLITE



Thiết bị này chỉ được cung cấp bởi điện áp thấp được chỉ định trên thiết bị



Biểu tượng này cho biết mã CODE của mặt nạ FaceLITE



Dòng điện một chiều

Trọng lượng: 600g(bao gồm bộ điều khiển và mặt nạ)

Ánh sáng LED:

- Ánh sáng đỏ: 630nm +/- 10nm
- Gắn ánh sáng hồng ngoại: 830 nm +/- 17.5nm

Tổng kích thước của thiết bị:

- Mặt nạ: 406mm max (w) x 196mm max (h)
- Bộ điều khiển: 23mm max (đĩa) x 104mm (l)

Chương trình hoạt động: 10 phút

Nhiệt độ hoạt động: 0°C to 40°C

Nhiệt độ lưu trữ và vận chuyển: -5°C to 55°C

Độ ẩm hoạt động: 30% đến 95%

Độ ẩm lưu trữ và vận chuyển: 20% đến 85%

XỬ LÝ CHẤT THẢI



the beauty
specialists

Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383 / Website: riobeauty.vn

Các chất thải của thiết bị điện và điện tử (WEEE) theo Quy định 2012/19/EU của



Châu Âu đã được đưa ra để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế tốt nhất nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, xử lý các chất độc hại và tránh làm tăng bãi chôn lấp rác. Sản phẩm được phân loại là thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy đảm bảo rằng khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa, chúng sẽ được xử lý đúng theo quy định của chính quyền địa phương. Chúng không được xử lý cùng với chất thải gia đình.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

VPGD: B9 lô 20 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội;

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 0243.6988.383 Website: Riobeauty.vn



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good