



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐAI MASSAGE DÀNH CHO VÙNG BỤNG VÀ TAY BODI-TEK AATB Abs & Arms Toning Belt™TB-40



Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Đai Massage cao cấp dành cho vùng bụng và vùng bắp tay Bodi- Tek AATB từ tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

CÁC CẢNH BÁO

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho các lần sử dụng tiếp theo.

Nếu không thể tự luyện tập cùng thiết bị do sức khỏe yếu, thì bạn cần một huấn luyện viên hướng dẫn các bài tập trước khi sử dụng thiết bị này hoặc bất kỳ thiết bị nào khác.

Không được sử dụng thiết bị:

- Trên các vùng da có rối loạn như bệnh Rosacea, mụn bọc, da bị trầy xước, da nhạy cảm hoặc trên các vết sẹo, nốt ruồi hoặc vùng da bị giãn tĩnh mạch.
- Trong các trường hợp sau đây: các khối u lành tính và ác tính, xuất huyết da, viêm da, vết thương hở, vết bầm tím hoặc vùng da bị hồng.
- Nếu cơ thể bạn có cấy ghép điện tử (ví dụ: máy tạo nhịp tim)
- Nếu bạn bị huyết áp cao/ thấp hoặc do bất kỳ vấn đề khác về tim mạch.
- Nếu bạn đang mang thai hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt.
- Đối với những người, kể cả trẻ em, với khả năng về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần suy giảm, hoặc những người thiếu kiến thức và kinh nghiệm, trừ khi họ được hướng dẫn và giám sát liên quan đến việc sử dụng thiết bị.

Những trường hợp sau được sử dụng Đai massage Bodi-Tek AATB nếu có sự chấp thuận của bác sỹ trước khi dùng:

- Bạn có tiền sử bị bệnh tim hoặc đang bị bệnh tim.



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

- Bạn có cấy ghép chỉnh hình.
- Bạn bị chứng động kinh, đa xơ vữa, viêm tĩnh mạch, viêm mô do bệnh tật hoặc chấn thương hoặc giãn tĩnh mạch ở giai đoạn sau của nó.
- Bạn bị chấn thương cấp tính, gãy xương hoặc đang phục hồi sau phẫu thuật gần đây.
- Bạn có các bộ phận trên cơ thể bị sưng, viêm hoặc bị thương.
- Bạn bị bệnh tiểu đường và nó ảnh hưởng đến hoạt động ở chân của bạn.

Nếu bạn có nghi ngờ nào về việc sử dụng Đai massage Bodi-tek AATB vì bất kỳ lý do gì, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Không đặt Đai massage Bodi-tek AATB ở:

- Trên vùng da bị đau hoặc hồng, se, nốt ruồi, vùng bị nhiễm hoặc các bộ phận của cơ thể, nơi bị giảm cảm giác. Trong những trường hợp rất hiếm gặp như kích ứng da có thể xảy ra xung quanh vùng điện cực. Nếu điều này xảy ra, hãy ngưng sử dụng sản phẩm.
- Trên bất kỳ đồ trang sức nào có khả năng dẫn điện vào cơ thể.

THẬN TRỌNG

- Để xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.
- KHÔNG dùng cho trẻ em dưới 14 tuổi.
- KHÔNG sử dụng nếu bạn đang uống bia, rượu.
- KHÔNG sử dụng trong khi đang lái xe hay vận hành máy móc.
- KHÔNG chạm vào mặt dẫn điện của đai trong khi đai đang hoạt động.
- KHÔNG đè, đặt vật nặng lên thiết bị hoặc cho thiết bị vào nước.
- KHÔNG làm sạch thiết bị bằng dung môi hoặc các chất mài mòn.
- Khi sử dụng, nếu bạn cảm thấy khó chịu, trước tiên hãy giảm cường độ, nếu cảm giác khó chịu vẫn tiếp tục thì ngưng sử dụng và liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
- Luôn hỏi ý kiến của bác sĩ để có chuẩn đoán đúng nếu bạn không biết nguyên nhân gây ra đau trong khi sử dụng.
- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu các cảnh báo và hướng dẫn đi kèm với thiết bị không được tuân theo.

THÔNG TIN CHUNG

- Không nhúng thiết bị vào nước.
- Không bao giờ cho thiết bị vào máy giặt, bạn có thể rửa bằng nước ấm.
- Không đặt thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao.
- Tháo pin ra khỏi thiết bị nếu bạn không định sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.
- Luôn sử dụng đúng loại pin (2x 1.5V AAA) và đảm bảo rằng pin được đặt chính xác như được chỉ định trong ngăn chứa pin.
- KHÔNG tự ý tháo dỡ hay sửa chữa thiết bị. Việc tháo dỡ hoặc sửa chữa chỉ được thực hiện bởi nhà phân phối. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, hãy liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc nhà phân phối.



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn


HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:

1. Đối với những sản phẩm đang lưu hành theo số tổng đài cũ 8079, Quý khách vui lòng kích hoạt chuyển sang số tổng đài 0942.81.84.86.

Cu thể, Quý khách soạn tin nhắn:

RIO <dấu cách> MÃ BẢO HÀNH gửi 0942.818486.

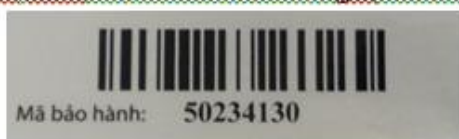

Ví dụ: RIO 50234130 gửi 0942.818486.

2. Đối với những sản phẩm được gắn tem bảo hành Icheck

Cách 1: Quý khách Cào và quét QR code bằng app Icheck



Phản cào



Cách 2: Quý khách cào mã số bảo hành in trên tem Icheck (dán ngoài vỏ hộp sản phẩm)

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>MÃ SỐ SMS gửi 8077



Phản cào



Ví dụ: Sau khi cào, hiện thị mã bảo hành là: j8z7p8ww71

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>j8z7p8ww71 gửi 8077

- Thời hạn bảo hành sản phẩm sẽ được tính từ ngày Quý khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành.
- Chế độ bảo hành 1 đổi mới trong vòng 6 tháng đầu.



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

– Nếu Quý khách bảo hành sản phẩm khi chưa kích hoạt Rio Beauty sẽ tính từ ngày xuất kho.

LỜI GIỚI THIỆU

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm Đai massage dành cho vùng bụng và cánh tay Bodi-Tek AATB. Đai massage dành cho vùng bụng và cánh tay Bodi-Tek AATB rất dễ sử dụng với các tính năng tự động, các phím thao tác đơn giản và màn hình hiển thị dễ đọc. Có 6 chương trình đưa bạn qua các cấp độ tập thể dục khác nhau và tối ưu hóa để mang đến cho bạn một vùng cơ bụng và cơ tay chặt chẽ, săn chắc.

Đai massage Bodi-Tek AATB hoạt động như thế nào?

Đai massage Bodi-Tek AATB hoạt động theo nguyên tắc EMS (kích thích cơ điện). Nó tạo ra các xung điện an toàn, nhẹ nhàng được đưa vào da của bạn thông qua các miếng đệm đặt bên trong vành đai. Những xung điện này kích thích các dây thần kinh kiểm soát các cơ. Các xung điện được tạo ra mô phỏng các cơn co thắt cơ bắp tự nhiên, có hiệu quả và thoải mái. Các chương trình đưa ra các xung đều đặn, thư giãn các cơ, theo cách tương tự với luyện tập thể dục thường xuyên.

Bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Khi mới bắt đầu, các xung mang đến cảm giác ngứa nhẹ và khi cường độ được tăng lên, bạn sẽ cảm nhận rõ sự co thắt cơ bắp. Thời gian co giãn và thư giãn thay đổi tùy theo chương trình được chọn. Các cơn co trôn tru và từng cơn co sẽ bắt đầu tăng từ từ, giữ nó ở một vị trí co bóp trong vài giây và sau đó thư giãn nhẹ nhàng.

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM



Bộ điều khiển:



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----



ON/OFF: Nhấn để bật/ tắt thiết bị.

MODE: Nhấn để chọn chương trình luyện tập.


INT-UP/INT-DOWN: Tăng hoặc giảm cường độ.

FRE-UP/FRE-DOWN: Tăng hoặc giảm tần số.

Ngăn chứa Pin

- Tháo nắp đậy pin trên thiết bị để nhìn thấy ngăn chứa pin.
- Lắp pin Alkaline AAA 2 x 1.5V vào khoang chứa pin. Pin phải được đặt đúng cực như trong khoang. Đặt pin theo hướng sai có thể gây hư hỏng cho thiết bị.

Thông tin hiển thị

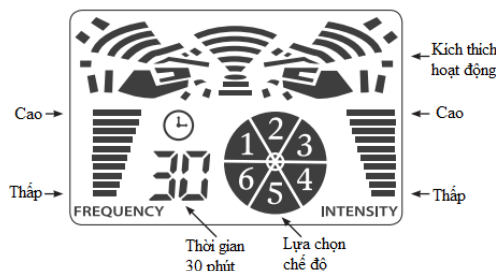

Các bước tần số và cường độ

Có 10 bước cho cả cấp độ “tần số” và “cường độ”

Chế độ

Chế độ hiển thị chương trình hoạt động bạn đã chọn

Chế độ	Chương trình	Mô tả
1	Toning	Các xung có tông ngắn
2	Regular Crunch	Các xung chiều dài trung bình có tạm dừng
3	Core Condition	Các xung co thắt sâu có tạm dừng
4	Body Trim	Mô phỏng tập thể dục hỗn hợp chung với tạm dừng



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

5	Athletic Build-up	Thường xuyên với cường độ ngày càng tăng
6	Pro	Mô phỏng tập thể dục đầy đủ với các yếu tố hỗn hợp

Chức năng tự động


- Thiết bị có chức năng hẹn giờ tự động. Mức đầu ra sẽ là 0 sau 30 phút (thiết bị tự động tắt sau 30 phút)
- Nếu bạn thay đổi chế độ luyện tập trong 30 phút, bộ hẹn giờ sẽ đếm ngược từ thời gian còn lại ban đầu.

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ

Thiết lập đai

Đai massage dành cho vùng bụng và cánh tay Bodi- Tek AATB được thiết kế để phù hợp với các kích thước vòng eo từ 27inch đến 55inch (tương đương kích thước vòng eo từ 68,58cm đến 139,7cm). Để tăng kích thước vòng đai bụng, hãy sử dụng phần đai nối dài được đi kèm cùng bộ sản phẩm.

1. Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt. Nếu bạn vô tình bật thiết bị, hãy tắt nó bằng cách ấn nút ON/ OFF.
2. Xác định vị trí hai ổ cắm đầu ra trên đầu bộ điều khiển.
3. Chọn bắt đầu từ chế độ luyện tập Toning:

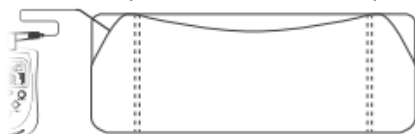

Chỉ dùng đai bụng

Tìm dây dẫn kết nối từ bên trong túi bên. Dây dẫn kéo dài đến 60cm và tự động rút lại. Cắm dây dẫn kết nối vào một trong hai ổ cắm trên đỉnh của thiết bị điều khiển.



Chỉ dùng đai cánh tay

Cắm một đầu của dây dẫn kết nối vào mỗi hộp cánh tay (hoặc ổ cắm) và cắm đầu còn lại vào ổ cắm đầu ra trên đỉnh của thiết bị điều khiển. Cả hai đai cánh tay có thể được kết nối cùng một lúc.



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn



Sử dụng cả đai bụng và đai cánh tay

Cả đai bụng và đai tay có thể được sử dụng cùng nhau, tuy nhiên bạn sẽ cảm nhận thấy mức giảm cường độ. Chạy đai bụng từ một ổ cắm đầu ra trên thiết bị điều khiển. Sau đó sử dụng một trong các dây dẫn kết nối để liên kết hai đai tay và đầu kia để kết nối với bộ điều khiển.

Miếng đệm phù hợp và vị trí đặt ở đai

1. Kết nối mỗi Pad bằng cách sử dụng **poppers** kim loại. Tháo miếng bảo vệ miếng đệm bằng nhựa trong suốt (giữ để thay thế sau khi sử dụng). Nếu Pad mất độ dính/ âm, hãy làm ẩm bằng vài giọt nước. Đảm bảo cả hai miếng đệm đều được gắn vào vành đai bụng và hai miếng đệm được sử dụng ở mỗi cánh tay.
2. **Quan trọng:** Khi định vị đai trên thân máy, hãy đảm bảo các miếng đệm vẫn được kết nối người sử dụng.



3. Đặt đai ở giữa eo. Đảm bảo các miếng đệm tiếp xúc tốt với da. Đối với kích thước vòng eo lớn hơn, hãy sử dụng phần đai nối thêm.
4. Khi sử dụng ở cánh tay, hãy đặt miếng đệm chính lên cơ bắp.
5. Khi đã định vị chính xác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hoạt động

1. Chỉ bật thiết bị khi đã đeo đai bụng hoặc đai cánh tay, và kiểm tra xem các miếng đệm đã tiếp xúc với da không. Bật bằng cách nhấn nút ON/OFF.
2. Chọn chương trình hoạt động bằng cách ấn nút MODE.
3. Nhấn nút INT-UP để tăng cường độ- cường độ có 10 mức. Để giảm cường độ, ấn INT-DOWN.



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

4. Bạn sẽ nhận thấy một cảm giác ngứa trước khi co thắt cơ. Điều chỉnh cường độ theo mức độ thoải mái của bạn. Bạn sẽ cảm thấy co thắt mạnh mẽ nhưng thoải mái của cơ bắp.
5. Tần số có 10 bước. Nhấn nút FRE-UP để tăng. Để giảm nhấn nút FRE-DOWN.
6. Để tắt thiết bị, nhấn nút ON/OFF.

Thông tin cần biết

- Khi di chuyển đai, hãy chắc chắn rằng các miếng đệm vẫn gắn liền với người sử dụng.
- Luôn đảm bảo các miếng đệm dính/ấm trước khi sử dụng.
- Nếu da của bạn chuyển sang màu đỏ hoặc có kích ứng, hãy ngưng sử dụng đai trong một thời gian ngắn cho đến khi hết kích ứng. Đôi khi điều này là do các điện cực âm đã bị khô.
- Thỉnh thoảng cơ thể tiết ra dầu/mồ hôi quá mức trên ra và điều này có thể ức chế dẫn truyền xung. Nên làm sạch vùng da bằng miếng vải ẩm trước khi sử dụng đai massage.
- Khi bạn đặt dây đai, hãy đảm bảo rằng các điện cực tiếp xúc tốt với da của bạn và dây đai được đặt chắc chắn xung quanh vùng bụng của bạn.
- Luôn có thời gian nghỉ ngơi ít nhất 4 giờ giữa hai lần sử dụng.

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với một buổi tập nhẹ nhàng và sau đó chuyển sang các chương trình mạnh hơn. Trong tuần đầu tiên, bạn nên cho cơ bắp của bạn thời gian để thích nghi với chế độ luyện tập mới này. Sử dụng thiết bị 1 hoặc 2 lần (tối thiểu cách nhau 4 giờ) một ngày trong tối đa 12 phút. Sau đó bạn có thể sử dụng đai massage tối đa 30 phút với 3 lần/ ngày.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Màn hình LCD không hiển thị	Không có pin	Lắp pin theo hướng dẫn
	Lắp pin không chính xác	Kiểm tra lại các đầu cực
	Hết pin	Thay thế pin mới
Màn hình LCD hiển thị nhưng không hiển thị các chức năng	Không tiếp xúc với da	Đảm bảo miếng đệm dính/ấm (nếu không phải miếng đệm), đảm bảo miếng đệm tiếp xúc với da
	Thiết bị không được kết nối chính xác với dây đai	Kiểm tra xem đầu nối có được đẩy khít vào ổ cắm đầu ra không.
	Cường độ ở mức nhỏ nhất	Nhấn nút INT-UP để tăng cường độ. Hoặc thay thế Pin
	Pin yếu	Thay thế pin
Màn hình LCD không hoạt động chính xác, tất cả các nút không hoạt động	Pin yếu	Thay thế pin



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

Không có cảm giác kích thích	Pin cạn kiệt	Thay thế pin
	Miếng đệm không được kết nối	Kiểm tra lại miếng đệm đã được kết nối với người sử dụng.
	Dây dẫn không được kết nối	Kiểm tra dây dẫn đã được cắm khít vào ổ cắm.
	Dây đai bị lỗi	Liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng
Cảm giác ngứa ran nhưng không co thắt	Vị trí đệm không chính xác	Di chuyển miếng đệm/ dây đai cho đến khi bạn cảm thấy co thắt mạnh.
	Mức cường độ quá thấp	Tăng cường độ
	Gel miếng đệm không tiếp xúc với da	Kiểm tra miếng đệm dính. Làm ẩm miếng đệm nếu cần thiết.

BẢO DƯỠNG BẢO TRÌ

Ngắt kết nối thiết bị điều khiển. Sử dụng vải ẩm để lau sạch bộ phận điều khiển và dây đai.

XỬ LÝ CHẤT THẢI

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive là chỉ dẫn của Liên Minh Châu Âu số 2012/19/EU về chất thải từ thiết bị điện và điện tử để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế tốt nhất để giảm thiểu tác động lên môi trường, xử lý các chất thải độc hại và tránh làm tăng bãi chôn lấp.

Sản phẩm này được phân loại giống như thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy đảm bảo rằng khi sản phẩm này đã hết thời hạn sử dụng, nó sẽ được xử lý đúng cách theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Không được xử lý cùng với chất thải gia đình



Đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Bodi-Tek®
 Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----



Sản phẩm này được đăng ký theo đúng các quy định hiện hành của Châu Âu về: An toàn điện, Môi trường, Chất lượng và sở hữu thương mại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp đầu ra	90V p-p trên tải 500 ohm
Sản lượng hiện tại	180mA trên tải 500 ohm
Tần số đầu ra	1-50Hz
Độ rộng xung	150 - 200 μ s
Nguồn cấp năng lượng	2 x 1.5V Pin AAA - Loại LR033
Điều kiện hoạt động	0 - 40°C 20 - 65% RH
Điều kiện bảo quản	0 - 55°C 10 - 65% RH

TRUNG TÂM TIẾP NHẬN BẢO HÀNH VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Hà Nội: B9 lô 20 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Hồ Chí Minh: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 0243.6988.383 Hotline: 098.5225.550

Website: Riobeauty.vn



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good