




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: F10, đường số 30, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY MASSAGE TĂNG CƯỜNG LƯU THÔNG MÁU CRBO3 The Bodi-Tek Circulation Plus Active

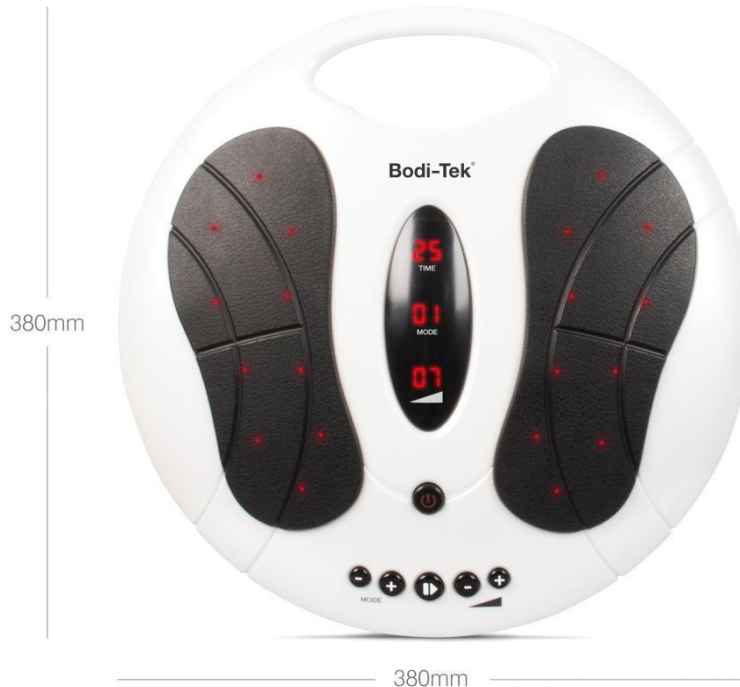

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Máy massage tăng cường lưu thông máu Bodi-Tek CRBO3 từ tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Bodi-Tek CRBO3 Circulation Plus Active sử dụng công nghệ EMS để mô phỏng hành động tập thể dục bình thường, làm cho cơ dưới chân liên tục co lại và thư giãn, điều này có nghĩa là bạn sẽ được hưởng lợi từ kết quả luyện tập bình thường trong khi đang ngồi. Thiết bị này không được coi là thiết bị thay thế cho hoạt động tập thể dục mà nó là một công cụ được cung cấp để thúc đẩy lưu thông máu ở bàn chân một cách thụ động trong khi đang ngồi hoặc thư giãn. Nếu bạn có các vấn đề về y tế, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn sử dụng.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: F10, đường số 30, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

1. Đối với những sản phẩm đang lưu hành theo số tổng đài cũ 8079, Quý khách vui lòng kích hoạt chuyển sang số tổng đài 0942.81.84.86.

Cụ thể, Quý khách soạn tin nhắn:

RIO <dấu cách> MÃ BẢO HÀNH gửi 0942.818486.

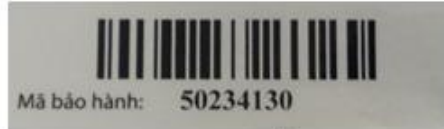

Ví dụ: RIO 50234130 gửi 0942.818486.

2. Đối với những sản phẩm được gắn tem bảo hành Icheck

Cách 1: Quý khách Cào và quét QR code bằng app Icheck



Phần cào

Cách 2: Quý khách cào mã số bảo hành in trên tem Icheck (dán ngoài vỏ hộp sản phẩm)

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>MÃ SỐ SMS gửi 8077



Phần cào

Ví dụ: Sau khi cào, hiện thị mã bảo hành là: j8z7p8ww71

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>j8z7p8ww71 gửi 8077

- Thời hạn bảo hành sản phẩm sẽ được tính từ ngày Quý khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành.
- Chế độ bảo hành 1 đổi mới trong vòng 6 tháng đầu.
- Nếu Quý khách bảo hành sản phẩm khi chưa kích hoạt Rio Beauty sẽ tính từ ngày xuất kho.

CÁC CẢNH BÁO

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.
- Sản phẩm được sử dụng kết hợp cùng với Gel để dẫn điện.
- Thiết bị này không được dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi. Với trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc chưa có kinh nghiệm về sử dụng sản phẩm thì phải được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Không dùng thiết bị sau khi uống rượu hoặc nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, không khỏe.
- Không được bỏ qua bất kỳ tính năng an toàn nào của thiết bị hoặc tự ý mở thiết bị.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: F10, đường số 30, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:

- Bạn có các cấy ghép thiết bị điện tử trong cơ thể (ví dụ máy tạo nhịp tim).
- Bạn đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ.
- Bạn đang điều trị các bệnh lý về tĩnh mạch.
- Da bàn chân của bạn đang bị bong.

THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG NẾU:

- Bạn có tiền sử bệnh tim hoặc đang bị bệnh tim.
- Nếu bạn bị bệnh động kinh hoặc các bệnh đa xơ cứng.
- Nếu bạn bị tiểu đường.
- Nếu bạn bị viêm tĩnh mạch.
- Nếu bạn bị viêm mô do bệnh tật hoặc do chấn thương.
- Nếu bạn bị giãn tĩnh mạch.
- Không sử dụng cho hình thức kinh doanh thương mại.
- Nếu bạn bị giảm sự nhạy cảm ở chân và bàn chân (liên quan đến bệnh tiểu đường).
- Thiết bị này không dùng cho người có vấn đề về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn cho họ.
- Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ gì về việc sử dụng thiết bị này với bất kỳ lý do nào, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

THẬN TRỌNG

- Lưu ý: đầu nối nguồn điện DC chỉ được rút khỏi thiết bị khi bộ sạc nguồn đã ngắt khỏi nguồn điện.
- Tháo pin ra khỏi thiết bị khi không sử dụng thường xuyên.
- Không tìm cách sạc lại pin đã được đi kèm theo thiết bị.
- Không đặt pin vào lửa.
- Hạn sử dụng của pin được đánh dấu trên pin. Không sử dụng pin sau thời hạn này.
- Hủy bỏ pin hết theo đúng yêu cầu về xử lý chất thải của địa phương.
- Giữ cho thiết bị tránh xa tầm tay của trẻ em.
- Không đứng trên thiết bị, chỉ sử dụng thiết bị khi bạn đang ngồi.
- Không tháo rời bộ phận điều khiển, giữ cho thiết bị cách xa nguồn nhiệt. Dịch vụ sửa chữa chỉ được thực hiện bởi Bodi- Tek hoặc nhà phân phối được Bodi- Tek ủy quyền.
- Bodi- Tek sẽ không chịu trách nhiệm nếu người dùng không tuân thủ theo các hướng dẫn đi kèm theo thiết bị.
- Nếu gel dẫn điện tiếp xúc với mắt, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu bạn vẫn còn thấy hiện tượng dị ứng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Nếu có bất kỳ kích ứng nào xảy ra trên hoặc quanh bàn chân, ngưng sử dụng và liên hệ với Bodi- Tek hoặc bác sĩ đa khoa của bạn.
- Nếu bạn có cảm giác đau mà không rõ nguyên nhân, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để có được chẩn đoán chính xác.




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: F10, đường số 30, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

- Để thiết bị tránh xa quần áo và môi trường dễ bắt lửa.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

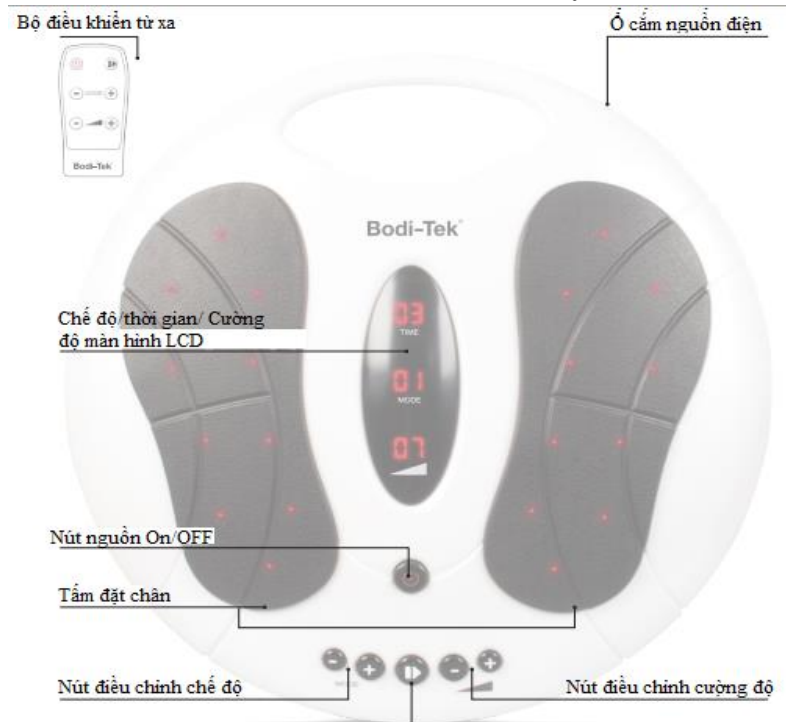

CÁCH SỬ DỤNG



Cắm bộ sạc nguồn điện và bật nguồn điện.



1. Chà một lượng nhỏ Gel dẫn điện lên lòng bàn chân của bạn.
Lưu ý: Rửa sạch và lau khô chân trước khi sử dụng.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: F10, đường số 30, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn



2. Ngồi lên ghế và đặt đôi chân trần của bạn lên các tấm đế chân như hình bên.



3. Để bật máy, nhấn nút ON/OFF trên máy hoặc trên bộ điều khiển từ xa.



Khi thiết bị bắt đầu hoạt động, đèn sẽ hiển thị cường độ bắt đầu từ 00 và chế độ hoạt động sẽ bắt đầu hiển thị từ 01

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động tắt sau 20 giây nếu không có nút nào được nhấn.



5. Sử dụng nút +/- để chọn chương trình khác nhau (điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng điều khiển từ xa).

Lưu ý: Mỗi chương trình khác nhau có thể được chọn bất cứ lúc nào tùy theo sở thích của người sử dụng. Khi chọn ở các chương trình khác nhau, mức độ, cường độ sẽ bắt đầu lại từ 00.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: F10, đường số 30, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

Có tất cả 3 chương trình. Đơn giản chỉ cần lựa chọn và sử dụng chương trình mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Mỗi chương trình chạy trong 25 phút. Nếu bạn thay đổi giữa các chương trình trong khi đang chạy một chương trình thì tổng thời gian chạy cũng vẫn là 25 phút.

Chương trình 1: Sự kích thích sâu theo nhịp điệu cho từng chân riêng biệt, sau đó đến chân tiếp theo. Cứ 6 giây xung tiếp theo là tạm dừng một giây.

Chương trình 2: Một sự kích thích sâu nhịp nhàng cho cả hai chân cùng một lúc, bao gồm 6 giây xung và một giây tạm dừng.

Chương trình 3: Có 9 chế độ kích thích khác nhau. Mỗi chế độ chạy trong 45 giây và được lặp đi lặp lại trong thời gian chạy 25 phút.



6. Để bắt đầu kích thích/ chương trình, nhấn nút mức cấp độ (+). Bộ hẹn giờ bắt đầu đếm ngược từ 25 phút.


Quan trọng: Ban đầu thiết bị luôn được đặt ở mức thấp. Bạn sử dụng nút (+) nhiều lần để tăng cường độ kích thích). Có tổng số 99 cấp cường độ.

Hướng dẫn về mức cường độ:

1 – 29 mức cường độ thấp 30-59 mức cường độ trung bình 60-99 mức cường độ cao.

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với mức cường độ thấp (từ 1 đến 29) để bắt đầu cho đến khi bạn đã quen với cảm giác kích thích trước khi tăng lên mức cường độ cao hơn.

Nếu bạn chỉ có cảm giác ngứa ở mức cường độ thấp, tăng cường độ cho đến khi bạn cảm thấy cơ bắp của bạn có sự kích thích rõ ràng.

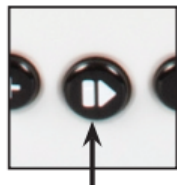

7. Sử dụng nút ON/OFF nếu bạn muốn tạm dừng chương trình của bạn.

8. Khi hoàn tất, hãy tắt và rút phích cắm khỏi nguồn điện.

THAY ĐỔI PIN CỦA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: F10, đường số 30, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

Để thay pin, đẩy chốt ra như hướng dẫn hình bên, khay đựng pin trượt ra khỏi ngăn chứa pin. Khi thay pin CR2025 đảm bảo dấu hiệu + là mặt sau của điều khiển từ xa.

Bảo quản và xử lý pin

- Hãy tháo pin khỏi thiết bị nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
- Hãy đảm bảo rằng pin sau khi hết sử dụng được xử lý đúng cách theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

LÀM SẠCH

- Làm sạch thiết bị bằng vải ẩm.
- Không cho thiết bị vào nước.
- Không làm sạch thiết bị bằng dung môi hoặc chất mài mòn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Trọng lượng: 3.05 kg.

Kích thước: 440mm x 440mm x 150mm.

Chương trình: có 3 chương trình hoạt động.

Mức đầu ra: 1-99

Thời gian hoạt động: Mỗi chương trình hoạt động trong thời gian 25 phút.

NGUỒN ĐIỆN

Đầu vào: 100 - 240v AC 50/60Hz

Đầu ra: Công suất 9V dc 500mA.

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

Nhiệt độ Hoạt động: 0-35 độC

Bảo quản: -20 -50 độC

Độ ẩm Hoạt động: 10-80%RH

Bảo quản: 5-90% RH

Sản phẩm này không phải là thiết bị y tế.

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q (Question). EMS là gì và nó hoạt động như thế nào?

A (Answer). Khi tập thể dục, cơ bắp của bạn nhận được các tín hiệu điện nhỏ thông qua các đầu dây thần kinh để kích thích sự co lại. Một khi cơ đã co lại và dây thần kinh không còn gửi tín hiệu nữa, cơ sẽ được thư giãn. EMS bắt chước các tín hiệu lặp đi lặp lại để mô phỏng sự co cơ của việc tập thể dục.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: F10, đường số 30, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

Q. Tại sao tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì?

A. Bạn phải chắc chắn đặt cả 2 chân trần lên tấm đế chân. Hoặc có thể bạn đang chọn mức cường độ quá thấp, hãy tăng lên mức cao hơn để cảm nhận rõ các xung điện.

Q. Ở một số trường hợp tôi sẽ cảm thấy không thoải mái, vì sao?

A. Ở cường độ thấp, bạn sẽ có cảm giác ngứa ran nhẹ. Khi cường độ tăng, bạn có cảm giác ngứa ran và co rút các cơ. Mỗi người sẽ có mức độ thoải mái khác nhau, điều quan trọng là bạn tìm thấy mức cường độ phù hợp với bạn nhất.


Q. Tại sao chân tôi đau khi điều trị?

A. Có thể là bạn đã thiết lập mức cường độ quá cao và cơ bắp của bạn đang hoạt động quá mức. Lần sử dụng tiếp theo bạn nên chọn mức cường độ thấp hơn và đảm bảo bạn nghỉ ngơi đủ thời gian đủ giữa các lần sử dụng, cho phép cơ bắp của bạn có thời gian phục hồi.

Q. Mức cường độ chuyển thành “0” hoặc tắt?

A. Thiết bị sẽ tự động tắt sau 20 giây nếu không có chương trình nào được chọn và thiết lập cường độ. Nếu chương trình thay đổi trong quá trình sử dụng, mức cường độ sẽ tự động chuyển về “0” đảm bảo cho sự an toàn của bạn.

XỬ LÝ CHẤT THẢI

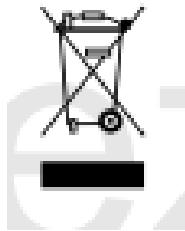

Các chất thải của thiết bị điện và điện tử (WEEE) theo Quy định 2012/19/EU của Châu Âu đã được đưa ra để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế tốt nhất nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, xử lý các chất độc hại và tránh làm tăng bãi chôn lấp rác. Sản phẩm được phân loại là thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy đảm bảo rằng khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa, chúng sẽ được xử lý đúng theo quy định của chính quyền địa phương. Chúng không được xử lý cùng với chất thải gia đình.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

VPGD: B9 lô 20 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội;

Chi nhánh HCM: F10 Đường số 30, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0243.6988.383 Hotline: 098.5225.550

Website: Riobeauty.vn