


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY MASSAGE CỔ VAI GÁY BODI- TEK NEMA

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Máy Massage cổ vai gáy Bodi-tek NEMA tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.


HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:

Cách 1 - Quý khách Cào và quét QR code bằng app Icheck

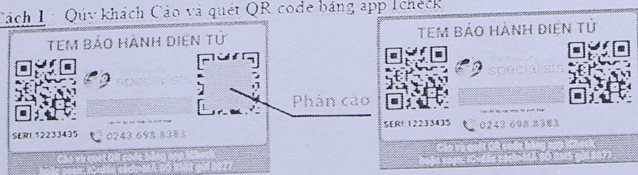

Cách 2 - Quý khách cào mã số bảo hành in trên tem Icheck (dán ngoài vỏ hộp sản phẩm) Soạn tin nhắn: IC <đầu cách> MA SỐ SMS gửi 8077

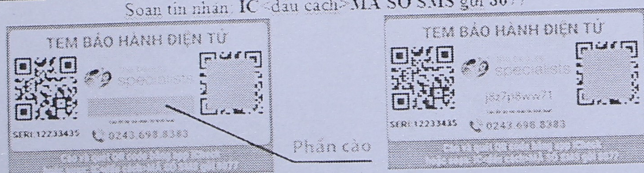

Ví dụ: Sau khi cào, hiển thị mã bảo hành là: j8z7p8ww71
Soạn tin nhắn: IC <đầu cách> j8z7p8ww71 gửi 8077

- + Thời hạn bảo hành sản phẩm được tính từ ngày Quý khách kích hoạt tin nhắn bảo hành điện tử (ngay sau khi mua sản phẩm). Hoặc không quá 03 tháng kể từ ngày công ty xuất kho cho đại lý.
- + Trường hợp Khách hàng không kích hoạt tin nhắn bảo hành

điện tử. Khi xảy ra lỗi, Nhà phân phối sẽ từ chối bảo hành sản phẩm.

+ Chế độ bảo hành 1 đổi mới chỉ áp dụng trong vòng 6 tháng đầu. (Kèm điều kiện đã kích hoạt tin nhắn bảo hành điện tử).

+ Nhà phân phối sẽ từ chối bảo hành trong mọi trường hợp nếu sản phẩm không còn nguyên vẹn tem bảo hành và có dấu hiệu bị cạy, phá hoặc tự ý tháo, mở.

CÁC CẢNH BÁO

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho các lần sử dụng tiếp theo.

+ Thiết bị này không được dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi. Với trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc chưa có kinh nghiệm về sử dụng sản phẩm thì phải được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn.


+ Tránh xa tầm tay trẻ em.

+ Không sử dụng trên vùng da đã phẫu thuật thẩm mỹ.

+ Không ngâm thiết bị trong nước.

+ Thiết bị này chỉ được sử dụng đúng mục đích được mô tả trong bản Hướng dẫn sử dụng này.

CẤU TẠO CỦA THIẾT BỊ

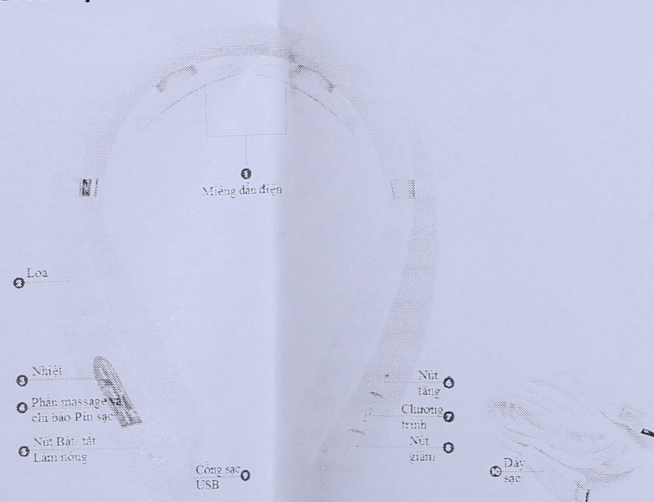

HƯỚNG DẪN SẠC PIN

Khi pin yếu, thiết bị sẽ phát ra 3 tiếng bíp.

+ Tháo nắp của cổng sạc trên thiết bị (vị trí số 9)

+ Cắm cáp USB vào thiết bị (Số 10), sau đó cắm vào cổng

USB. Đèn xanh nhấp nháy cho biết thiết bị đang được sạc. Cần 2 giờ để sạc đầy thiết bị. Sạc đầy pin ít nhất mỗi tháng một lần để kéo dài tuổi thọ.

CÁCH SỬ DỤNG

1. Làm ướt vùng cổ sau đó nhấn vào nút Bật/ tắt một lần. Đặt Máy massage quanh cổ để đảm bảo các miếng dẫn điện tiếp xúc kín với da.

2. Tùy chọn mức nhiệt: Để sử dụng, nhấn nút Bật/ tắt & làm nóng (vị trí số 5). Nhấn nút nhiều lần để chọn mức Nhiệt cao, trung bình, thấp hoặc tắt chức năng nhiệt.

3. Massage: Chọn một trong sáu chương trình massage bằng nút Massage/ chương trình (vị trí số 7)

Lưu ý: Liệu trình sẽ tự động bắt đầu trên Chương trình Massage 1. Mỗi chương trình massage kéo dài 15 phút. Cường độ massage: Sử dụng các nút +/- (vị trí số 6 hoặc số 8) để thay đổi cường độ massage. Có 16 mức cường độ. Nếu thiết bị không phản hồi, hãy kiểm tra miếng dẫn điện đã tiếp xúc với da chưa hoặc vùng da đã được làm ẩm chưa. Lưu ý: Nếu các tấm dẫn điện mất tiếp xúc với da, cường độ hoạt động sẽ trở lại mức 1.

Tắt hướng dẫn bằng giọng nói:

✳ Để tắt hướng dẫn bằng giọng nói, giữ nút vị trí số 7 trong 2 giây. Bây giờ thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp khi chọn các chức năng

+ Để bật lại, giữ nút vị trí số 7 trong 2 giây.

Tắt thiết bị: Nhấn và giữ nút Bật/ tắt tại vị trí số 5 trong 2 giây.

Các chương trình massage:

1. Chương trình 1: Trị liệu trong 15 phút với các động tác xoa bóp khác sau mỗi 60 giây.
2. Chương trình 2: Trị liệu 15 phút lần 2 với việc thay đổi massage sau mỗi 60 giây.
3. Massage chuyên sâu: Xoa bóp mạnh để giảm đau hoặc căng cơ.
4. Xoa bóp nhẹ nhàng: Động tác massage nhẹ nhàng.
5. Các xung massage: Nhịp điệu xung để giảm stress và căng thẳng.
6. Xoa bóp

LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ

+ Lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát. Lau khô thiết bị trước khi cất giữ.

+ Đảm bảo thiết bị đã được tắt và làm sạch bằng khăn

mềm âm.


+ Không nhúng thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: BT- NEMA Nguồn điện đầu vào:

5V=== 1000mA Pin: Li-ion 3.7V 1100mAh

XỬ LÝ CHẤT THẢI

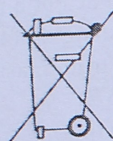

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive là chỉ dẫn của Liên Minh Châu Âu số 2012/19/EU về chất thải từ thiết bị điện và điện tử để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế tốt nhất để giảm thiểu tác động lên môi trường, xử lý các chất thải độc hại và tránh làm tăng bãi chôn lấp.

Sản phẩm này được phân loại giống như thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy đảm bảo rằng khi sản phẩm này đã hết thời hạn sử dụng, nó sẽ được xử lý đúng cách theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Không được xử lý cùng với chất thải gia đình

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO
BEAUTY VIỆT NAM

VPGD: Số 171 C4, Khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai,
Hà Nội;

Chi nhánh tại TP HCM: Số 25 Hiền Vương, phường Phú
Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM

Điện thoại: 0243.6988.383 Website: Riobeauty.vn