



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHĂM SÓC DA MẶT CHỐNG LÃO HÓA RIO FARA SONICLEANSE™ PURE GLO



Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Máy chăm sóc da mặt chống lão hóa RIO FARA từ tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

1. Đối với những sản phẩm đang lưu hành theo số tổng đài cũ 8079, Quý khách vui lòng kích hoạt chuyển sang số tổng đài 0942.81.84.86.

Cu thể, Quý khách soạn tin nhắn:

RIO <dấu cách> MÃ BẢO HÀNH gửi 0942.818486.

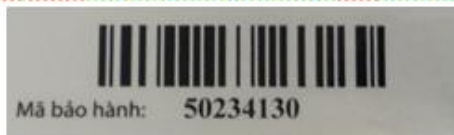

Mã bảo hành: 50234130

Ví dụ: RIO 50234130 gửi 0942.818486.

2. Đối với những sản phẩm được gắn tem bảo hành Icheck

Cách 1: Quý khách Cào và quét QR code bằng app Icheck



Phần cào



Cách 2: Quý khách cào mã số bảo hành in trên tem Icheck (dán ngoài vỏ hộp sản phẩm)

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>MÃ SỐ SMS gửi 8077



Phần cào



Ví dụ: Sau khi cào, hiện thị mã bảo hành là: j8z7p8ww71

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>j8z7p8ww71 gửi 8077

- Thời hạn bảo hành sản phẩm sẽ được tính từ ngày Quý khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành.
- Chế độ bảo hành 1 đổi mới trong vòng 6 tháng đầu.
- Nếu Quý khách bảo hành sản phẩm khi chưa kích hoạt Rio Beauty sẽ tính từ ngày xuất kho.



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

CÁC CẢNH BÁO

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho các lần sử dụng tiếp theo.

- Vì lý do vệ sinh, chúng tôi khuyên chỉ nên sử dụng thiết bị cho 1 người.
- Không đặt sản phẩm dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, bảo quản sản phẩm ở nơi khô thoáng.
- Giữ cáp USB tránh xa nước. Không đặt nó gần bồn tắm hoặc chậu rửa.
- Không sử dụng trên vết cắt hoặc da bị hỏng.
- Không sử dụng sản phẩm này trên các vùng da chảy xệ của cơ thể hoặc bất kỳ vùng da nào có dấu hiệu của: giãn tĩnh mạch, bệnh ngoài da (ví dụ bệnh chàm, vẩy nến, viêm da), vết thương hở, vết trầy xước, da bị kích ứng, mụn cóc, nốt ruồi, mẫn cảm hoặc cháy nắng, viêm tĩnh mạch, mô sẹo hoặc các tình trạng da khác.

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị nếu da của bạn bị bất kỳ tình trạng nào như ở trên.

- Đảm bảo sản phẩm khô hoàn toàn trước khi sạc hoặc bảo quản.
- Không sử dụng sản phẩm này nếu sản phẩm không hoạt động đúng cách hoặc bị rơi, hỏng.

CẤU TẠO CỦA THIẾT BỊ



the beauty
specialists

Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM


Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

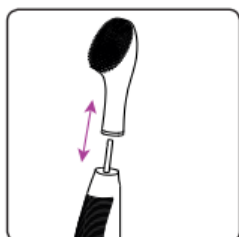

Bàn chải làm sạch siêu âm và đầu massage rung siêu âm có thể được thay thế lẫn nhau bằng cách chỉ cần kéo một đầu ra và đẩy đầu kia lên (Không được xoắn).

- Bật thiết bị bằng cách nhấn nút On/ Off. Nhấn “+” để tăng cường độ hoặc ấn nút “-” để giảm cường độ.

Thời gian sử dụng:

Cứ sau 30 giây các rung động sẽ tạm dừng. Đây là một tín hiệu báo để di chuyển đến khu vực trị liệu tiếp theo. Sau 2 phút, các rung động sẽ tạm dừng 3 lần để cho biết 2 phút đã trôi qua. Sau ba phút, thiết bị sẽ tự động tắt.

Đầu bàn chải rửa mặt:



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

Tẩy trang mặt trước khi rửa mặt. Làm ẩm da và/ hoặc rửa mặt với sữa rửa mặt. Nhẹ nhàng lướt đầu bàn chải trên da theo chuyển động tròn. Di chuyển trên mỗi vùng trong 20-30 giây, bắt đầu từ trán, mũi, cằm và kết thúc ở hai bên má. Nhẹ nhàng làm sạch các vùng dưới mắt bằng cách sử dụng rìa bên ngoài của bàn chải. Làm sạch toàn bộ khuôn mặt cần thời gian từ 1-2 phút. Sau khi rửa sạch mặt và lau khô da.

Đầu massage:



Thoa một lượng nhỏ dầu, kem dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng mắt (nếu dùng cho vùng mắt) đến vùng cần trị liệu. Thường sử dụng ở mức cường độ thấp, đặc biệt là vùng xung quanh mắt. Massage với chuyển động tròn hoặc từ từ theo hướng lưu thông máu (như hình bên).

HƯỚNG DẪN CÁCH SẠC PIN

- Khi pin yếu, đèn báo sẽ nhấp nháy liên tục.
- Trước khi sạc, đảm bảo cổng sạc và bộ sạc khô ráo ko bị ướt.
- Cắm vào cổng sạc USB (DC 5V). Để sạc đầy mất khoảng 1h.
- Khi pin được sạc đầy, đèn báo sẽ dừng nhấp nháy liên tục. Không sạc quá 24h.
- Không sử dụng thiết bị khi đang sạc.

LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG

- Làm sạch bàn chải sau khi sử dụng bằng cách rửa bằng nước ấm và để khô tự nhiên.
- Không được làm sạch thiết bị bằng các sản phẩm có chứa Cồn, axeton.

XỬ LÝ CHẤT THẢI



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive là chỉ dẫn của Liên Minh Châu Âu số 2012/19/EU về chất thải từ thiết bị điện và điện tử để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế tốt nhất để giảm thiểu tác động lên môi trường, xử lý các chất thải độc hại và tránh làm tăng bãi chôn lấp.

Sản phẩm này được phân loại giống như thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy đảm bảo rằng khi sản phẩm này đã hết thời hạn sử dụng, nó sẽ được xử lý đúng cách theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Không được xử lý cùng với chất thải gia đình



Đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Sản phẩm này được đăng ký theo đúng các quy định hiện hành của Châu Âu về: An toàn điện, Môi trường, Chất lượng và sở hữu thương mại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: RIO FARA

Tiêu chuẩn chống nước: IPX7

Nhịp độ rung: 120-250 lần chuyển động/ giây

Pin: 420mA, 4.2V

Thời gian sử dụng sau mỗi lần sạc đầy: khoảng 120 lần sử dụng.

Điện áp đầu vào: USB 5.0V- 1.000mA

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG



Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

VPGD: B9 lô 20 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội;

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 0243.6988.383 Hotline: 098.5225.550

Website: Riobeauty.vn



the beauty
specialists

Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good