


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY MASSAGE LƯNG

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để vận hành đúng cách.
- Vui lòng giữ lại sách để tham khảo khi cần.

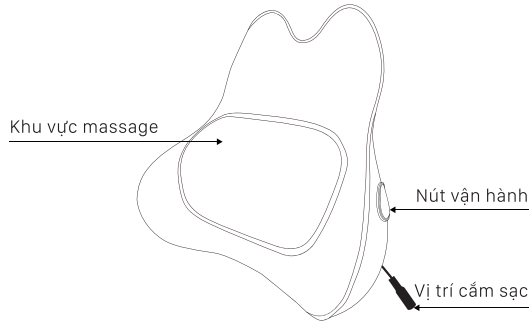

Model	DVML - 00001
Điện áp	12.8 V
Công suất	23 W
Pin	2000 mAh
Kích thước	37 x 12.5 x 37 cm

- Massage linh động thay đổi vị trí toàn cơ thể
- Massage nhiệt
- Sạc pin dễ dàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

- Sử dụng nguồn điện tương thích với điện áp của sản phẩm.
- Không sử dụng các linh kiện không rõ nguồn gốc thay thế linh kiện của sản phẩm.
- Không sạc sản phẩm khi điện áp không ổn định.
- Không chạm vào nguồn điện hoặc phích cắm bằng tay ướt để tránh hỏng máy hay giật điện.
- Sản phẩm có pin, không được tháo rời, tác động trực tiếp, bóp pin bên trong, không sử dụng ở môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao, không đưa sản phẩm lại gần lửa.
- Phải tắt nguồn sản phẩm khi cần tháo pin.
- Không sử dụng sản phẩm khi máy bị hư hỏng hoặc ẩm ướt.
- Không để sản phẩm trực tiếp dưới ánh Mặt Trời hoặc nơi có nhiệt độ cao trong thời gian dài.
- Sản phẩm này có chức năng nhiệt, vì vậy những người nhạy cảm với nhiệt phải chú ý khi sử dụng.
- Trẻ em, người tàn tật, người cao tuổi, người không đủ thể chất, người mất cảm giác hoặc người khuyết tật về tinh thần cần được sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Khi có những cơn đau bất thường, dữ dội trong khi đang massage. Lập tức ngưng sử dụng và tìm kiếm các biện pháp y tế.
- Sản phẩm này là sản phẩm xoa bóp cá nhân và không thể thay thế thuốc chữa bệnh hay thiết bị y tế.
- Trong các trường hợp hư hỏng, hãy gửi sản phẩm đến Trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa.
- Không nên vứt máy chung với các rác thải sinh hoạt, cần bỏ sản phẩm đúng nơi dành cho sản phẩm điện tử đã qua sử dụng.

CHI TIẾT ĐÓNG GÓI



Máy massage lưng



Đầu sạc



Hướng dẫn sử dụng




Cáp sạc cho xe hơi

Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng
sản phẩm của **daiviet**

www.tapdoandaiviet.com.vn

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

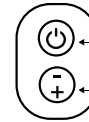

Tắt/ Mở nguồn - Nhiệt

Tăng/ Giảm cường độ massage

- Nhấn giữ nút “” để mở máy và lúc này máy bắt đầu hoạt động với massage nhào theo chiều kim đồng hồ kết hợp nhiệt. Nhấn lần 2 để massage đảo ngược chiều kim đồng hồ kết hợp nhiệt. Nhấn lần 3 để bắt đầu massage không kết hợp nhiệt. Nhấn giữ một lần nữa để tắt máy.
- Nhấn nút “” để tăng/ giảm cường độ Massage, có 3 mức là: Thấp, Trung Bình, Cao.
- Thời gian hoạt động cài đặt: 15 phút.
- Máy sẽ không hoạt động khi đang được sạc pin để đảm bảo an toàn.

CÁC VỊ TRÍ MASSAGE



Hông



Lưng



Chân



Đùi