

195X190MM



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HawoChaka

BÀN CHẢI ĐIỆN

ETH-001



Đèn báo cường độ

5 chế độ đánh răng:

- Làm sạch răng tổng quát
- Đánh cho răng nướu nhạy cảm
- Mát xa nướu răng
- Làm trắng răng
- Làm trắng răng chuyên sâu

Cổng sạc

Đế sạc cắm ứng không dây

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho lần tham khảo sau.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:	
Tên sản phẩm:	Bàn chải đánh răng điện sóng âm Hawonkoo
Model:	ETH-001-BL / ETH-001-BA
Tần số rung:	25500-48000 xung động /phút
Điện từ:	2.0
Thông số đầu vào:	DC 5 V/300-500 mA
Công suất:	2 W
Sạc:	12-16 giờ
Pin:	Pin Lithium/DC 3.7V-2000mAh
Thời gian làm việc:	Khoảng 180 ngày (4 phút /ngày)
Tiêu chuẩn chống nước:	IPX8

DANH MỤC SẢN PHẨM:	
Thân chính:	Bàn chải đánh răng làm trắng bằng sóng siêu âm 5 chế độ đánh răng và 3 mức cường độ
Phụ kiện đi kèm:	2 đầu bàn chải sợi Dupont 2 nắp đầu bàn chải 1 đế sạc không dây 1 hộp đựng mang đi du lịch 1 đầu mát-xa mặt 1 sách hướng dẫn sử dụng

CẢNH BÁO
- Không đặt bộ sạc pin trên hoặc gần nguồn nước. Ví dụ như bồn tắm, hồ bơi, v.v. - Bản thân người dùng không nên tự thay pin. - Nếu bất kỳ bộ phận nào của bàn chải đánh răng bị hỏng, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hawonkoo

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG
THÔNG BÁO CHUNG - Bàn chải đánh răng này không dành cho người bị suy giảm khả năng cảm giác hoặc tinh thần về thể chất (bao gồm cả trẻ em). - Trẻ em từ 3-10 tuổi phải được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của trẻ giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Không nên sử dụng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Nó không dành cho nhiều bệnh nhân sử dụng tại phòng khám nha khoa. - Thiết bị này chỉ dùng để làm sạch răng, nướu và lưỡi. Cảnh báo sạc có thể không hoạt động ngay lập tức nếu pin đã xả hết. Nó sẽ bật lại sau 8-10 phút. - Việc cảm thấy hơi nóng truyền qua tay cầm trong quá trình sạc là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu nó trở nên quá nóng, hãy tắt nguồn. - Bảo quản thiết bị này tránh ánh nắng trực tiếp ở nhiệt độ 46°F/7°C ~ 105°F/40°C. - Không để bề mặt của thiết bị này tiếp xúc với một số chất nhất định (gel, dầu, xà phòng, v.v.) để kéo dài tuổi thọ và tránh ăn mòn. Việc thay bộ thiết bị và pin tích hợp của máy phải tuân thủ quy định tại địa phương của bạn.

CẢNH BÁO Y TẾ
- Việc người dùng lần đầu gặp phải hiện tượng chảy máu nhẹ và khó chịu trong tuần đầu sử dụng là điều bình thường. Nếu chảy máu hoặc khó chịu tiếp tục xảy ra sau một tuần sử dụng, hãy ngừng sử dụng và liên hệ với chuyên gia nha khoa của bạn. - Nếu bạn đã phẫu thuật răng miệng hoặc nướu trong 2 tháng trước/cấy ghép răng giả, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia nha khoa trước khi sử dụng. - Nếu bạn có máy điều hòa nhịp tim hoặc các thiết bị cấy ghép khác, hãy liên hệ với bác sĩ trước khi sử dụng. - Nhận lời khuyên liên quan nếu bạn vẫn còn những lo ngại về các vấn đề y tế khác.

02

HƯỚNG DẪN SẠC
- Nếu đèn báo sạc nhấp nháy thì cần phải sạc. - Cắm cáp sạc vào bất kỳ ổ cắm USB nào; đặt bàn chải đánh răng lên đế sạc và bắt đầu sạc, đèn báo sẽ sáng lên. Nó tiếp tục sạc và khi 3 đèn sạc sáng tức là đã sạc đầy. - Sau khi sạc đầy, bàn chải đánh răng có thể được sử dụng lên đến 180 ngày.

CHẾ ĐỘ TẮT NGUỒN
Nhấp vào phím bật/tắt, bàn chải đánh răng sẽ hoạt động ở chế độ tắt máy lần cuối.Bạn cần nhấn liên tục công tắc nguồn. Sẽ có 5 giây giữa các chế độ để chọn chế độ bạn thích, sau thời gian đó để thay đổi chế độ, bạn sẽ cần nhấn nút nguồn/chế độ để tắt rồi bật lại và nhấn nút lặp lại trong khoảng thời gian 5 giây.
Để tắt bàn chải đánh răng bất cứ lúc nào, vui lòng nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây.

BẮT ĐẦU
 Lắp đầu bàn chải vào trục truyền đồng thời phải chờ một khoảng trống nhất định ở giữa cho chế độ trung bình.
 Làm ướt lông bàn chải và thoa một lượng kem đánh răng nhất định.
 Đặt bàn chải vào miệng trước khi bật để tránh văng kem đánh răng ra ngoài. Sau đó nhấn lại nút nguồn để chọn chế độ cần thiết.
 Đặt lông bàn chải vào răng một góc 45 độ so với đường viền nướu.
 Di chuyển lông bàn chải từ từ theo chuyển động tròn. Không chà mạnh răng mà chỉ ấn nhẹ để lông bàn chải chải giúp bạn.
 Súc miệng sau khi đánh răng.

03

KIỂM SOÁT CƯỜNG ĐỘ THỜI GIAN CHẢI

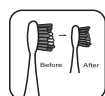
Bộ hẹn giờ có khoảng thời gian 30 giây để nha sĩ khuyến nghị đánh răng đầy đủ trong 2 phút. Có một khoảng dừng ngắn sau mỗi khoảng thời gian nhắc nhở bạn chuyển sang khu vực khác.

5 chế độ làm sạch:

3 mức cường độ:

Nhẹ-mạnh-mạnh hơn. Để chọn tốc độ rung, nhấn nút cường độ rung nhiều lần để đạt tốc độ mong muốn.

CHỨC NĂNG
 Hẹn giờ 2 phút
 IPX8 không thấm nước
 5 chế độ làm sạch X 3 mức cường độ = 15 mức để lựa chọn
 Thời gian chờ 180 ngày
 Điện tích cảm ứng
 Sợi lông Dupont chính hãng

CÁC HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN
 Làm sạch đầu bàn chải Rửa sạch để loại bỏ cặn sau mỗi lần đánh răng và để khô trong không khí. KHÔNG chà xát lông để tránh biến dạng.
 Làm sạch tay cầm Rửa sạch để loại bỏ cặn sau mỗi lần đánh răng. Không ngâm bàn chải đánh răng vào nước trong thời gian dài. Không làm sạch bàn chải đánh răng bằng nước có nhiệt độ cao hơn 40 ° C hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn.
 Thay đầu bàn chải Chuyên gia nha khoa khuyến bạn nên thay đầu bàn chải 3 tháng một lần để có kết quả đánh răng tốt nhất, Đồng thời thay đầu bàn chải khi lông bàn chải cong ra ngoài.

04

TÁI CHẾ
- Vui lòng không thải bỏ vào rác thải sinh hoạt thông thường khi sản phẩm đã hết tuổi thọ. - Vui lòng gửi sản phẩm này đến trạm tái chế được chỉ định của chính phủ, điều này sẽ góp phần bảo vệ môi trường.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố	Nguyên nhân	Các giải pháp
Đỏ rung yếu đi	1.Lông bàn chải bị ép quá mạnh 2.Đầu bàn chải được cố định quá chặt	1.KHÔNG nhấn lông với lực quá mạnh. 2.Kết nối lại đầu bàn chải với trục truyền động và đảm bảo nó được cố định với một khoảng cách nhất định giữa.
Bàn chải đánh răng chỉ có thể chạy trong một thời gian ngắn.	1.Bàn chải đánh răng đã không được sử dụng trong hơn 6 tháng 2.Sạc không đúng cách 3.Thời gian sạc không đủ	1.Đảm bảo bàn chải đánh răng được đặt thẳng đứng trên đế sạc và chốt sạc đã được lắp vào 2.Cắm sạc
Bàn chải đánh răng không chạy	1.Lỗi cơ học bên trong 2.Pin đã gần hết tuổi thọ	Liên hệ với đại lý của bạn để kiểm tra thêm



Xem thông tin chi tiết tại:

☎ 1900 232396 ☎ hawonkoo.com.vn

By BTP

05

06