



Ghé thăm chúng tôi tại:

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2024 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev B Tháng 4 năm 2024



PHILIPS

Súng Massage

Súng Massage Cầm Tay

PPM7323



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mục Lục

1 Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

- Mô tả biểu tượng
- Đối tượng phù hợp
- Lưu ý khi sử dụng
- Các biện pháp bảo trì an toàn

2 Tính năng sản phẩm

3 Chi tiết sản phẩm

4 Hướng dẫn sử dụng

- Lưu ý trước khi sử dụng
- Lắp đặt các đầu massage
- Thao tác sử dụng
- Hướng dẫn sạc
- Mô tả đèn báo

5 Bảo trì sản phẩm

- Xử lý
- Phương pháp xử lý pin

6 Hướng xử lý lỗi

7 Thông số kỹ thuật

8 Hướng dẫn dịch vụ bảo hành sản phẩm

- Bảo hành và dịch vụ
- Phiếu bảo hành

9 Danh sách đóng gói

1 Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và bảo quản cẩn thận trước khi sử dụng sản phẩm.
Bạn có thể truy cập tài liệu tại www.philips.com

Mô tả biểu tượng

Để tránh nguy cơ chấn thương cá nhân hoặc hư hỏng thiết bị, hãy tuân thủ các nội dung sau:

- Các biểu tượng dưới đây được sử dụng để minh họa những điều cần lưu ý khi sử dụng thiết bị.

 **BIỂU TƯỢNG CẤM**

 **BIỂU TƯỢNG LÀM THEO CHỈ DẪN**

Đối tượng phù hợp

 Những người sau đây cần thận trọng khi sử dụng sản phẩm:

- Người mắc rối loạn cảm giác da
- Người có cấy ghép kim loại, silicon hoặc vật liệu nhựa trong cơ thể do gãy xương hoặc phẫu thuật thẩm mỹ
- Người có di chứng do tai nạn giao thông hoặc các chấn thương khác
- Người dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ do sử dụng máy tạo nhịp tim hoặc thiết bị y tế điện từ cấy ghép khác
- Người bị mất khả năng cảm nhận nhiệt độ
- Người mắc khối u ác tính
- Người mắc bệnh tim mạch

- Phụ nữ mang thai hoặc sau sinh
- Người bị suy giảm nhận thức do tiểu đường
- Người bị thương nhưng chưa hồi phục
- Người bị tổn thương cơ bắp
- Người có thể trạng yếu, cần nghỉ ngơi hoặc dễ bị kích thích
- Người mắc bệnh loãng xương, gãy xương nặng, bong gân, đau cơ hoặc đau cấp tính (đau đầu)
- Người có triệu chứng sốt
- Người có các triệu chứng viêm cấp tính, mệt mỏi, chán ăn hoặc thay đổi huyết áp
- Những bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế

Lưu ý khi sử dụng

-  Thiết bị này không được thiết kế cho người dùng (bao gồm trẻ em) bị suy giảm chức năng vận động, giác quan hoặc nhận thức, thiếu kinh nghiệm hoặc hiểu biết về thiết bị, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn.
-  Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
-  Trường hợp dây nguồn bị hư hỏng, phải thay thế bằng dây nguồn hoặc cụm dây lắp ráp chuyên dụng do nhà sản xuất hoặc đơn vị ủy quyền cung cấp, nhằm đảm bảo tính tương thích và an toàn điện.
-  Thiết bị có sử dụng pin tích hợp, chỉ được thay thế bởi kỹ thuật viên chuyên trách nhằm đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành.
-  Thiết bị phải được cấp nguồn từ điện áp thấp an toàn (SELV), tuân thủ thông số kỹ thuật ghi trên nhãn sản phẩm.
-  Chu kỳ vận hành mặc định của thiết bị là 10 phút mỗi lần. Không sử dụng liên tục quá 20 phút. Sau mỗi lần sử dụng, để thiết bị nghỉ tối thiểu 30 phút nhằm duy trì độ bền và hiệu suất vận hành.

- ❗ Tránh mặc quá nhiều lớp quần áo khi sử dụng thiết bị.
- ❗ Không lạm dụng chức năng massage để tránh nguy cơ kích ứng cơ hoặc quá tải hệ thần kinh.
- ❗ Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau lưng, chóng mặt, buồn nôn, hồi hộp hoặc các phản ứng khác.
- ❗ Tránh tiếp xúc với chất lỏng, nguồn nhiệt và giữ cổng sạc sạch bụi. Không sử dụng thiết bị khi đang sạc.
- ❗ Ngắt nguồn điện sau khi sạc đầy.
- ❗ Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu thiết bị không hoạt động bình thường hoặc có dấu hiệu bất thường khi sử dụng.
- ❗ Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra kỹ tình trạng thiết bị theo hướng dẫn trong tài liệu này.
- ⊘ Không sử dụng thiết bị khi ngủ.
- ⊘ Không sử dụng thiết bị dưới chân hoặc mền.
- ⊘ Không ngồi hoặc nằm trực tiếp lên thiết bị.
- ⊘ Tránh tác động lực mạnh hoặc đặt tải trọng lớn lên thiết bị.
- ⊘ Không sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc khi tắm.
- ⊘ Tuyệt đối không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc cải tạo thiết bị.
- ⊘ Không sử dụng thiết bị trong các trường hợp sau:
 - Khi cơ thể đang trong tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng
 - Trong vòng một giờ trước hoặc sau bữa ăn
 - Khi đang say rượu


Các biện pháp bảo trì an toàn

- ❗ Tắt thiết bị trước khi tiến hành vệ sinh.
- ❗ Bảo quản bao bì sản phẩm đúng cách và để xa tầm tay trẻ nhỏ.
- ❗ Kiểm tra trạng thái công tắc trước khi sử dụng lại sau thời gian dài.
- ❗ Không sử dụng dầu bay hơi, dung môi pha loãng, cồn, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, chất tẩy trắng hoặc các hóa chất ăn mòn khác để vệ sinh.
- ❗ Thường xuyên kiểm tra thiết bị để phát hiện dấu hiệu hao mòn hoặc hư hỏng. Nếu phát hiện hỏng hóc hoặc thiết bị bị sử dụng sai cách, liên hệ nhà cung cấp để bảo trì trước khi tiếp tục sử dụng.
- ⊘ Thiết bị có chứa pin lithium. Không tháo rời, chỉnh sửa hoặc ngâm thiết bị (bao gồm bộ điều khiển) vào nước, cũng như không vứt vào lửa để tránh nguy cơ hư hỏng hoặc cháy nổ.
- ⊘ Giữ thiết bị xa tầm tay trẻ em. Không để trẻ em chạm vào hoặc vận hành thiết bị nhằm tránh bỏng, điện giật hoặc thương tích cá nhân.
- ⊘ Trong quá trình sạc, không làm hỏng, uốn cong, kéo giãn dây nguồn hoặc đặt vật nặng lên dây nguồn, tránh nguy cơ chập cháy hoặc hư hỏng thiết bị.
- ⊘ Pin lithium có thể gây cháy nổ. Giữ sản phẩm tránh xa nguồn phát tia lửa hoặc nhiệt độ cao.

2 Tính năng sản phẩm

Thiết bị sử dụng xung động cơ học tần số cao để kích thích mô mềm, giúp giảm căng cứng cơ, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Hệ thống đầu massage đa dạng cho phép tác động chuyên sâu lên các nhóm cơ khác nhau trên cơ thể, tối ưu hóa hiệu quả thư giãn và phục hồi cơ sinh học.


3 Chi tiết sản phẩm

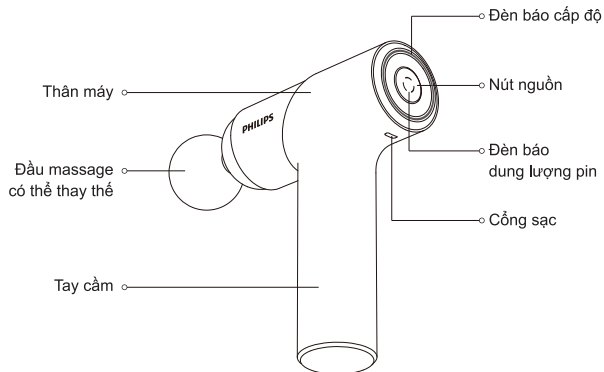

Đầu massage nhọn



Đầu massage phẳng

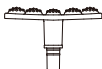

Đầu massage Shiatsu



Đầu massage tròn



Đầu massage ngón tay



Đầu massage đa điểm

4 Hướng dẫn sử dụng


Lưu ý trước khi sử dụng

1. Kiểm tra thiết bị và phụ kiện đã đảm bảo đầy đủ chưa.
2. Tháo bỏ và phụ kiện trang sức trước khi sử dụng để tránh ảnh hưởng đến khu vực massage.
3. Lắp đầu massage đúng vị trí.

Lắp đặt các đầu massage

Tùy theo nhu cầu massage, chọn đầu massage phù hợp, đưa vào vị trí lắp đầu massage phía trước của máy và nhấn chặt đến khi cố định hoàn toàn.


Hình minh họa dưới đây cho thấy thiết bị đã sẵn sàng hoạt động khi đầu massage được lắp đúng vị trí.

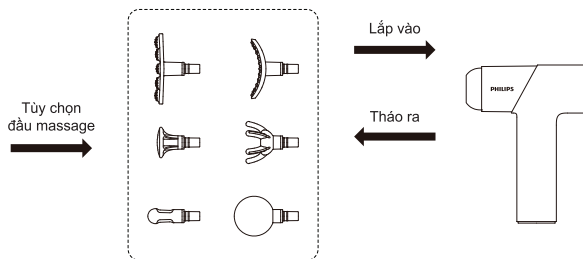

Thao tác sử dụng



1. Nhấn và giữ nút nguồn để khởi động thiết bị. Mặc định, thiết bị sẽ hoạt động ở Cấp độ 1, đèn báo sẽ sáng.
2. Nhấn nút nguồn để thay đổi cường độ massage, với các cấp độ: Cấp 1 / Cấp 2 / Cấp 3 / Cấp 4 / Cấp 5 / Cấp độ massage đường cong sóng nhẹ / Cấp độ massage đường cong sóng mạnh.
3. Nhấn và giữ nút nguồn để tắt thiết bị. Khi tắt, đèn báo cấp độ và đèn báo dung lượng pin sẽ tắt.
4. Sản phẩm sẽ tự động tắt sau 10 phút sử dụng liên tục. Nếu bạn cần sử dụng lại, vui lòng nhấn giữ nút nguồn để mở máy.

❗ Đầu massage sẽ ngừng hoạt động khi bị chặn, cơ chế này giúp bảo vệ thiết bị khỏi hoạt động bất thường, nó chuyển từ chế độ hoạt động sang chế độ tắt máy, nhấn và giữ nút nguồn để khởi động lại.

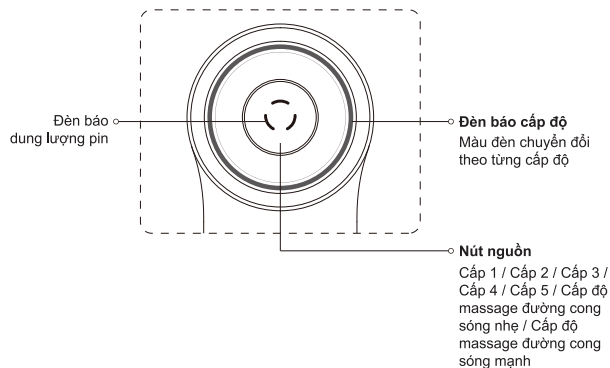

Hướng dẫn sạc

1. Nghiêm cấm sạc thiết bị ở tư thế thẳng đứng để tránh nguy cơ rơi đổ, gây tổn thương cơ học.
2. Trước khi sử dụng lần đầu, sạc thiết bị trong 4 giờ cho đến khi đầy pin.
3. Sử dụng cáp sạc chuyên dụng, kết nối với cổng sạc của thiết bị và nguồn điện phù hợp để sạc thiết bị.
4. Đèn báo dung lượng pin hiển thị mức dung lượng pin thông qua màu sắc, cho biết trạng thái sạc.
5. Khi đèn báo dung lượng pin nhấp nháy màu đỏ là dung lượng pin còn dưới 10%, cần sạc ngay để tránh gián đoạn hoạt động massage.
6. Pin có thể được sạc ở bất kỳ mức dung lượng nào mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Thiết bị không thể khởi động hoặc sử dụng trong quá trình sạc.

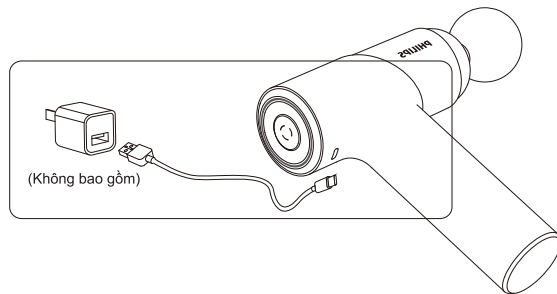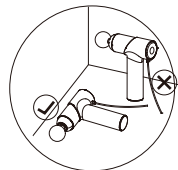

Mô tả đèn báo

Nhấn giữ nút nguồn để mở máy, mặc định mở máy là ở cấp độ 1, đèn báo sẽ chuyển đổi theo từng cấp độ. Trạng thái đèn báo của các cấp độ như sau:

Đèn báo cấp độ	Trạng thái	Mô tả
1 đoạn ánh sáng màu xanh lục	Luôn sáng	Cấp độ 1
2 đoạn ánh sáng màu xanh lục	Luôn sáng	Cấp độ 2
3 đoạn ánh sáng xanh lục	Luôn sáng	Cấp độ 3
4 đoạn ánh sáng xanh lục	Luôn sáng	Cấp độ 4
5 đoạn ánh sáng xanh lục	Luôn sáng	Cấp độ 5
Massage nhẹ đèn nhấp nháy	Nhấp nháy	Cấp độ massage đường cong sóng nhẹ
Massage mạnh đèn nhấp nháy	Nhấp nháy	Cấp độ massage đường cong sóng mạnh

Sau khi mở máy, đèn báo nguồn sẽ sáng và hiển thị mức pin hiện tại của thiết bị thông qua màu đèn:

Đèn báo dung lượng pin	Trạng thái	Mô tả
Đèn xanh	Luôn sáng	Dung lượng pin > 50%
Đèn vàng	Luôn sáng	Dung lượng pin 10 - 50%
Đèn đỏ	Nhấp nháy	Dung lượng pin < 10%

Khi máy đang sạc, đèn báo nguồn hiển thị các màu khác nhau, thể hiện mức pin hiện tại của máy:

Đèn báo sạc	Trạng thái	Mô tả
Đèn đỏ	Nhấp nháy chậm	Dung lượng pin 0 - 10%
Đèn vàng	Nhấp nháy chậm	Dung lượng pin 11% - 50%
Đèn xanh	Nhấp nháy chậm	Dung lượng pin 51% - 99%
Đèn xanh	Luôn sáng	Dung lượng pin 100%

5 Bảo trì sản phẩm

Bảo trì sản phẩm

1. Làm sạch bề mặt sản phẩm bằng khăn ẩm, sau đó lau khô bằng vải mềm.
2. Khi cất trữ hoặc đi du lịch, hãy đặt vào túi đựng phù hợp.
3. Nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, không có khí ăn mòn.
4. Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, sau khi vệ sinh làm sạch để vào túi đựng, khuyến nghị nên sạc đầy cách mỗi tháng 1 lần.
5. Sản phẩm này phù hợp để vận chuyển bằng ô tô, tàu hỏa, đường thủy và máy bay, sản phẩm phải được cố định trong quá trình vận chuyển để tránh rung lắc, va đập, làm rơi, đồng thời phải đặt hướng lên trên, đặt nhẹ tay và tránh mưa ướt.
6. Để bảo vệ môi trường, không trực tiếp vứt bỏ máy, vui lòng xử lý theo các phương pháp loại bỏ rác thải.

 Khi bảo trì, phải rút phích cắm nguồn, nhưng không được rút khi tay còn ướt.

Xử lý pin đúng cách

Pin lithium-ion được sử dụng trong sản phẩm này là tài nguyên quý giá có thể tái chế. Khi pin hết, hãy tháo pin lithium-ion và giao cho cơ sở chuyên nghiệp có thể thu gom và xử lý pin tái sạc.

Phương pháp xử lý pin

Gỡ phần đáy ra sau đó lấy pin ra khỏi thiết bị. (Người dùng không thể tự thay pin).

- Pin phải được lấy ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ.
- Thiết bị phải được tắt nguồn trước khi tháo pin.
- Pin nên được xử lý một cách an toàn.

6 Hướng xử lý lỗi

Trang này liệt kê các lỗi thường gặp nhất của sản phẩm. Nếu Lỗi bạn gặp phải không có trong các bảng dưới đây, vui lòng gọi đến hotline dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền tại khu vực của bạn.

Mô tả lỗi	Hướng xử lý
Đầu massage trượt ra hoặc rơi ra	Kiểm tra xem đầu massage đã lắp đúng vị trí chưa
Sản phẩm không khởi động được	Kiểm tra dung lượng pin có đủ không (nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc ít nhất 4 giờ).
Không sạc được	1. Kiểm tra điện áp và dòng điện của bộ sạc có phù hợp với yêu cầu sản phẩm không. 2. Kiểm tra xem cổng sạc và đầu phích cắm được cắm chặt chưa.
Dừng đột ngột sau khi hoạt động liên tục trong 10 phút	Đây là thiết lập bảo vệ khi thiết bị hoạt động trong thời gian dài. Việc chuyển từ chế độ hoạt động sang chế độ tắt là bình thường. Nhấn và giữ nút để khởi động lại.

Đầu massage ngưng hoạt động sau khi bị chặn	Đây là thiết lập bảo vệ khi có hoạt động bất thường. Việc chuyển từ chế độ hoạt động sang chế độ tắt là bình thường. Nhấn và giữ nút để khởi động lại.
Việc sử dụng thiết bị hợp lý có thể giúp kéo dài hiệu quả tuổi thọ sản phẩm. Khuyến nghị: 1. Không ném hoặc làm rơi thiết bị trong quá trình sử dụng. 2. Không sử dụng thiết bị liên tục quá 20 phút. Tránh môi trường ẩm ướt khi sử dụng hoặc bảo quản. 3. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng sạc thiết bị mỗi tháng một lần.	

Nếu sản phẩm không được sử dụng trong thời gian dài, cần đảm bảo rằng các chức năng vẫn hoạt động bình thường trước khi sử dụng lại.		
Kiểm tra định kỳ	Kiểm tra các lỗi sau	Khi phát hiện các lỗi như trên, ngưng sử dụng thiết bị ngay lập tức và ngắt nguồn điện để tránh sự cố. Vui lòng gửi thiết bị đến trung tâm bảo hành của chúng tôi.
	• Dây sạc hoặc phích cắm có bị nóng không. • Dây sạc có bị trầy xước sâu, biến dạng hoặc có mùi khét không. • Thiết bị có phát ra âm thanh hoặc rung bất thường khi hoạt động không. • Thiết bị có hoạt động bình thường sau khi bật nguồn không. • Có bất kỳ dấu hiệu bất thường hoặc lỗi nào khác không.	

Lưu ý:

Nếu không thể khắc phục sự cố hoặc thiết bị vẫn không hoạt động bình thường sau khi đã thực hiện các biện pháp xử lý, hãy liên hệ với nhân viên dịch vụ sau bán hàng. Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa thiết bị.

7 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Súng Massage Cầm Tay
Mã sản phẩm	PPM7323
Phương thức sạc	Pin sạc Lithium
Điện áp hoạt động	7.4V ---
Công suất hoạt động	30W
Điện áp sạc	5V ---
Dòng điện sạc	2A
Dung lượng pin	1500mAh
Kích thước sản phẩm	157 x 62 x 204mm
Trọng lượng sản phẩm	Khoảng 0.7kg
Cấp độ massage	7 Cấp độ
Cổng sạc	USB Type C
Thời gian sạc	2 - 3 tiếng

8 Hướng dẫn dịch vụ bảo hành sản phẩm

Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng truy cập www.philips.com/-support hoặc liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng tại quốc gia / khu vực của bạn. Nếu không có trung tâm dịch vụ khách hàng tại quốc gia / khu vực của bạn, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương.

Trong vòng hai (02) năm kể từ ngày mua hàng, bạn sẽ được hưởng dịch vụ bảo hành miễn phí đối với bất kỳ hư hỏng nào do lỗi trong quá trình sản xuất, hoặc hư hỏng linh kiện trong điều kiện sử dụng thông thường và được xác nhận bởi kỹ thuật viên bảo hành của chúng tôi.

Dịch vụ bảo hành không bao gồm các phụ kiện cần thay thế định kỳ, thiết bị phụ trợ, chi phí vận chuyển và dịch vụ tại nhà. Vui lòng xuất trình hóa đơn mua hàng khi yêu cầu dịch vụ.

Phiếu bảo hành

Mã sản phẩm		Tên khách hàng	
Nơi mua hàng		Điện thoại	
Ngày mua hàng		Số sê-ri	
Dịch vụ bảo hành		Địa chỉ khách hàng	
Nội dung bảo hành		Ngày bảo hành	Nhân viên bảo hành

9 Danh sách đóng gói

Súng massage cầm tay	1x	Đầu massage	6x
Cáp sạc Type C	1x	Sách hướng dẫn	1x
Sách hướng dẫn nhanh	1x		