



Ghé thăm chúng tôi tại

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2023 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A Tháng 3 năm 2023



PHILIPS

Súng massage

Súng massage mini

PPM7303



Hướng Dẫn Sử Dụng

Mục Lục

1 Tính năng sản phẩm

2 Các thành phần

3 Cách sử dụng


4 Các thông số kỹ thuật

5 Bảng kê hàng hóa

1 Tính năng sản phẩm

Sản phẩm này có sẵn để giúp thư giãn cơ bắp căng thẳng và giảm đau mỏi sau khi tập luyện bằng cách xoa bóp các mô mềm trên cơ thể với tần số cao. Có thể kết hợp nhiều đầu massage khác nhau để xoa bóp các cơ trên toàn bộ cơ thể. Được trang bị túi đựng di động, dễ dàng mang theo bất kỳ đâu.

2 Các thành phần

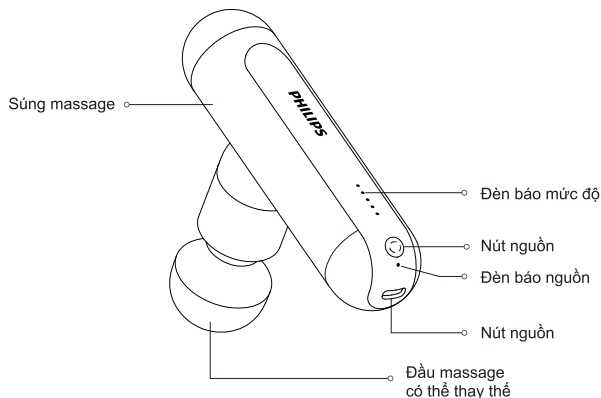

Đầu dẹp titan nóng

Bề mặt bằng thép không gỉ, tự động nhận dạng chườm ấm



Đầu hình cầu cao su Pro

Được làm từ chất liệu dụng cụ thể thao, mềm mại, đàn hồi, thân thiện với da và dễ làm sạch.



Đầu nhọn

Thích hợp để tác động vào các mô sâu và giảm đau nhức cơ bắp nhanh chóng.



Đầu hình ngón tay

Gắn trên đầu nhọn, phù hợp cho việc mát xa nhẹ nhàng với 6 núm silicone.



Đầu hình chữ U

Thích hợp tập trung massage vào những điểm đau cụ thể.



Đầu hình nêm

Dùng để massage những nhóm cơ lớn.


3 Cách sử dụng

1. Chuẩn bị trước khi sử dụng


1. Kiểm tra xem thiết bị và các phụ kiện của nó đã đầy đủ chưa.
2. Tháo mặt dây và các phụ kiện trong quá trình sử dụng, tránh làm ảnh hưởng đến bộ phận massage.
3. Lắp đặt đầu massage vào vị trí.

2. Lắp đặt sản phẩm

Theo yêu cầu thông báo, hãy chèn đầu massage phù hợp vào lỗ tròn phía trước của đơn vị chính, sau đó nhấn chặt đến cùng, như được hiển thị trong hình dưới đây, cho thấy nó đã được cài đặt vào vị trí.

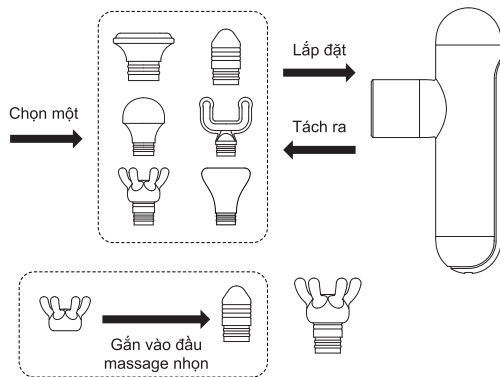

Cách lắp đặt được thể hiện trong hình minh họa bên dưới:

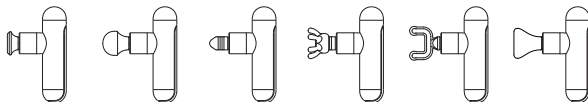


Cách sử dụng

1. Khởi động thiết bị. Nhấn và giữ nút thao tác trong 1 giây để khởi động thiết bị, sau đó thiết bị sẽ vào Mức 0 theo mặc định. Nhấn nút một lần để tăng một cấp độ, tối đa là 5 cấp độ. Khi chuyển sang Cấp 5, hãy nhấn nút để vào lại Cấp 0 và lặp lại theo cách này.
2. Nhấn và giữ nút hoạt động để tắt thiết bị.
3. Thiết bị sẽ tự động tắt sau 10 lần sử dụng liên tục trong 10 phút. Khởi động lại thiết bị để sử dụng tiếp.
4. Đầu massage bị treo sau khi bị chặn. Điều này nhằm bảo vệ thiết bị khỏi hoạt động bất thường. Nhấn nút để khởi động lại thiết bị.


Chỉ báo công suất nguồn

1. Trạng thái bật nguồn:
Đèn đỏ: Pin từ 0-10%
Đèn vàng: Pin từ 11-50%
Đèn xanh: Pin từ 51-100%
2. Trạng thái sạc:
Đèn màu đỏ nhấp nháy:
Pin hiện tại 0-10%
Đèn vàng nhấp nháy: Pin hiện tại 11-50%
Đèn xanh nhấp nháy: Pin hiện tại 51-99%
Màu xanh vẫn sáng: Pin đã sạc đầy.

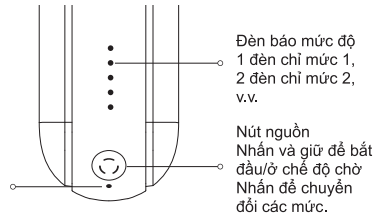

Sạc

- 1. Trước khi sử dụng lần đầu tiên, hãy sạc thiết bị trong 4 giờ cho đến khi thiết bị được sạc đầy.
- 2. Khi sạc, hãy sử dụng cáp sạc TYPE-C được cung cấp trong phụ kiện và kết nối đầu USB với cổng đầu ra 5V-2A.
- 3. Đèn LED trên thiết bị nhấp nháy thường xuyên để hiển thị dung lượng pin còn lại và cho biết pin đang được sạc.
- 4. Pin có thể được sạc bất cứ lúc nào và ở bất kỳ mức năng lượng nào. Không khởi động và sử dụng thiết bị khi đang sạc.
- 5. Pin cần được sạc khi lượng pin dưới 5% (đèn báo nguồn nhấp nháy màu đỏ).
- 6. Thiết bị được sạc đầy có thể hoạt động trong khoảng 2-3 giờ, tùy thuộc vào mức độ và cường độ làm việc.

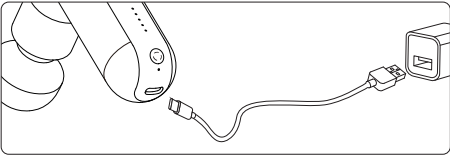

4 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Súng massage mini Philips
Mã sản phẩm	PPM7303
Điện áp hoạt động	7.4V ---
Công suất hoạt động	10W
Điện áp sạc	5V ---
Dòng điện sạc	2A
Dung lượng pin	1300mAh
Cổng sạc	USB Type-C
Thời gian sạc	4 tiếng
Trọng lượng	303g
Kích thước sản phẩm	75x38x153mm
Chế độ	5 Levels

5 Danh sách đóng gói

Súng massage	1x	Đầu massage	6x
Túi đựng	1x	Hướng dẫn sử dụng	1x
Cáp sạc USB	1x		