



Ghé thăm chúng tôi tại

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2023 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A Tháng 3 năm 2023



PHILIPS

Súng Massage

Máy Massage
Thể Thao Mini

PPM7501



Hướng Dẫn Sử Dụng

Mục Lục

1 Tính năng sản phẩm

2 Các thành phần

3 Cách sử dụng


4 Các thông số kỹ thuật

5 Bảng kê hàng hóa

1 Tính năng sản phẩm

Sản phẩm này có thể làm giãn mô mềm trên cơ thể thông qua tác động tần số cao, giúp giãn cơ căng thẳng và giảm thiểu đau mỏi sau khi tập thể dục. Các đầu massage khác nhau có thể được kết hợp để massage cơ. Nó nhỏ gọn và có thể mang đi đâu đó.

2 Các thành phần

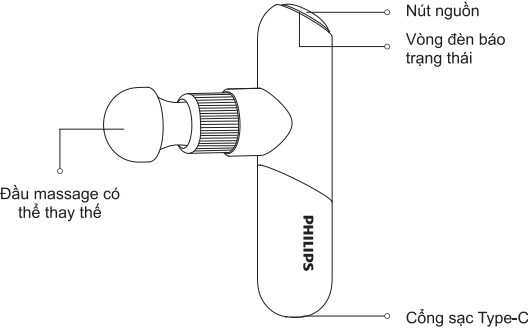

Đầu hình cầu cao su

Thích hợp để massage thư giãn hàng ngày.



Đầu phẳng titan

Thích hợp thư giãn cơ bắp sau khi tập thể dục.



Đầu cong

Đáp ứng nhu cầu massage trên diện rộng.



Đầu hình chữ U

Thích hợp tập trung massage vào những điểm đau cụ thể.



Đầu hình nêm

Dùng để massage những nhóm cơ lớn.




Đầu nhọn

Dùng để tác động các mô sâu, giảm đau nhức nhanh chóng.


3 Cách sử dụng

1. Lắp đặt sản phẩm

Theo nhu cầu massage, vui lòng chọn đầu massage và lắp vào lỗ tròn phía trước của súng massage.

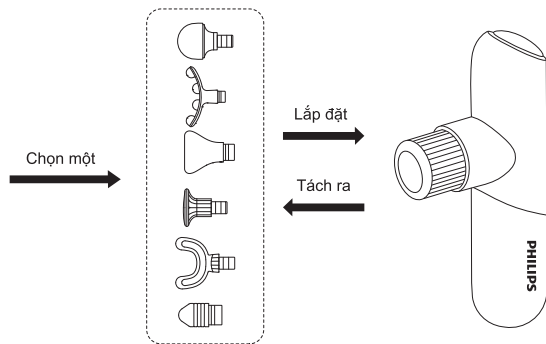


Lắp đặt như hình minh họa

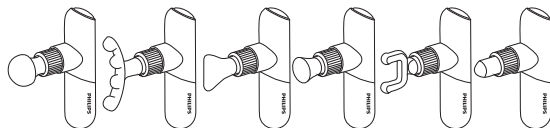

2. Bật / Tắt

Giữ nút hoạt động ở phía trên thiết bị trong 1 giây để bật nó lên. Không có hành động nào sẽ được thực hiện nếu giữ nút quá 3 giây để tránh hoạt động sai.

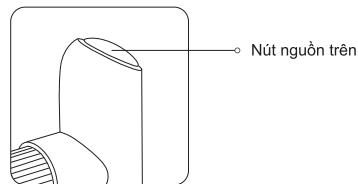

- ⊘ Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ sạc khi đang sạc và sản phẩm sẽ không bật lên bằng cách nhấn nút cảm ứng.
- ⚠ Để tránh mất xa cùng một vị trí trong thời gian dài, thiết bị sẽ tự động tắt sau khi sử dụng 10 phút cho mỗi cấp độ.

3. Chuyển đổi cấp độ

Nhấn nút hoạt động để chuyển từ cấp 1-5. Lúc này, vòng đèn sẽ hiển thị cấp độ, có thể chia đều thành 5 phần tương ứng với 5 cấp độ.



4. Kiểm tra cảm biến

Nếu sau 3 giây không có hoạt động nào, vòng đèn sẽ tự động chuyển sang chế độ phản hồi áp suất. Các màu sắc khác nhau sẽ thông báo cho người dùng về áp suất của thiết bị.

Màu tương ứng	Lực tác động lên thiết bị bởi người dùng
☐ Xanh lam	0-1kg
☐ Xanh lá	1-3kg
☐ Màu vàng	3-5kg
☐ Màu cam	>5kg


- !

Vui lòng điều chỉnh công suất theo tình trạng của riêng bạn để tránh làm hỏng cơ bắp của bạn.
- !

Vì các bộ phận chuyển động được làm bằng kim loại, chúng có thể nóng lên sau một thời gian dài sử dụng, đây là điều bình thường.

4. Sạc

Mất khoảng 4 giờ để sạc đầy pin. Vui lòng rút cáp sạc sau khi sạc xong.

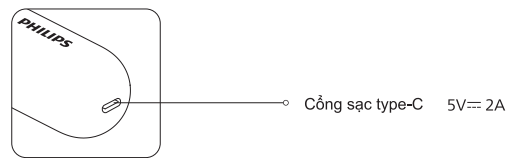

- !

Trong quá trình sạc, súng massage phải được đặt nằm trên mặt phẳng.

4 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Súng massage thể thao mini Philips
Mã sản phẩm	PPM7501
Điện áp hoạt động	11.1V ---
Công suất hoạt động	25W
Điện áp sạc	5V ---
Dòng điện sạc	2A
Dung lượng pin	1300mAh
Cổng sạc	USB Type-C
Trọng lượng	308g
Kích thước sản phẩm	145×75×35mm
Chế độ	5 Levels

5 Danh sách đóng gói

Súng massage	1×	Hướng dẫn sử dụng	1×
Túi đựng	1×	Đầu massage	6×
Cáp sạc	1×		