



Ghé thăm chúng tôi tại

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2023 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A Tháng 3 năm 2023



PHILIPS

Máy massage mắt

Máy massage
mắt rung

PPM2522



Hướng Dẫn Sử Dụng

Mục Lục

1 Tính năng sản phẩm

2 Các thành phần

3 Cách sử dụng



4 Các thông số kỹ thuật

5 Bảng kê hàng hóa

1 Tính năng sản phẩm

Sản phẩm này có thể kích thích các huyết xung quanh mắt và giải phóng áp lực lên mắt thông qua mát xa rung đa điểm kết hợp với chức năng nén ấm quý đạo kém hơn. Có nhiều chế độ để lựa chọn, phù hợp cho những người khác nhau sử dụng để mát xa và thư giãn mắt. Nó có thiết kế cửa sổ trực quan dạng lưới, giao diện đơn giản chỉ bằng một nút bấm, các điểm tiếp xúc mát-xa bằng silicon mềm mại và thân thiện với làn da, âm thanh nổi loa đôi và đầu nối âm thanh nổi. Ngoài ra, nó hỗ trợ kết nối Bluetooth để phát nhạc. Người dùng có thể vừa nghe nhạc để thư giãn vừa được massage mắt.

2 Các thành phần

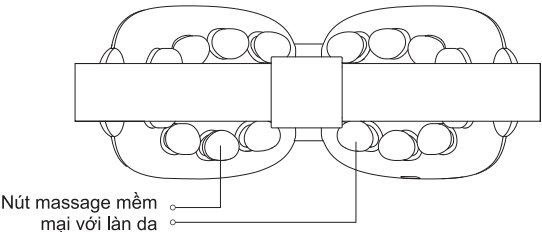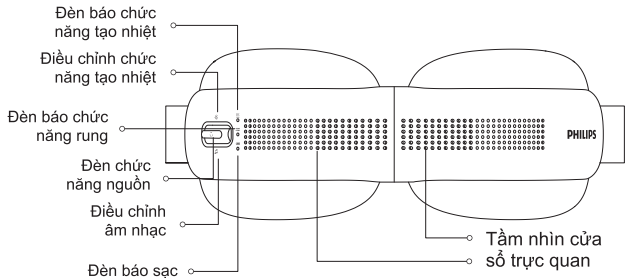

3 Cách sử dụng

Thận trọng trước khi sử dụng:

1. Kiểm tra xem thiết bị và các phụ kiện của nó đã hoàn tất chưa.
2. Kiểm tra xem sản phẩm còn pin hay không. Nếu chức năng của sản phẩm bị tắt hoặc không thể bật nguồn sản phẩm do pin yếu, vui lòng sạc trước khi sử dụng.
3. Tháo tất cả phụ kiện xung quanh mắt trong quá trình sử dụng để không ảnh hưởng đến hiệu quả massage.
4. Điều chỉnh dây đeo phù hợp với đầu của bạn rồi bật sản phẩm lên.

Hoạt động

Bật nguồn / Chế độ chờ

1. Nhấn và giữ nút chức năng nguồn trong 2 giây để bật nguồn kèm theo giọng nói "Massage on".
2. Sau khi bật nguồn, chế độ mặc định là chế độ làm đẹp mắt, chức năng rung đa tần số và chức năng tạo nhiệt mức trung bình sẽ được bật, nhạc sẽ tự động phát và có lời nhắc bằng giọng nói "Eye Beauty Mode". Đèn báo nguồn chuyển sang màu cam và đèn báo âm nhạc chuyển sang màu lục lam.
3. Một giây sau, khi lời nhắc bằng giọng nói "Search for the new Bluetooth device (Tìm kiếm thiết bị Bluetooth mới)" phát ra, thiết bị sẽ chuyển trở lại nhạc tích hợp sẵn của thiết bị.
4. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, người dùng có thể vào chế độ nghe nhạc trên Bluetooth bằng cách ghép nối các thiết bị điện tử.

Chuyển đổi chế độ

Nhấn nút chức năng nguồn để chuyển đổi các chế độ massage theo thứ tự như sau: Eye Beauty Mode (Chế độ làm đẹp mắt), Eye Care Mode (Chế độ chăm sóc mắt), Energizing Mode (Chế độ tăng cường năng lượng), Sleep-aid Mode (Chế độ hỗ trợ giấc ngủ) và Eye Warming Mode (Chế độ sưởi ấm mắt).

Eye Beauty Mode (Chế độ làm đẹp mắt): Rung đa tần số và tạo nhiệt ở mức trung bình, đèn báo rung chuyển sang màu lục lam và đèn báo chức năng tạo nhiệt chuyển sang màu cam. Sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động tắt 15 phút hoạt động và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "Massage Off".

Eye Care Mode (Chế độ chăm sóc mắt): Rung theo nhịp điệu và tạo nhiệt ở mức trung bình, đèn báo rung chuyển sang màu lục lam và đèn báo chức năng tạo nhiệt chuyển sang màu cam. Sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động tắt 15 phút hoạt động và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "Massage Off".

Energizing Mode (Chế độ tăng cường năng lượng): Rung theo vòng tròn và tạo nhiệt ở mức trung bình, đèn báo rung chuyển sang màu lục lam và đèn báo chức năng tạo nhiệt chuyển sang màu cam. Sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động tắt 15 phút hoạt động và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "Massage Off".

Sleep-aid Mode (Chế độ hỗ trợ giấc ngủ): Rung nhẹ và tạo nhiệt ở mức thấp, đèn báo rung chuyển sang màu lục lam và đèn báo chức năng tạo nhiệt chuyển sang màu cam. Sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động tắt 15 phút hoạt động mà không có lời nhắc bằng giọng nói.

Eye Warming Mode (Chế độ sưởi ấm mắt): Tạo nhiệt ở mức cao, đèn báo chức năng tạo nhiệt chuyển sang màu cam. Sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động tắt 15 phút hoạt động và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "Massage Off".

Chuyển đổi mức nhiệt độ

Đẩy nút chức năng nút lên một lần để chuyển đổi các mức nhiệt độ theo thứ tự như sau: Trung bình - Cao - Thấp. Mức nhiệt độ ban đầu của mỗi chế độ sẽ phụ thuộc vào định nghĩa thực tế, và các mức độ sẽ chuyển đổi theo thứ tự được đặt.

Tắt / Khởi động lại chức năng tạo nhiệt

Bật nút chức năng nguồn lên trên hai lần để tắt chế độ chườm ấm với lời nhắc bằng giọng nói "Turn off heating". Chuyển đổi nút lên trên hai lần một lần nữa, quá trình chườm ấm sẽ bắt đầu lại với lời nhắc bằng giọng nói "Turn on heating".

Chuyển đổi nhạc

Chuyển nút chức năng nguồn xuống một lần để chuyển đổi các bản nhạc.

Tắt / Khởi động lại nhạc

Gạt nút chức năng nguồn xuống hai lần để tắt nhạc với lời nhắc bằng giọng nói "Turn off music". Chuyển đổi nút xuống hai lần một lần nữa, âm nhạc sẽ bắt đầu lại với lời nhắc bằng giọng nói "Turn on music".

Chế độ âm nhạc tích hợp

Chuyển đổi bài hát: Tiếng ồn trắng đã được tích hợp sẵn, nhấn nút chức năng nguồn xuống một lần để chuyển sang bài hát tiếp theo. Tắt / bật nhạc: Nhấn nút chức năng nguồn xuống liên tục hai lần để tắt nhạc và sẽ có thông báo giọng nói "Turn off music". Nhấn nút chức năng nguồn xuống lại liên tiếp hai lần để khởi động lại nhạc, và sẽ có thông báo giọng nói "Turn on music".

Chế độ nhạc bluetooth

Tên Bluetooth: Philips PPM2702

Các bước để ghép nối Bluetooth:

1. Sau khi bật nguồn, sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "Search for the new bluetooth device" và sau đó thiết bị sẽ quay lại chế độ phát lại nhạc tích hợp. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, người dùng có thể vào chế độ nghe nhạc bluetooth bằng cách ghép nối thiết bị với các thiết bị điện tử.
2. Nếu thiết bị được kết nối thành công với Bluetooth của sản phẩm này, sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "The Bluetooth device is connected successfully"bởi.
3. Nếu kết nối không thành công, thiết bị sẽ tự động chuyển trở lại nhạc tích hợp.

Chuyển bản nhạc: Gạt nút chức năng nguồn xuống dưới một lần để chuyển sang bản nhạc tiếp theo.

Quay lại nhạc tích hợp: Sau khi người dùng tự ý ngắt kết nối thiết bị Bluetooth trong các thiết bị điện tử, nó sẽ mặc định quay lại nhạc tích hợp.


Tắt/khởi động lại nhạc: Gạt nút chức năng nguồn xuống 2 lần liên tiếp để tắt nhạc và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "Turn off music". Gạt nút chức năng nguồn xuống 2 lần liên tiếp một lần nữa để khởi động lại nhạc và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "Turn on music".

Hiện thị đèn báo

1. Khi chế độ chườm ấm mức độ thấp được kích hoạt, đèn báo màu cam sẽ sáng yếu và có lời nhắc "Low Temperature"
2. Khi bật chế độ chườm ấm ở mức trung bình, đèn báo màu cam sẽ sáng ở mức sáng trung bình và sẽ có lời nhắc "Mid Temperature".
3. Khi bật chế độ chườm ấm ở mức cao, đèn báo màu cam sẽ sáng ở mức sáng cao và sẽ có lời nhắc "High Temperature".
4. Khi tắt chế độ chườm ấm, đèn báo chế độ chườm ấm sẽ tắt cùng với lời nhắc "Turn off heating".
5. Chế độ Pin yếu: Khi dung lượng pin còn lại thấp hơn 10%, đèn báo pin sẽ nhấp nháy màu đỏ và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "The battery power is low, please charge it in time (Pin sắp hết, vui lòng sạc kịp thời)" (chỉ nhắc một lần mỗi lần khi sản phẩm được bật nguồn). Nếu nguồn pin bình thường, đèn báo pin sẽ có màu xanh lục.
6. Chế độ sạc: Khi sạc, đèn báo sạc được hiển thị với đèn nhấp nháy: đèn đỏ nhấp nháy (0-9%), đèn cam nhấp nháy (10%-50%), đèn xanh nhấp nháy (51%-99%), đèn xanh sáng liên tục nếu đã sạc đầy 100%. Lỗi giữa màu hiển thị cho chỉ báo nguồn pin tương ứng và nguồn pin thực tế phải được kiểm soát trong phạm vi 10%.

Phương pháp sạc

- 1. Kết nối cáp sạc USB với cổng sạc của sản phẩm.
- 2. Đèn chỉ báo sẽ ở trạng thái đèn nhấp nháy trong khi sạc. Đèn báo sẽ chuyển sang màu xanh sau khi sạc xong.
- 3. Không bật nguồn sản phẩm trong khi sạc.
- 4. Đơn vị chính sử dụng pin tích hợp và thời gian sạc là 2 giờ.
- 5. Nếu có lời nhắc bằng giọng nói về tình trạng hết pin trong khi sử dụng, hãy tạm dừng sử dụng sản phẩm cho đến khi được sạc đầy.
- 6. Sản phẩm hỗ trợ nhiều phương thức sạc: giao diện USB máy tính/nguồn điện thoại di động/bộ đổi nguồn (tham khảo các thông số kỹ thuật của sản phẩm để chọn).
- 7. Khi sạc, đèn báo sạc được hiển thị với đèn nhấp nháy: đèn đỏ nhấp nháy (0-9%), đèn cam nhấp nháy (10%-50%), đèn xanh nhấp nháy (51%-99%), đèn xanh sáng liên tục nếu đã sạc đầy 100%.

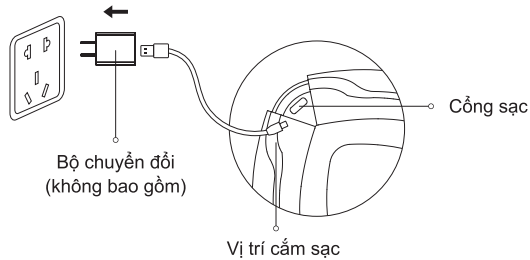

- ❗ Khi dung lượng pin còn lại của sản phẩm thấp, sẽ có là lời nhắc bằng giọng nói "Low battery, please charge it in time (Pin yếu, vui lòng sạc kịp thời)".
- ❗ Sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn khi được sạc ở trạng thái bật nguồn và bật nguồn không được hỗ trợ ở trạng thái sạc. Sản phẩm không thể hoạt động trong quá trình sạc.

- ❗ Không bóp cáp USB để tránh làm hỏng.
- ❗ Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bằng dây hoặc bộ phận lắp ráp đặc biệt có sẵn từ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất.
- ❗ Chỉ được cung cấp điện áp cực thấp an toàn tương ứng với nhãn trên thiết bị.

4 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy massage mắt Philips
Mã sản phẩm	PPM2522
Điện áp hoạt động	3.7V
Công suất hoạt động	2.4W
Điện áp sạc	5V
Dòng điện sạc	1A
Kích thước sản phẩm	1200mAh
Cổng sạc	Type-C
Dung lượng pin	191×78×74mm
Trọng lượng	Khoảng 0.24kg

5 Danh sách đóng gói

Máy massage	1×	Cáp sạc	1×
Hướng dẫn nhanh	1×	Hướng dẫn sử dụng	1×
Túi đựng	1×		