



Ghé thăm chúng tôi tại

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2023 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A Tháng 3 năm 2023



PHILIPS

Máy massage mắt

Massage mắt
áp suất khí

PPM2702



Hướng Dẫn Sử Dụng

Mục Lục

1 Tính năng sản phẩm

2 Các thành phần

3 Cách sử dụng



4 Các thông số kỹ thuật

5 Bảng kê hàng hóa

1 Tính năng sản phẩm

Sản phẩm này có thể giúp giảm mỏi mắt bằng nhiều cách như mát xa túi khí và chườm ấm. Nhiều chế độ mát-xa được cài đặt sẵn phù hợp cho những người khác nhau sử dụng để thư giãn mắt. Thông qua công nghệ phát nhạc dẫn truyền xương sáng tạo, người dùng có thể thư giãn mắt trong khi thưởng thức âm nhạc yêu thích của mình.


2 Các thành phần

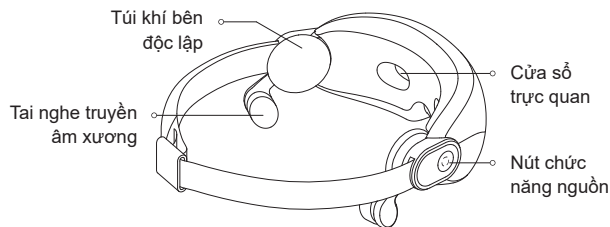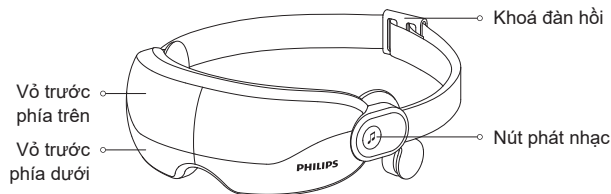

3 Cách sử dụng

Thận trọng trước khi sử dụng:

1. Kiểm tra xem thiết bị và các phụ kiện của nó đã hoàn tất chưa.
2. Kiểm tra xem sản phẩm còn pin hay không. Nếu chức năng của sản phẩm bị tắt hoặc không thể bật nguồn sản phẩm do pin yếu, vui lòng sạc trước khi sử dụng.
3. Tháo tất cả phụ kiện xung quanh mắt trong quá trình sử dụng để không ảnh hưởng đến hiệu quả massage.
4. Điều chỉnh dây khoá đàn hồi phù hợp với đầu của bạn rồi bật sản phẩm lên.
5. Đeo thiết bị âm thanh nổi dẫn truyền qua xương vào khu vực khoảng 0,5 - 1,5 cm trước tai của bạn. Nên điều chỉnh các góc khác nhau của giá đỡ tai nghe tùy theo nhu cầu để đạt được hiệu ứng âm thanh tốt nhất.

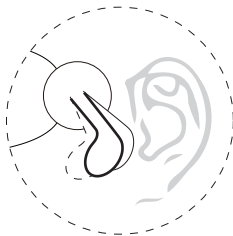

Nút chức năng

1. Nhấn và giữ nút chức năng nguồn trong 2 giây để bật nguồn kèm theo giọng nói "Massage on". Nhấn và giữ nút chức năng nguồn trong 2 giây để tắt nguồn kèm theo giọng nói "Massage off".
2. Sau khi bật nguồn, chế độ mặc định là chế độ làm đẹp mắt, chức năng nhiệt sẽ được bật, nhạc sẽ tự động phát và có lời nhắc bằng giọng nói "Eye Beauty Mode". Đèn báo nguồn chuyển sang màu cam và đèn báo âm nhạc chuyển sang màu lục lam.
3. Nhấp đúp vào nút (trong vòng 0,5 giây) để tắt/bật chức năng tạo nhiệt.
4. Chức năng tạo nhiệt và lời nhắc bằng giọng nói "Turn off heating" (đèn báo nguồn chuyển sang màu xanh lục) và "Turn on heating" (đèn báo nguồn chuyển sang màu cam). Sau khi tắt chức năng tạo nhiệt, khi chuyển sang chế độ tiếp theo có chức năng tạo nhiệt, chức năng tạo nhiệt sẽ tự động được bật.
5. Sản phẩm được trang bị 5 chế độ. Nhấn nút để lần lượt chuyển đổi các chế độ này theo vòng tròn với lời nhắc bằng giọng nói tương ứng.

Trạng thái kết nối Bluetooth thành công:

Eye Beauty Mode (Chế độ làm đẹp mắt): Nén khí 1 và tạo nhiệt. Sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn sau 30 phút theo mặc định, các chức năng nén khí và tạo nhiệt sẽ dừng sau 15 phút và sẽ có giọng nói "Massage Off"; chức năng nghe nhạc sẽ tiếp tục hoạt động trong 15 phút nữa và sau đó sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn mà không có lời nhắc bằng giọng nói.

Eye Care Mode (Chế độ chăm sóc mắt): Nén khí 2 và tạo nhiệt, sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn sau 30 phút mặc định, chức năng nén khí và tạo nhiệt sẽ dừng lại sau 15 phút, và sẽ có giọng nói "Massage Off", chức năng nghe nhạc sẽ tiếp tục hoạt động trong 15 phút nữa và sau đó sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn mà không có lời nhắc bằng giọng nói.

Sleep-aid Mode (Chế độ hỗ trợ giấc ngủ): Nén khí 3 và tạo nhiệt, Sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn sau 30 phút theo mặc định, chức năng nén khí sẽ dừng lại sau 15 phút, và không có lời nhắc giọng nói nào sẽ được phát ra, chức năng nghe nhạc sẽ tiếp tục hoạt động trong 15 phút nữa và sau đó sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn mà không có lời nhắc bằng giọng nói.

Eye Warming Mode (Chế độ làm ấm mắt: Chườm ấm): Sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn sau 30 phút theo mặc định, chức năng tạo nhiệt sẽ dừng lại sau 15 phút, và sẽ có thông báo âm thanh "Massage Off", chức năng nghe nhạc sẽ tiếp tục hoạt động trong 15 phút nữa và sau đó sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn mà không có lời nhắc bằng giọng nói.

Music Mode (Chế độ âm nhạc): Phát nhạc qua Bluetooth. Ở chế độ này, không có chế độ nhào trộn và tạo nhiệt. Người dùng có thể kích hoạt chức năng tạo nhiệt bằng cách nhấp đúp vào nút chức năng nguồn (nếu chức năng tạo nhiệt được kích hoạt, chức năng này sẽ tự động tắt sau 15 phút trong khi chức năng âm nhạc vẫn hoạt động). Không có thông báo giọng nói khi nhấn nút và tắt sản phẩm. Không có tính năng tắt tự động, do đó, người dùng có thể nhấn và giữ nút chức năng nguồn trong 2 giây để tắt thiết bị.

Trạng thái kết nối Bluetooth không thành công:

Eye Beauty Mode (Chế độ làm đẹp mắt): Nén khí 1 và tạo nhiệt. Sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động chạy trong 15 phút và cứ 5 phút lại giảm âm lượng một lần. Thiết bị sẽ tắt nguồn sau 15 phút và có lời nhắc bằng giọng nói "Massage Off".

Eye Care Mode (Chế độ chăm sóc mắt): Nén khí 2 và tạo nhiệt, sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động chạy trong 15 phút và cứ 5 phút lại giảm âm lượng một lần. Thiết bị sẽ tắt nguồn sau 15 phút và có lời nhắc bằng giọng nói "Massage Off".

Sleep-aid Mode (Chế độ hỗ trợ giấc ngủ): Nén khí 3 và tạo nhiệt, Sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động chạy trong 15 phút và cứ 5 phút lại giảm âm lượng một lần. Thiết bị sẽ tắt nguồn sau 15 phút và có lời nhắc bằng giọng nói "Massage Off".

Eye Warming Mode (Chế độ làm ấm mắt: Chườm ấm): Sau khi chuyển sang chế độ này, sản phẩm sẽ tự động chạy trong 15 phút và cứ 5 phút lại giảm âm lượng một lần. Thiết bị sẽ tắt nguồn sau 15 phút và có lời nhắc bằng giọng nói "Massage Off".

Music Mode (Chế độ âm nhạc): Âm nhạc phát tích hợp. Không có chế độ nhào trộn và tạo nhiệt trong chế độ này. Người dùng có thể kích hoạt chức năng tạo nhiệt bằng cách nhấn đúp nút chức năng nguồn (nếu chức năng tạo nhiệt được kích hoạt, chức năng này sẽ tự động tắt sau 15 phút). Sau khi chuyển sang chế độ này, thiết bị sẽ tự động chạy trong 15 phút rồi tắt nguồn. Sẽ không có lời nhắc bằng giọng nói khi tắt nguồn.

*Âm lượng sẽ được giảm xuống 3 mức trong vòng 15 phút. Ở phút thứ 5 - 6 và phút thứ 10 - 11, âm lượng sẽ được giảm dần để đảm bảo các mức âm lượng khác nhau được kết nối mượt mà.

Chế độ phát nhạc

(1) Phát nhạc tích hợp (Thiết bị không kết nối được Bluetooth, đèn chỉ báo có màu lục lam).

Nhấn: Phát bài hát tiếp theo

Nhấn đúp chuột: Tắt/bật nhạc (Khi phát nhạc ở trạng thái "TẮT", đèn báo sẽ tắt và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "TẮT/BẬT Nhạc")

Nhấn và giữ: Tìm kiếm thiết bị Bluetooth mới (Phát nhạc dừng, đèn chỉ báo màu xanh của nút nhạc nhấp nháy và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "Tìm kiếm thiết bị Bluetooth mới").

(2) Phát nhạc Bluetooth (Thiết bị kết nối được Bluetooth và đèn chỉ báo có màu xanh lam)

Nhấn: phát bài hát tiếp theo

Nhấn đúp chuột: Tắt/bật nhạc (Khi phát nhạc ở trạng thái "TẮT", đèn báo sẽ tắt và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "TẮT / BẬT Nhạc")

Nhấn và giữ: Ngắt kết nối thiết bị Bluetooth hiện được kết nối, tìm kiếm thiết bị Bluetooth mới (Phát nhạc dừng, đèn chỉ báo màu xanh lam của nút nhạc nhấp nháy và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "Tìm kiếm thiết bị Bluetooth mới").

Lưu ý:

(1) Thời gian tìm kiếm thiết bị Bluetooth mới là 1 phút. Nhấn và giữ nút một lần nữa để dừng tìm kiếm và quay lại chế độ nghe nhạc trước đó.

(2) Trong trường hợp ghép nối không thành công, nhạc tích hợp sẽ được phát, đèn chỉ báo nhạc sẽ chuyển từ nhấp nháy màu xanh lam sang màu lục lam còn lại và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "The Bluetooth device fails to connect".

(3) Nếu ghép nối thành công, âm thanh trong thiết bị được ghép nối sẽ được phát, đèn chỉ báo nhạc sẽ chuyển từ nhấp nháy màu xanh lam sang màu xanh lam giữ nguyên và sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "The Bluetooth device is connected successfully".

Chế độ phát nhạc Bluetooth


Tên Bluetooth: Philips PPM2702

Các bước để ghép nối Bluetooth:

1. Sau khi bật nguồn, hệ thống nền sẽ tự động tìm kiếm thiết bị Bluetooth đã ghép nối (thời gian tìm kiếm là 10 phút, trong thời gian đó đèn chỉ báo nhạc có màu lục lam) và tự động kết nối thiết bị Bluetooth đã ghép nối.
2. Sau khi ghép nối thành công, đèn chỉ báo sẽ chuyển từ lục lam sang xanh lam, sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "The Bluetooth device is connected successfully" và âm thanh trong thiết bị được ghép nối sẽ được phát.
3. Nếu quá trình ghép nối không thành công trong vòng 10 phút, hiệu ứng ánh sáng hiện tại (màu lục lam) sẽ được duy trì và nhạc tích hợp sẽ tiếp tục được phát mà không có bất kỳ lời nhắc thoại nào.

Phương pháp sạc

1. Kết nối cáp sạc USB với cổng sạc của sản phẩm.
2. Đèn chỉ báo sẽ ở trạng thái đèn nhấp nháy trong khi sạc. Đèn báo sẽ chuyển sang màu xanh sau khi sạc xong.
3. Không bật nguồn sản phẩm trong khi sạc.
4. Đơn vị chính sử dụng pin tích hợp và thời gian sạc là 2 giờ.
5. Nếu có lời nhắc bằng giọng nói về tình trạng hết pin trong khi sử dụng, hãy tạm dừng sử dụng sản phẩm cho đến khi được sạc đầy.
6. Sản phẩm hỗ trợ nhiều phương thức sạc: giao diện USB máy tính/nguồn điện thoại di động/bộ đổi nguồn (tham khảo các thông số kỹ thuật của sản phẩm để chọn).
7. Khi sạc, đèn báo sạc được hiển thị với đèn nhấp nháy: đèn đỏ nhấp nháy (0-9%), đèn cam nhấp nháy (10%-50%), đèn xanh nhấp nháy (51%-99%), đèn xanh sáng liên tục nếu đã sạc đầy 100%.

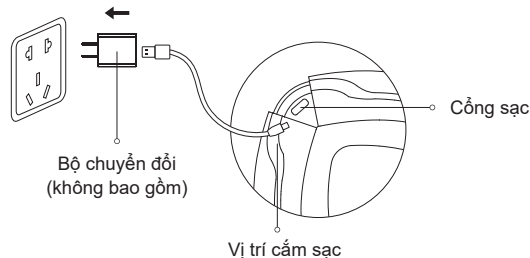

- ❗ Khi dung lượng pin còn lại của sản phẩm thấp, sẽ có lời nhắc bằng giọng nói "Low battery, please charge it in time (Pin yếu, vui lòng sạc kịp thời)".
- ❗ Sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn khi được sạc ở trạng thái bật nguồn và bật nguồn không được hỗ trợ ở trạng thái sạc. Sản phẩm không thể hoạt động trong quá trình sạc.
- ❗ Không bóp cáp USB để tránh làm hỏng.

4 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy massage mắt Philips
Mã sản phẩm	PPM2702
Điện áp hoạt động	3.7V ---
Công suất hoạt động	4W
Điện áp sạc	5V ---
Dòng điện sạc	500mA
Kích thước sản phẩm	215x114x80mm
Trọng lượng	365g
Dung lượng pin	1200mAh
Cổng sạc	Type-C

5 Danh sách đóng gói

Máy massage	1×	Cổng sạc Type-C	1×
Hướng dẫn nhanh	1×	Hướng dẫn sử dụng	1×
Túi đựng	1×		