



Quý khách có thể tìm thấy chúng tôi tại:

www.philips.com

Có thể có một số khác biệt giữa nội dung của sách hướng dẫn này và sản phẩm thực tế. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi có quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

© 2024 AquaShield

Giữ toàn bộ bản quyền

Philips và biểu tượng khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối dưới trách nhiệm của Guangdong Deerma Technology Company Limited và Guangdong Deerma Technology Company Limited cũng là đơn vị bảo hành cho sản phẩm này.

Rev B Tháng 9 năm 2024



PHILIPS

Súng Massage

Súng Massage Cầm Tay

PPM7325



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mục Lục

1	Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng	1	6	Hướng xử lý lỗi	10
	Mô tả biểu tượng	1			
	Đối tượng phù hợp	1	7	Thông số kỹ thuật	11
	Lưu ý khi sử dụng	2			
	Các biện pháp bảo trì an toàn	3	8	Hướng dẫn dịch vụ bảo hành sản phẩm	12
				Phiếu bảo hành	13
2	Tính năng sản phẩm	4	9	Danh sách đóng gói	13
3	Chi tiết sản phẩm	4			
4	Hướng dẫn sử dụng	5			
	Lưu ý trước khi sử dụng	5			
	Lắp đặt các đầu massage	5			
	Thao tác sử dụng	6			
	Hướng dẫn sạc	7			
	Mô tả đèn báo	8			
5	Bảo trì sản phẩm	9			
	Bảo trì sản phẩm	9			
	Xử lý	9			

1 Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này và giữ gìn cẩn thận trước khi sử dụng sản phẩm.

Mô tả biểu tượng

Để tránh chấn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản, vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây.

- Các biểu tượng sau đây thể hiện các hành động cần được tuân theo:

-  **BIỂU TƯỢNG CẤM**
-  **BIỂU TƯỢNG LÀM THEO CHỈ DẪN**

Đối tượng phù hợp

-  **Các nhóm sau nên thận trọng khi sử dụng thiết bị này:**
- Người bị rối loạn cảm giác da.
 - Người có cấy ghép kim loại, silicon hoặc nhựa do gãy xương hoặc phẫu thuật thẩm mỹ.
 - Người có thiết bị điện tử y tế cấy trong cơ thể (ví dụ: máy tạo nhịp tim) có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều điện tử.
 - Người có di chứng sau tai nạn.
 - Người mất cảm giác nhiệt độ.
 - Người có khối u ác tính.
 - Người mắc bệnh tim.
 - Phụ nữ mang thai hoặc vừa mới sinh.
 - Người bị rối loạn cảm giác do tiểu đường.
 - Người có vết thương chưa lành.
 - Người bị chấn thương cơ.
 - Người cần yên tĩnh hoặc có tình trạng sức khỏe yếu.

- Người bị loãng xương, gãy xương nghiêm trọng, bong gân, đau cơ hoặc đau cấp tính (đầu).
- Người có triệu chứng sốt.
- Người đang bị viêm cấp, mệt mỏi, ớn lạnh, dao động huyết áp hoặc các triệu chứng tương tự.
- Người đang điều trị y tế.

Lưu ý khi sử dụng

- ❗ Thiết bị được cài đặt thời gian hoạt động mỗi lần là 15 phút. Không sử dụng quá 30 phút mỗi lần. Sau khi sử dụng, hãy để thiết bị nghỉ 30 phút để đảm bảo độ bền.
 - ❗ Không sử dụng thiết bị khi đang mặc quần áo dài.
 - ❗ Tránh lạm dụng máy mát-xa.
 - ❗ Nếu bạn cảm thấy đau lưng, chóng mặt, buồn nôn, hồi hộp hoặc các phản ứng bất thường khác trong quá trình sử dụng, hãy ngưng sử dụng ngay lập tức.
 - ❗ Tránh xa chất lỏng và nguồn nhiệt, đảm bảo cổng sạc sạch bụi. Thiết bị không thể sử dụng trong khi đang sạc.
 - ❗ Ngắt nguồn điện ngay sau khi sạc xong.
 - ❗ Nếu thiết bị hoạt động không bình thường hoặc có dấu hiệu bất thường, hãy ngừng sử dụng ngay.
 - ❗ Kiểm tra thiết bị hoạt động bình thường trước mỗi lần sử dụng theo hướng dẫn trong sách HDSD.
 - ⊘ Không sử dụng thiết bị khi đang ngủ.
 - ⊘ Không phủ chăn hoặc mền lên thiết bị.
 - ⊘ Không nằm hoặc ngồi lên thiết bị.
 - ⊘ Tránh để thiết bị chịu lực va đập mạnh hoặc tải trọng lớn.
 - ⊘ Không sử dụng thiết bị trong nhà tắm hoặc khi đang tắm.
 - ⊘ Không tự ý tháo rời, thay đổi hay sửa chữa thiết bị.
- Các điều kiện cấm sử dụng:
- Khi đang quá mệt mỏi
 - Trong vòng một giờ trước hoặc sau bữa ăn
 - Sau khi uống rượu

- ❗ Tháo các phụ kiện mát-xa hoặc các vật khác có thể ảnh hưởng đến quá trình mát-xa trước khi sử dụng.
- ❗ Không để trẻ em chơi với sản phẩm như đồ chơi.
- ❗ Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra sản phẩm có ở tình trạng tốt không. Nếu có thắc mắc, hãy hỏi nhà cung cấp.
- ❗ Thiết bị này không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần bị suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức — trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- ❗ Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo không chơi đùa với thiết bị.
- ❗ Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bằng dây chuyên dụng hoặc cụm dây từ nhà sản xuất hoặc đơn vị dịch vụ.
- ❗ Thiết bị có pin, chỉ được thay thế bởi người có chuyên môn.
- ❗ Chỉ cấp nguồn điện áp siêu thấp an toàn đúng với thông số được ghi trên thiết bị.
- ⊘ Không giẫm lên sản phẩm và không sử dụng như đồ chơi để tránh tai nạn.


Các biện pháp bảo trì an toàn

- ❗ Luôn tắt nguồn trước khi vệ sinh thiết bị.
- ❗ Xử lý túi bao bì đúng cách, tránh xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- ❗ Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài, hãy kiểm tra công tắc và các bộ phận khác hoạt động bình thường trước khi dùng lại.
- ❗ Không sử dụng dầu bay hơi, dung môi, cồn, chất tẩy rửa mạnh, thuốc tẩy, v.v. để vệ sinh thiết bị.
- ❗ Kiểm tra thiết bị thường xuyên để phát hiện dấu hiệu hao mòn hoặc hư hỏng. Nếu có, hoặc nếu thiết bị bị sử dụng sai mục đích, hãy liên hệ nhà cung cấp để kiểm tra trước khi dùng lại.
- ⊘ Thiết bị có pin lithium — không tháo rời, chỉnh sửa, nhúng vào nước hay ném vào lửa vì có thể gây hư hỏng.
- ⊘ Giữ thiết bị ngoài tầm với của trẻ em và trẻ sơ sinh. Không để trẻ em tiếp xúc hoặc sử dụng thiết bị, vì có thể gây thương tích.
- ⊘ Không làm hỏng, chỉnh sửa, hoặc bẻ cong mạnh/dây cáp USB. Không đặt vật nặng lên cáp hoặc làm dập.

2 Tính năng sản phẩm

Rung động tần số cao giúp thư giãn các cơ bị căng và giảm đau nhức, mệt mỏi sau khi vận động. Với các đầu massage khác nhau, sản phẩm có thể được sử dụng để massage cơ ở nhiều vùng khác nhau trên cơ thể, kèm theo túi đựng tiện lợi để dễ dàng mang theo.

3 Chi tiết sản phẩm

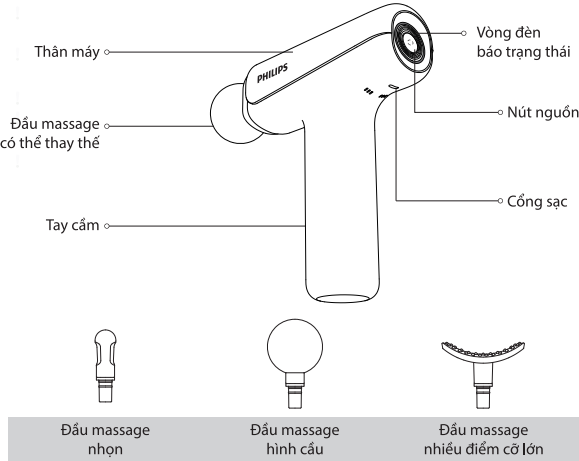


4 Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý trước khi sử dụng

1. Kiểm tra thiết bị và phụ kiện đã đầy đủ hay chưa.
2. Tháo bỏ các vật trang sức hoặc phụ kiện để tránh ảnh hưởng đến vùng massage.
3. Đảm bảo đầu massage được lắp đúng cách.

Lắp đặt các đầu massage


- !** Chọn đầu massage phù hợp với nhu cầu massage của bạn, lắp vào lỗ tròn phía trước của máy massage và ấn chặt cho đến khi cố định hoàn toàn.

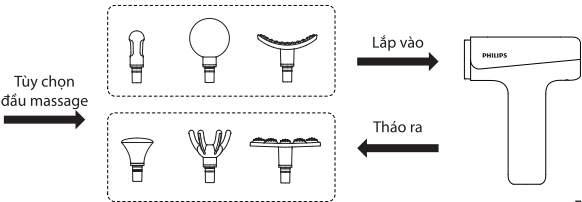

Thao tác sử dụng


1. Nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để bắt thiết bị. Thiết bị sẽ mặc định khởi động ở Cấp độ 1, và đèn báo trạng thái sẽ sáng màu xanh dương.
 2. Nhấn nút nguồn một lần để chuyển đổi cấp độ massage. Nhấn hai lần để chuyển sang Cấp độ 2, đèn báo chuyển xanh lá cây; Nhấn ba lần để chuyển sang Cấp độ 3, đèn báo chuyển vàng; nhấn bốn lần để chuyển sang Cấp độ 4, đèn báo chuyển đỏ; Nhấn năm lần để chuyển sang Cấp độ 5, đèn báo chuyển tím.
 3. Ở bất kỳ cấp độ nào, nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để tắt máy.
 4. Thiết bị sẽ tự động tắt sau 15 phút sử dụng liên tục.
- Để sử dụng lại, nhấn và giữ nút nguồn để khởi động lại.

- ❗ Chế độ massage: Cấp độ 1-4: Rung tần số cố định
Cấp độ 5: Rung thông minh với tần số thay đổi
- ❗ Bảo vệ khi kẹt đầu massage. Nếu đầu massage bị kẹt, thiết bị sẽ tự động ngừng hoạt động và chuyển sang chế độ chờ như một cơ chế bảo vệ. Chế độ chờ được hiển thị bằng đèn xanh nhấp nháy. Để khởi động lại, nhấn nút nguồn một lần. Khi chế độ chờ kết thúc, nhấn và giữ nút nguồn để khởi động lại thiết bị.

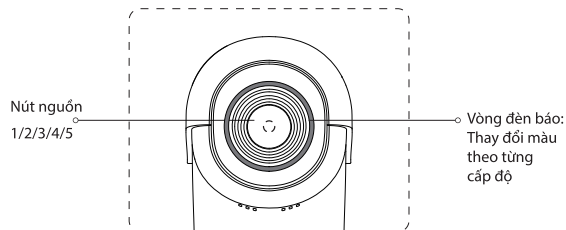


Hướng dẫn sạc

1. Không sạc sản phẩm ở tư thế dựng đứng để tránh bị ngã và gây thương tích.

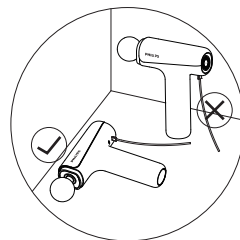

2. Trước lần sử dụng đầu tiên, hãy sạc trong 4 giờ cho đến khi đầy pin hoàn toàn.
3. Khi sạc, hãy kết nối cáp dữ liệu đi kèm vào cổng sạc trên thân máy và đầu còn lại vào nguồn điện.
4. Đèn báo trạng thái sẽ nhấp nháy nhẹ nhàng (dạng "thở") để báo đang sạc, màu sắc đèn báo biểu thị mức pin.
5. Khi đèn báo nhấp nháy màu đỏ, hãy sạc sản phẩm ngay lập tức.
6. Sản phẩm không thể sử dụng trong khi đang sạc.

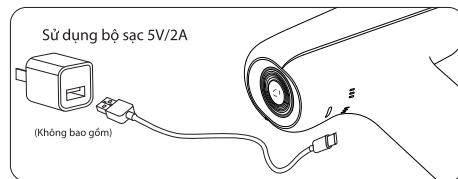

Mô tả đèn báo

Nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để bật thiết bị. Khi bật máy mặc định sẽ vào chế độ số 1 và đèn báo trạng thái sẽ thay đổi tùy theo cấp độ. Trạng thái đèn báo như sau:

Màu đèn báo	Trạng thái	Mô tả
Xanh dương	Luôn sáng	Cấp độ 1
Xanh lá cây	Luôn sáng	Cấp độ 2
Vàng	Luôn sáng	Cấp độ 3
Đỏ	Luôn sáng	Cấp độ 4
Tím	Luôn sáng	Cấp độ 5

Trong quá trình sạc, đèn báo trạng thái thể hiện mức pin hiện tại theo màu như sau:

Màu đèn báo khi sạc	Trạng thái	Mô tả mức pin
Đỏ	Nhấp nháy nhẹ nhẹ	Mức pin từ 0–10%
Vàng	Nhấp nháy nhẹ nhẹ	Mức pin từ 11–50%
Xanh dương	Nhấp nháy nhẹ nhẹ	Mức pin từ 51–99%
Xanh dương	Luôn sáng	Pin đầy 100%

Cảnh báo mức pin yếu:

1. Khi pin dưới 20%, vòng đèn sẽ nhấp nháy màu đỏ trong 2,5 giây để cảnh báo, sau đó trở lại màu tương ứng với cấp độ hiện tại. Lúc này, nên sạc thiết bị.
2. Khi pin chỉ còn 10%, vòng đèn sẽ nhấp nháy đỏ rồi tự tắt máy. Vui lòng sạc ngay.

5 Bảo trì sản phẩm

Bảo trì sản phẩm

1. Lau bề mặt sản phẩm bằng khăn ẩm mềm, sau đó lau khô bằng khăn mềm khô.
2. cất sản phẩm vào túi bảo quản đi kèm khi không sử dụng hoặc khi mang đi du lịch.
3. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh khí ẩm mốc.
4. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy vệ sinh và sạc sản phẩm mỗi tháng một lần.
5. Sản phẩm có thể vận chuyển bằng ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Khi vận chuyển, hãy cố định sản phẩm để tránh rung lắc, va chạm, lẫn hoặc rơi, và đảm bảo sản phẩm được đặt thẳng đứng, xử lý nhẹ nhàng, được che chắn khỏi mưa.
6. Để bảo vệ môi trường, không vứt bỏ toàn bộ sản phẩm trực tiếp. Vui lòng xử lý riêng từng bộ phận theo đúng quy định.

❗ Luôn rút dây USB ra trong quá trình bảo trì, nhưng không được rút khi tay đang ướt.

Xử lý

Pin lithium-ion được sử dụng trong sản phẩm này là tài nguyên tái chế quý giá. Khi sản phẩm không còn sử dụng, hãy tháo pin lithium-ion và giao cho đơn vị chuyên tái chế và phục hồi pin sạc.

Cách tháo pin:

1. Cạy phần đáy sản phẩm để mở và tháo pin.
2. Tháo PCB và lấy nó ra.
3. Cắt các dây kết nối pin và bọc đầu dây lại bằng băng cách điện.

Lưu ý khi tháo pin:

- Pin phải được tháo ra khỏi thiết bị trước khi xử lý.
- Thiết bị phải được tắt nguồn hoàn toàn khi tháo pin.
- Pin phải được xử lý một cách an toàn.

6 Hướng xử lý lỗi

Phần này liệt kê các sự cố phổ biến nhất với sản phẩm này. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho vấn đề của mình, vui lòng liên hệ với đường dây nóng dịch vụ hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền tại địa phương.

Mô tả lỗi	Hướng xử lý lỗi
Đầu massage trượt ra hoặc rơi ra	Kiểm tra xem đầu massage đã được lắp đúng cách chưa
Sản phẩm không khởi động được	Kiểm tra xem pin có đủ sạc không (nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc pin ít nhất 4 giờ)
Sản phẩm không thể sạc	Kiểm tra xem điện áp và dòng điện của bộ sạc có phù hợp với yêu cầu của sản phẩm không
	Kiểm tra xem cổng sạc và nguồn điện có được kết nối đúng cách không
Sản phẩm dừng đột ngột sau 15 phút sử dụng liên tục	Đây là tính năng bình thường được thiết kế để bảo vệ trong quá trình hoạt động lâu dài. Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ tắt. Nhấn và giữ nút Nguồn để khởi động lại.
Đầu massage ngừng hoạt động sau khi bị kẹt	Đây là tính năng bình thường được thiết kế để bảo vệ khi có sự cố. Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ khi đầu massage bị kẹt và ngừng hoạt động. Nhấn nút Nguồn để khởi động lại. Nếu không khởi động lại kịp thời, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ tắt. Khi đó, nhấn và giữ nút Nguồn để khởi động lại.
Sử dụng hợp lý sản phẩm có thể kéo dài tuổi thọ thiết bị. Khuyến cáo: 1. Không ném hoặc làm rơi sản phẩm trong quá trình sử dụng. 2. Không sử dụng sản phẩm liên tục quá 15 phút trong một lần. Tránh môi trường ẩm ướt khi sử dụng hoặc lưu trữ. 3. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc ít nhất một lần mỗi tháng.	

Sau thời gian dài không sử dụng, hãy kiểm tra thiết bị có hoạt động đúng cách trước khi sử dụng.		
Kiểm tra định kỳ	Kiểm tra các lỗi sau:	Nếu gặp bất kỳ lỗi nào ở trên, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức để tránh tai nạn và ngắt nguồn điện. Gửi thiết bị đến trung tâm bảo hành được ủy quyền của công ty để sửa chữa.
	• Dây sạc hoặc đầu sạc có bị nóng không • Dây sạc có bị trầy xước sâu, biến dạng hoặc có mùi khét không • Có âm thanh lạ hoặc rung bất thường khi vận hành không • Thiết bị có hoạt động bình thường sau khi bật nguồn không • Có các bất thường hoặc lỗi khác không	

Lưu ý:

Nếu sự cố không thể giải quyết hoặc sản phẩm không hoạt động sau khi đã khắc phục sự cố, vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ sau bán hàng. Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm.

7 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Súng Massage Philips
Mã sản phẩm	PPM7325
Điện áp hoạt động	7.4V ===
Công suất hoạt động	33W
Điện áp sạc	5V ===
Dòng điện sạc	2A
Dung lượng pin	2500mAh
Trọng lượng tịnh	Khoảng 0.71kg
Kích thước sản phẩm	160x58x203mm

8 Hướng dẫn dịch vụ bảo hành sản phẩm

Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng truy cập www.philips.com/support hoặc liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng tại quốc gia/khu vực của bạn. Nếu không có trung tâm dịch vụ khách hàng tại quốc gia/khu vực của bạn, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương.

Trong vòng hai năm kể từ ngày mua, bạn sẽ được bảo hành miễn phí cho bất kỳ hư hỏng nào do lỗi quy trình sản xuất hoặc hư hỏng các linh kiện dưới điều kiện sử dụng bình thường, được xác nhận bởi nhân viên kỹ thuật bảo trì của chúng tôi.

Dịch vụ bảo hành không bao gồm các vật tư tiêu hao thay thế thường xuyên, thiết bị phụ trợ, chi phí vận chuyển và dịch vụ giao nhận tận nơi. Vui lòng xuất trình bằng chứng mua hàng cho nhân viên khi bảo hành sản phẩm.

Việt Nam
Chăm sóc khách hàng: +84-909808029
Email: Philips.massager.VN@orrohome.vn

Phiếu Bảo Hành

Mã sản phẩm		Tên khách hàng	
Nơi bán hàng		Điện thoại	
Ngày mua hàng		Số sê-ri	
Dịch vụ bảo hành		Địa chỉ khách hàng	
Nội dung bảo hành	Ngày bảo hành		Nhân viên bảo hành

9 Danh sách đóng gói

Danh sách đóng gói PPM7325			
Súng massage cầm tay	1x	Đầu massage	6x
Cáp sạc Type-C	1x	Sách hướng dẫn	1x
Túi đựng sản phẩm	1x		
Sách hướng dẫn nhanh	1x		