



Ghé thăm chúng tôi tại:

www.philips.com

Có thể có một số khác biệt giữa nội dung của sách hướng dẫn này và sản phẩm thực tế. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi có quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

© 2024 AquaShield

Giữ toàn bộ bản quyền

Philips và biểu tượng khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối dưới trách nhiệm của Guangdong Deerma Technology Company Limited và Guangdong Deerma Technology Company Limited cũng là đơn vị bảo hành cho sản phẩm này.

Rev B Tháng 1 năm 2025




PHILIPS

Máy massage mắt

Máy massage mắt rung

PPM2301

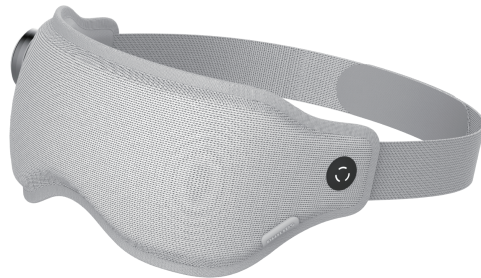

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mục Lục

1	Thông tin quan trọng	1
	Mô tả biểu tượng	1
	Đối tượng phù hợp	1
	Lưu ý khi sử dụng	2
	Lưu ý về vị trí sử dụng	3
	Lưu ý khi bảo trì	3
2	Tính năng sản phẩm	4
3	Chi tiết sản phẩm	4
4	Cách sử dụng	5
	Lắp đặt sản phẩm	5
	Vận hành	6
	Sạc pin	6
5	Bảo dưỡng	7
	Phương pháp vệ sinh	8
6	Hướng xử lý lỗi	8
7	Thông số kỹ thuật	9

8	Hướng Dẫn Bảo Hành và Dịch Vụ	10
	Bảo Hành và Dịch Vụ	11
	Phiếu Bảo Hành	12
9	Danh sách đóng gói	12

2 Thông Tin Quan Trọng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và bảo quản cẩn thận.

Mô tả biểu tượng

Các nội dung dưới đây cần tuân thủ để tránh gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản.

• Các biểu tượng dưới đây được dùng để minh họa cho những điều bạn cần tuân theo khi sử dụng thiết bị.

BIỂU TƯỢNG CẤM

BIỂU TƯỢNG LÀM THEO CHỈ DẪN

Những Người Không Phù Hợp Để Sử Dụng

 Những đối tượng sau nên cẩn trọng khi sử dụng.

Những người đang điều trị y tế hoặc có các tình trạng dưới đây nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên viên vật lý trị liệu trước khi sử dụng.

- Người đang mang thai hoặc chuẩn bị sinh con
- Người có thân nhiệt cao hơn 38°C
- Người có làn da không nhạy cảm với nhiệt độ
- Người từng bị bỏng do hạ thân nhiệt
- Người cảm thấy khó chịu

 Các nhóm/điều kiện sau đây bị cấm sử dụng:

Những người được bác sĩ khuyến cáo không nên tập thể dục hoặc kéo giãn. Ví dụ: huyết khối, phình động mạch nghiêm trọng, u tĩnh mạch cấp tính, viêm da và các bệnh nhiễm trùng da khác. Vì thiết bị này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh, nên không được sử dụng.

- Người không thể tự biểu đạt ý muốn hoặc không thể tự vận hành thiết bị.
- Trẻ em dưới 6 tuổi không được sử dụng sản phẩm này. Trẻ từ 6 đến 14 tuổi cần sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.
- Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, hồi hộp hoặc các phản ứng bất thường khác, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.
- Thiết bị có bề mặt phát nhiệt, những người không nhạy cảm với nhiệt nên thận trọng khi sử dụng.

Lưu ý khi sử dụng

-  Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo sản phẩm còn nguyên vẹn. Nếu có bất kỳ hư hỏng nào, dù lớn hay nhỏ, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.
-  Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra dung lượng pin và đảm bảo pin đủ để sử dụng.
-  Ngừng sử dụng ngay nếu thiết bị không hoạt động được hoặc bạn cảm thấy khó chịu. Đồng thời, hãy tháo ngăn chứa pin ra.
-  Hãy tháo ngăn chứa pin khi thiết bị không được sử dụng.
-  Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc chế lại sản phẩm.
-  Không kéo lê hoặc đâm chọc sản phẩm bằng dao hoặc vật sắc nhọn.

- ❗ Thiết bị có bề mặt tỏa nhiệt. Những người không nhạy cảm với nhiệt nên cẩn thận khi sử dụng thiết bị này.
- ❗ Thiết bị không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần bị suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức – trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn.
- ❗ Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị.
- ❗ Nếu dây nguồn bị hỏng, phải thay thế bằng loại dây đặc biệt hoặc cụm dây do nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ cung cấp.
- ❗ Thiết bị chỉ được cấp nguồn bằng điện áp an toàn cực thấp phù hợp với thông số trên thiết bị.
- ❗ Trước khi vứt bỏ sản phẩm, cần tháo pin theo các bước sau:
 - Tháo ngăn chứa pin;
 - Tháo các dây bên trong và lấy pin ra;
 - Ngắt nguồn điện trước khi tháo pin;
 - Pin cần được xử lý an toàn, đúng cách.

Lưu ý về vị trí sử dụng

- ⊘ Tránh xa lò sưởi và không sử dụng với chăn điện hoặc thiết bị sưởi điện.
- ⊘ Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt.
- ⊘ Không sử dụng gần bồn tắm, vòi sen, bồn rửa hoặc các vật dụng có độ ẩm cao.

Lưu ý về vị trí sử dụng

- ❗ Ngăn chứa pin và mặt nạ mắt phải được giữ riêng nếu thiết bị không sử dụng trong thời gian dài.


- ⊘ Không được làm rơi thiết bị hoặc ngăn chứa pin.
- ⊘ Hai người không được dùng chung một thiết bị.
- ⊘ Không xịt nước lên sản phẩm hoặc rửa bằng nước.
- ⊘ Không sử dụng ở nơi có nhiệt độ phòng cao hơn 35°C hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp.
- ⊘ Không sử dụng trong phòng tắm hoặc nơi có độ ẩm cao.
- ❗ Hãy kiểm tra công tắc trước khi sử dụng nếu thiết bị đã không được dùng trong thời gian dài.
- ⊘ Không sử dụng dầu bay hơi, dung môi, cồn, chất tẩy mạnh hoặc thuốc tẩy để vệ sinh thiết bị.

2 Tính năng sản phẩm

Sản phẩm được làm nóng bằng tấm sưởi ở nhiệt độ ổn định. Với chế độ massage rung, thiết bị giúp tăng cường lưu thông máu quanh vùng mắt và giảm mỏi mắt. Thiết bị có thể giảm bọng mắt và nhanh chóng làm dịu mệt mỏi khi sử dụng cùng với túi đá lạnh.

3 Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm giúp thư giãn các mô mềm trên cơ thể nhờ lực tác động tần số cao, giúp giảm căng cơ và làm dịu cảm giác đau, mỏi sau khi vận động. Có thể thay đổi đầu massage khác nhau để phù hợp với từng nhóm cơ. Thiết bị nhỏ gọn và dễ mang theo.

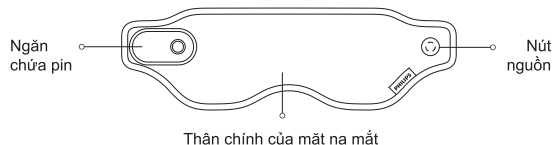


4 Cách sử dụng

Cài đặt sản phẩm


Phương pháp 1: Nguồn điện từ ngăn chứa pin

Gắn ngăn chứa nguồn điện vào thân chính của mặt nạ mắt theo hướng như trong hình.

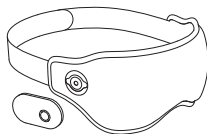


Phương pháp 2: Cắm trực tiếp vào usb hoặc nguồn điện di động

Sản phẩm được kết nối với dây nguồn nam châm, và đầu còn lại được cắm vào thiết bị cấp nguồn USB.

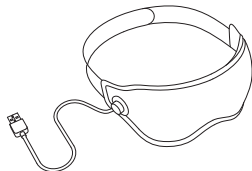

Để chườm lạnh, vui lòng đặt túi đá vào ngăn đá tủ lạnh trong 10 phút rồi lấy ra. Sau đó, đặt túi đá vào mặt nạ mắt để sử dụng mà không cần bật thiết bị.

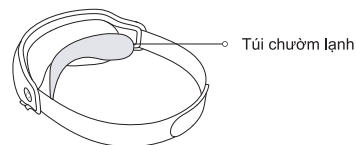


Hoạt động

- (1) Giữ nút ở bên phải mặt nạ mắt trong 2 giây để khởi động và thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động;
- (2) Khi bạn cảm thấy rung, hãy đeo nó vào. Chế độ massage mặc định là (chườm ấm + rung). Nhấn nút để chuyển từ chế độ massage sang chế độ chườm ấm (chỉ làm nóng) và thiết bị sẽ rung hai lần để báo hiệu;
- (3) Thiết bị sẽ tự động tắt sau khi hoạt động 18 phút cho mỗi cấp độ. Trong trường hợp muốn dừng, vui lòng giữ nút trong 2 giây để tắt.

Sạc pin

- (1) Mất khoảng 30 phút để sạc ngăn chứa pin. Sau khi sạc, vui lòng rút cáp sạc ra kịp thời.

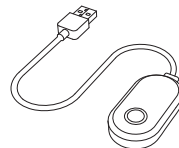

❗ Trong khi sạc, vui lòng tháo ngăn chứa pin ra khỏi thiết bị.

(2) Vòng đèn của ngăn chứa pin có thể được chia thành 4 phần. Khi pin kết nối với thiết bị, đèn sẽ sáng. Các điều kiện ánh sáng khác nhau tương ứng với dung lượng pin khác nhau:



Một phần
0-25%



Hai phần
26-50%



Ba phần
51-75%



Tất cả
76-100%

⚠ Khi pin yếu, đèn của ngăn chứa pin sẽ nhấp nháy cho đến khi thiết bị ngừng hoạt động.

5 Bảo dưỡng

- Cần thực hiện các biện pháp chống ẩm và chống ô nhiễm.
- Sau khi sử dụng, vui lòng đặt sản phẩm ở nơi an toàn. Không đặt bất kỳ vật nặng nào lên sản phẩm để tránh làm hỏng sản phẩm.
- Trong trường hợp hỏng hóc, vui lòng liên hệ với kỹ thuật viên để sửa chữa và không tự ý tháo dỡ sản phẩm khi chưa được phép.
- Vui lòng giữ sản phẩm ở những nơi thông thoáng, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và bảo vệ sản phẩm khỏi sự ăn mòn của khí và chất lỏng ăn mòn.
- Cơ sở chống sốc đơn giản đã được trang bị, phù hợp cho vận chuyển bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy. Trong quá trình vận chuyển, tránh mưa, tuyết, lật ngược và va đập.
- Vui lòng giữ sản phẩm ở những nơi xa tầm tay trẻ em.

Phương pháp vệ sinh

- (1) Bụi bẩn trên bề mặt có thể được lau sạch bằng vải sạch.
- (2) Vui lòng sử dụng vải ướt thấm dung dịch tẩy rửa trung tính để lau nhẹ nhàng bụi bẩn sâu.
- (3) Đảm bảo rằng nước sẽ không lọt vào bên trong sản phẩm.
- (4) Giữ khô sản phẩm một cách tự nhiên.

• Sau khi sử dụng, hãy cất giữ ở những nơi tránh ánh nắng trực tiếp hoặc ẩm ướt. Nếu bạn không sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng lau sạch bụi bẩn và cất vào túi đựng để bảo vệ khỏi bụi.

6 Hướng xử lý lỗi

Chương này liệt kê các câu hỏi thường gặp nhất về sản phẩm này. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, vui lòng liên hệ với đường dây nóng dịch vụ hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền trong khu vực của bạn.

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Đèn khoang pin không sáng	• Pin quá yếu • Khoang pin và mặt nạ mắt không được lắp đúng vị trí	• Vui lòng sạc và kết nối kịp thời • Tháo khoang pin và lắp lại
Mặt nạ mắt không thể làm nóng	• Sản phẩm chưa được bật • Thời gian sử dụng sản phẩm quá lâu	• Nhấn giữ công tắc để bật • Khởi động lại
Khoang pin không thể sạc	• Cáp sạc hoặc bộ chuyển đổi bị hỏng • Cổng sạc bị bẩn	• Thay cáp sạc hoặc bộ chuyển đổi • Vệ sinh cổng sạc

Thông báo:
Nếu không thể khắc phục lỗi hoặc sản phẩm vẫn không hoạt động ổn định, vui lòng liên hệ nhân viên dịch vụ hậu mãi của Philips. Tuyệt đối không tự ý tháo dỡ hoặc cố gắng sửa chữa sản phẩm.

7 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy Massage Mắt		
Mã sản phẩm	PPM2301	Dung lượng pin	600mAh
Điện áp sạc	5V==	Kích thước sản phẩm	270x85x60mm
Điện áp hoạt động	3.7V==	Trọng lượng sản phẩm	Khoảng 70g
Công suất hoạt động	6W	Nhiệt độ chườm ấm	45±5°C
Dòng sạc	1A		

8 Hướng Dẫn Bảo Hành và Dịch Vụ

Bảo hành và Dịch vụ

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng truy cập trang web www.philips.com/support hoặc liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng tại quốc gia/khu vực của bạn. Nếu tại quốc gia/khu vực của bạn không có trung tâm chăm sóc khách hàng, vui lòng liên hệ với nhà phân phối tại địa phương. Trong vòng hai năm kể từ ngày mua hàng, bạn sẽ được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm bị hư hỏng do lỗi sản xuất hoặc hư hỏng các linh kiện trong điều kiện sử dụng bình thường, được xác nhận bởi kỹ thuật viên bảo trì của chúng tôi.

Lưu ý: Bảo hành không áp dụng cho các linh kiện tiêu hao thường xuyên phải thay thế, thiết bị phụ trợ, chi phí vận chuyển, và dịch vụ đến tận nơi. Vui lòng cung cấp hóa đơn mua hàng cho nhân viên kỹ thuật khi cần bảo hành.

Phiếu Bảo Hành

Model sản phẩm		Tên khách hàng	
Nhà bán hàng		Số điện thoại	
Ngày mua hàng		Mã số sản phẩm	
Địa chỉ khách hàng			
Nội dung bảo trì	Ngày	Kỹ thuật viên	

9 Danh Sách Đóng Gói

Thiết bị chính	1×	Cáp sạc USB	1×
Ngăn chứa pin	1×	Túi đựng sản phẩm	1×
Túi đá lạnh	1×	Sách hướng dẫn sử dụng	1×