



Ghé thăm chúng tôi tại:

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

©2024 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiến bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A Tháng 1 năm 2025



PHILIPS

Súng Massage

Súng Massage
Cầm Tay

PPM7307



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mục Lục

1	Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng	1	6	Hướng xử lý lỗi	10
	Mô tả biểu tượng	1			
	Đối tượng phù hợp	1	7	Thông số kỹ thuật	12
	Lưu ý khi sử dụng	2			
	Các biện pháp bảo trì an toàn	3	8	Hướng dẫn dịch vụ bảo hành sản phẩm	13
				Bảo hành và dịch vụ	13
				Phiếu bảo hành	13
2	Tính năng sản phẩm	3	9	Danh sách đóng gói	14
3	Chi tiết sản phẩm	4			
4	Hướng dẫn sử dụng	5			
	Lưu ý trước khi sử dụng	5			
	Lắp đặt các đầu massage	5			
	Thao tác sử dụng	6			
	Hướng dẫn sạc	7			
	Mô tả đèn báo	8			
5	Bảo trì sản phẩm	9			
	Vệ sinh	9			
	Phương pháp xử lý pin	9			

1 Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và bảo quản cẩn thận trước khi sử dụng sản phẩm. Bạn có thể truy cập tài liệu tại www.philips.com

Mô tả biểu tượng

Để tránh nguy cơ chấn thương cá nhân hoặc hư hỏng thiết bị, hãy tuân thủ các nội dung sau:

- Các biểu tượng dưới đây được sử dụng để minh họa những điều cần lưu ý khi sử dụng thiết bị.

BIỂU TƯỢNG CẤM

BIỂU TƯỢNG LÀM THEO CHỈ DẪN

Đối tượng bị hạn chế hoặc không được sử dụng

 Những người sau đây cần thận trọng khi sử dụng sản phẩm:

- Người bị rối loạn cảm giác da.
- Người có cấy ghép kim loại, silicon, nhựa do phẫu thuật chỉnh hình hoặc gãy xương.
- Người có dị chứng sau tai nạn giao thông hoặc chấn thương tương tự.
- Người có máy tạo nhịp tim hoặc thiết bị y tế điện tử cấy ghép.
- Người có khối u ác tính.
- Người mắc bệnh tim.
- Phụ nữ đang mang thai hoặc mới sinh.
- Người bị rối loạn cảm giác do tiểu đường.
- Người có vết thương chưa lành.
- Người bị chấn thương cơ.
- Người có thể trạng yếu, cần nghỉ ngơi hoặc dễ bị kích thích.
- Người bị loãng xương, gãy xương nặng, bong gân, đau cơ, đau đầu cấp tính.
- Người có triệu chứng sốt.
- Người đang bị viêm cấp tính, mệt mỏi, ớn lạnh, huyết áp không ổn định.
- Những người đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Lưu ý khi sử dụng

- ❗ Sản phẩm có chế độ hẹn giờ sử dụng một lần là 10 phút. Không sử dụng quá 10 phút mỗi lần. Sau khi sử dụng, để máy nghỉ ít nhất 30 phút trước khi dùng tiếp nhằm kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
- ❗ Không sử dụng khi mặc quần áo quá dày.
- ❗ Không nên lạm dụng chức năng massage.
- ❗ Ngưng sử dụng ngay nếu bạn cảm thấy đau lưng, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh hoặc có bất kỳ phản ứng bất thường nào trong quá trình sử dụng.
- ❗ Tránh xa chất lỏng hoặc nguồn nhiệt, đảm bảo cổng sạc khô ráo, không được sử dụng thiết bị khi đang sạc.
- ❗ Rút phích cắm ngay sau khi sạc xong.
- ❗ Thiết bị có bề mặt nóng. Người có khả năng cảm nhận nhiệt kém cần thận trọng khi sử dụng.
- ❗ Thiết bị không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm về thể chất, cảm giác, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi có người giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng và chịu trách nhiệm về an toàn cho họ.
- ❗ Trẻ em cần được giám sát để không chơi đùa với thiết bị.
- ❗ Nếu dây nguồn bị hỏng, phải thay bằng loại dây chuyên dụng hoặc cụm dây thay thế do nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo hành cung cấp.
- ❗ Chỉ được cấp nguồn điện áp siêu thấp an toàn đúng theo thông số ghi trên thiết bị.
- ❗ Ngưng sử dụng ngay nếu thiết bị bị lỗi hoặc hoạt động bất thường.
- ❗ Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra thiết bị theo hướng dẫn trong sách này để đảm bảo hoạt động bình thường.
- ⊘ Không sử dụng khi đang ngủ.
- ⊘ Không sử dụng với chân hoặc phủ lên thiết bị.
- ⊘ Nghiêm cấm nằm hoặc ngồi đè lên thiết bị.
- ⊘ Không để thiết bị chịu tác động hoặc lực nặng bất thường.
- ⊘ Không sử dụng trong nhà tắm hoặc không gian ẩm ướt.

- ⊘ Không tự ý tháo rời, chỉnh sửa hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị.
- ⊘ Không sử dụng trong các trường hợp sau:
 - Khi cảm thấy quá mệt mỏi
 - Trong vòng 1 giờ trước hoặc sau khi ăn
 - Sau khi uống rượu


Các biện pháp bảo trì an toàn

- ❗ Khi vệ sinh, đảm bảo tắt nguồn thiết bị.
- ❗ Vui lòng xử lý bao bì sản phẩm đúng cách và để xa tầm tay trẻ nhỏ.
- ❗ Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy kiểm tra trước khi sử dụng lại để đảm bảo công tắc và các bộ phận khác hoạt động bình thường.
- ⊘ Khi vệ sinh, không dùng dầu bay hơi, chất pha loãng, cồn, chất tẩy mạnh có tính kiềm hoặc thuốc tẩy.
- ⊘ Kiểm tra thường xuyên tình trạng hao mòn hoặc hư hỏng của thiết bị. Nếu phát hiện hỏng hóc hoặc nghi ngờ thiết bị bị sử dụng sai cách, hãy liên hệ trung tâm bảo hành trước khi tiếp tục sử dụng.
- ⊘ Sản phẩm có chứa pin lithium – không được tháo rời, sửa đổi, ngâm bộ điều khiển vào nước hoặc đốt, vì có thể gây hư hại nghiêm trọng.
- ⊘ Không cất giữ thiết bị trong tầm tay trẻ nhỏ. Không để trẻ sử dụng hoặc điều khiển thiết bị, tránh gây thương tích.
- ⊘ Không làm hỏng, chỉnh sửa, bẻ mạnh hoặc kéo dây sạc. Tránh để vật nặng đè lên dây sạc hoặc bóp chặt dây sạc.

2 Tính năng sản phẩm

Sản phẩm này sử dụng rung tần số cao và hai chế độ nhiệt để massage đa điểm trên các nhóm cơ trên cơ thể, giúp thư giãn cơ bị căng cứng. Khi sử dụng với các đầu massage khác nhau, máy có thể massage được nhiều vùng trên cơ thể. Sản phẩm đi kèm túi đựng tiện lợi, dễ dàng mang theo khi đi công tác hoặc du lịch.

3 Chi tiết sản phẩm

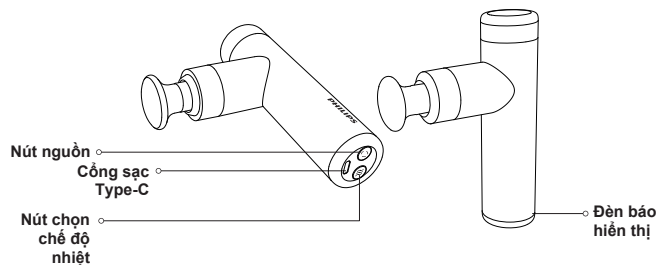

 Đầu massage hợp kim Thích hợp dùng để thư giãn các nhóm cơ khác nhau	 Đầu massage phẳng Thích hợp dùng để thư giãn các cơ lớn như cánh tay, lưng, mông và đùi và bắp chân
 Đầu massage nhẵn Thích hợp để tác động sâu vào mô cơ, giúp giảm đau nhức hiệu quả	 Đầu massage hình chữ U Thích hợp để massage tập trung vào các điểm đau như vùng vai, cổ và phía sau cổ chân

4 Hướng dẫn sử dụng


Lưu ý trước khi sử dụng:

1. Kiểm tra thiết bị và phụ kiện đi kèm có đầy đủ không.
2. Tháo bỏ các vật trang sức và phụ kiện để không ảnh hưởng đến quá trình massage.
3. Gắn đầu massage vào đúng vị trí.


Lắp đặt các đầu massage

Tùy theo nhu cầu massage, chọn đầu massage phù hợp và lắp vào lỗ tròn ở phía trước thân máy.

Như hình minh họa bên dưới, khi lắp đúng sẽ hiển thị như hình:

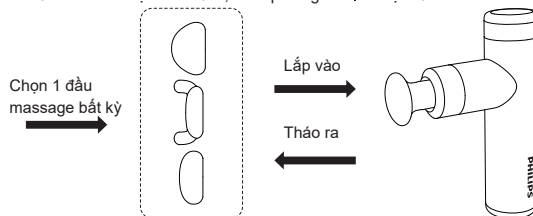

Như hình minh họa bên dưới:

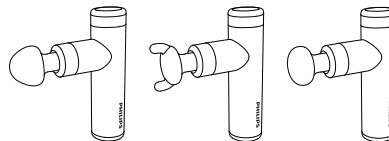


Thao tác sử dụng

1. Bật nguồn/ Chế độ chờ: Nhấn và giữ nút nguồn trong 1,5 giây để khởi động thiết bị. Khi khởi động, thiết bị sẽ vào chế độ chờ (trong chế độ này, thiết bị sẽ tự động tắt sau 1 phút không sử dụng). Ở trạng thái này, thiết bị chưa rung hay làm nóng, đèn báo sẽ sáng màu xanh dương.
2. Khi thiết bị đang bật, nhấn nút nguồn để chuyển đổi giữa các mức độ rung từ cấp 1 đến 4.
3. Khi thiết bị đang bật, nhấn nút làm nóng để chuyển đổi giữa các mức nhiệt, gồm 2 cấp độ:
-Cấp độ 1: Đèn báo sáng màu hồng
-Cấp độ 2: Đèn báo sáng màu đỏ
4. Trong quá trình sử dụng, đèn báo sẽ tự động chuyển màu dựa trên chế độ phản hồi áp lực, biểu thị lực nhấn mà người dùng tác động lên thiết bị.
5. Ở bất kỳ chế độ nào, nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để tắt thiết bị.
6. Thiết bị mặc định tự động tắt sau 10 phút. Nếu muốn dừng giữa chừng, nhấn giữ nút nguồn 1 giây để tắt máy.


- ❗ Vui lòng sử dụng thiết bị đúng với tình trạng sức khỏe của bản thân. Tránh dùng lực quá mạnh để tránh chấn thương cơ.
- ❗ Khi đầu massage bị kẹt và ngừng hoạt động, đây là chức năng bảo vệ nhằm tránh vận hành bất thường. Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ. Có thể khởi động lại bằng cách nhấn nút nguồn.
- ❗ Khi hệ thống phản hồi áp lực hiển thị đèn đỏ, không nên tiếp tục nhấn mạnh. Thiết bị sẽ kích hoạt chế độ bảo vệ và tắt tạm thời, sau đó tự khởi động lại ở mức rung 1 sau 5 giây. Lưu ý: Khi đang làm nóng, sẽ không có phản hồi áp lực, chỉ có phản hồi khi bị kẹt.
- ❗ Trong trường hợp thiết bị ngừng hoạt động do lực nhấn quá mạnh, hãy chờ ít nhất 5 giây trước khi khởi động lại.

Hướng dẫn sạc

1. Không sạc thiết bị khi đặt đứng, để tránh ngã đổ gây hư hỏng hoặc chấn thương.

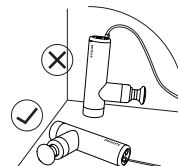

2. Trước lần sử dụng đầu tiên, hãy sạc thiết bị khoảng 4 giờ để đảm bảo pin được sạc đầy.
3. Kết nối cáp sạc Type-C đi kèm vào cổng sạc của thiết bị và ổ điện.
4. Khi đang sạc, đèn báo sẽ nhấp nháy màu xanh dương (hiệu ứng hô hấp). Khi sạc đầy, đèn sẽ chuyển sang màu xanh lá.
5. Nếu đèn báo nhấp nháy màu đỏ, điều đó có nghĩa là pin còn dưới 10%. Hãy sạc thiết bị kịp thời.
6. Có thể sạc thiết bị bất cứ lúc nào, không phụ thuộc vào mức pin hiện tại.

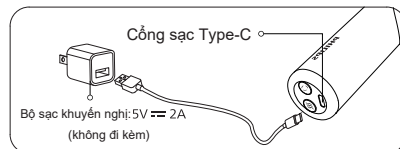

Mô tả đèn báo

1. Nhấn và giữ nút nguồn trong 1,5 giây để bật thiết bị. Sau khi bật nguồn, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ, chưa hoạt động làm nóng hay rung. Nhấn nút nhiệt để chuyển đổi mức nhiệt, và nhấn nút nguồn để chuyển đổi mức độ rung. Trạng thái đèn báo hiển thị như sau:

Đèn báo	Trạng thái	Mô tả
Thanh đèn báo	Đèn xanh dương	Mức độ rung từ 1 - 4
Thanh đèn báo	Đèn hồng	Mức nhiệt 1
Thanh đèn báo	Đèn đỏ	Mức nhiệt 2

2. Trong quá trình sử dụng, đèn báo sẽ tự động chuyển sang chế độ lực tác động, thay đổi màu để hiển thị lực tác động của người dùng lên thiết bị. Trạng thái đèn báo được hiểu như sau:

Đèn báo	Trạng thái	Mô tả
Thanh đèn báo	Đèn xanh dương	Lực tác động từ 0–5kg
Thanh đèn báo	Đèn hồng	Lực tác động từ 5–7kg
Thanh đèn báo	Đèn đỏ	Lực tác động từ 7–8kg

- ❗ Khi đèn báo lực tác động hiển thị đèn đỏ, không nên tiếp tục dùng lực mạnh hơn. Nếu không, thiết bị sẽ tự tắt bảo vệ và quay lại chế độ chờ ở mức 0 sau 5 giây.
- Lưu ý: Khi chế độ làm nóng được kích hoạt, sẽ không có phản hồi lực, chỉ có phản hồi khi thiết bị bị kẹt.

3. Đèn báo trạng thái cũng sẽ hiển thị mức pin hiện tại hoặc trạng thái sạc thông qua màu sắc như sau:

Đèn báo	Trạng thái	Mô tả
Thanh đèn báo	Đèn đỏ nhấp nháy	Mức pin < 10%
Thanh đèn báo	Đèn xanh dương nhấp nháy	Đang sạc
Thanh đèn báo	Đèn xanh lá	Đã sạc đầy

5 Bảo trì sản phẩm

Vệ sinh

- Vệ sinh bề mặt thiết bị bằng khăn ẩm, sau đó lau khô bằng khăn mềm.
- Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thông thoáng, tránh khi ăn mòn.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy vệ sinh và đóng gói thiết bị, đồng thời nên sạc mỗi tháng 1 lần.
- Thiết bị phù hợp để vận chuyển bằng ô tô, tàu lửa, tàu thủy và máy bay. Trong quá trình vận chuyển, cần cố định thiết bị chắc chắn để tránh rung lắc, va đập, lăn hoặc rơi. Thiết bị nên được đặt hướng lên trên và tránh nước mưa.
- Vì lý do bảo vệ môi trường, không vứt bỏ toàn bộ thiết bị. Hãy phân loại và xử lý các bộ phận theo phương pháp xử lý phù hợp.

- ❗ Khi bảo trì thiết bị, luôn rút dây sạc ra, nhưng không được rút khi tay đang ướt.

Phương pháp xử lý pin

Pin lithium-ion được sử dụng trong sản phẩm này là tài nguyên quý giá có thể tái chế. Khi pin hết, hãy tháo pin lithium-ion và giao cho cơ sở chuyên nghiệp có thể thu gom và xử lý pin tái sạc.

Cách tháo pin:

Dùng dụng cụ cạy mở đáy thiết bị để tháo pin ra.

- Trước khi vứt bỏ thiết bị, phải tháo pin ra
- Đảm bảo thiết bị đã tắt nguồn hoàn toàn trước khi tháo pin
- Pin cần được xử lý an toàn

6 Hướng xử lý lỗi

Trang này liệt kê các lỗi thường gặp nhất của sản phẩm. Nếu lỗi bạn gặp phải không có trong các bảng dưới đây, vui lòng gọi đến hotline dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền tại khu vực của bạn.

Mô tả lỗi	Hướng xử lý
Đầu massage bị trượt ra hoặc rơi ra	Kiểm tra xem đầu massage đã được lắp đúng vị trí chưa.
Không khởi động được	Kiểm tra pin có đủ điện không (sạc liên tục hơn 4 giờ nếu đã lâu không dùng).
Không sạc được	1. Đầu massage ngừng hoạt động do bị kẹt.
	2. Kiểm tra điện áp và dòng điện của bộ sạc.
Dừng đột ngột sau khi hoạt động liên tục 10 phút	Đây là tính năng bảo vệ thiết bị khi dùng quá lâu, chuyển sang chế độ chờ. Nhấn giữ nút nguồn để khởi động lại. Đây là hiện tượng bình thường.
Đầu massage không hoạt động do bị kẹt	Đây là tính năng bảo vệ thiết bị khi đầu massage bị kẹt, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ. Nhấn giữ nút nguồn để khởi động lại. Đây là hiện tượng bình thường.
Sử dụng đúng cách sản phẩm sẽ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị. Khuyến nghị: - Không quăng, ném hay làm rơi thiết bị khi sử dụng. - Không dùng liên tục quá 10 phút/lần. Bảo quản nơi khô ráo, tránh môi trường ẩm ướt. - Nếu lâu ngày không sử dụng, nên sạc pin 1 lần mỗi tháng.	

Sau một thời gian dài không sử dụng, vui lòng kiểm tra lại chức năng của sản phẩm trước khi sử dụng		
Kiểm tra định kỳ	Kiểm tra các lỗi sau	Khi phát hiện các lỗi như trên, ngưng sử dụng thiết bị ngay lập tức và ngắt nguồn điện để tránh sự cố. Vui lòng gửi thiết bị đến trung tâm bảo hành của chúng tôi.
	• Dây sạc quá nóng • Dây sạc bị xước, biến dạng hoặc có mùi khét • Sản phẩm không hoạt động bình thường sau khi bật • Sản phẩm có hiện tượng bất thường khác	

Chú ý:

Nếu không thể khắc phục lỗi hoặc sản phẩm vẫn không hoạt động bình thường, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. Tuyệt đối không tự ý tháo lắp hoặc sửa chữa sản phẩm.

7 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Súng Massage Cẩm Tay
Mã sản phẩm	PPM7307
Điện áp hoạt động	11.1V 
Công suất hoạt động	10W
Điện áp sạc	5V 
Dòng điện sạc	2A
Dung lượng pin	1100mAh
Kích thước sản phẩm	144*107*36mm
Trọng lượng sản phẩm	394g

8 Hướng dẫn dịch vụ bảo hành sản phẩm

Bảo hành và dịch vụ

Chính sách bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng truy cập www.philips.com/-support hoặc liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng tại quốc gia/ khu vực của bạn. Nếu không có trung tâm dịch vụ khách hàng tại quốc gia /khu vực của bạn, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương.

Trong vòng hai (02) năm kể từ ngày mua hàng, bạn sẽ được hưởng dịch vụ bảo hành miễn phí đối với bất kỳ hư hỏng nào do lỗi trong quá trình sản xuất, hoặc hư hỏng linh kiện trong điều kiện sử dụng thông thường và được xác nhận bởi kỹ thuật viên bảo hành của chúng tôi.

Dịch vụ bảo hành không bao gồm các phụ kiện cần thay thế định kỳ, thiết bị phụ trợ, chi phí vận chuyển và dịch vụ tại nhà. Vui lòng xuất trình hóa đơn mua hàng khi yêu cầu dịch vụ.

Việt Nam

Chăm sóc khách hàng: +84-909800829

Email: Philips.massager.VN@orrohome.vn

Phiếu bảo hành

Mã sản phẩm		Tên khách hàng	
Nơi mua hàng		Điện thoại	
Ngày mua hàng		Số sê-ri	
Dịch vụ bảo hành		Địa chỉ khách hàng	
Nội dung bảo hành	Ngày bảo hành	Nhân viên bảo hành	

9 Danh sách đóng gói

Danh sách đóng gói PPM7307			
Súng Massage	1×	Đầu massage	4× (Đầu massage có chức năng nhiệt không thể tháo rời)
Túi vải đi kèm	1×		
Hướng dẫn sử dụng	1×	Dây sạc Type C	1×
Phong bì	1×	Hướng dẫn sử dụng nhanh	1×