



halio

Máy tắm nước 2 bình thay thế Halio UltraClean Express Hydro Floss

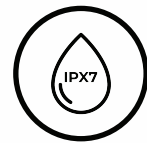

Chống nước toàn thân IPX7

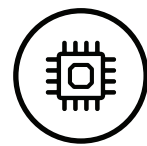

Chức năng ghi nhớ



Đầu tắm 360°




2 bình chứa nước
có thể tháo rời

halio-sonic.com

1

Tổng quan máy

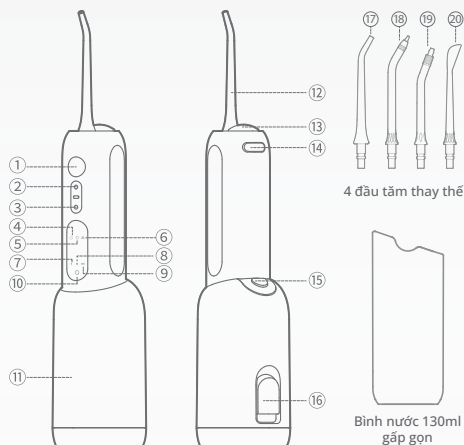

1. Nút nguồn
2. Hiển thị thay đổi chế độ
3. Hiển thị áp suất
4. Chế độ Standard
5. Chế độ Soft
6. Chế độ Pulse
7. Áp lực nước nhẹ
8. Áp lực nước vừa
9. Áp lực nước mạnh
10. Đèn báo pin

11. Bình chứa nước
12. Đầu phun nước
13. Nút thay đầu phun nước
14. Cổng cắm sạc
15. Nút thay bình chứa nước
16. Nắp đậy bình chứa nước
17. Đầu tiêu chuẩn
18. Đầu phun nha chu
19. Đầu chỉnh nha
20. Đầu làm sạch lưới

2

Cách sử dụng

Bước 1: Lắp đầu phun và điều chỉnh đến khi nghe tiếng "click"

Bước 2: Cho nước vào đầy bình chứa nước và đóng chặt

Bước 3: Nhấn nút trên để chọn chế độ theo thứ tự:

- Standard mode: Làm sạch hiệu quả, vệ sinh hằng ngày, phù hợp cho hầu hết mọi người
- Soft mode: Áp lực nhẹ nhàng, phù hợp cho răng nhạy cảm
- Pulse mode: Làm sạch sâu và massage nướu răng

Bước 4: Nhấn nút dưới chọn mức áp lực nước với 3 mức áp lực nước:

- Nhẹ
- Vừa
- Mạnh

Bước 5: Đặt đầu phun vào khe răng, vị trí sát chân nướu, khép hờ môi để tránh văng nước

Bước 6: Nhấn nút nguồn và bắt đầu làm sạch toàn bộ kẽ răng và chân nướu

Bước 7: Nhấn nút nguồn lần nữa để tắt máy

Lưu ý:

Nên sử dụng nước ấm dưới 40°C.

Không thêm kem đánh răng hoặc các chất lỏng khác vào bình chứa nước, tránh làm tắc ống nước hoặc làm hỏng bình chứa nước.

Đối với người mới sử dụng lần đầu hoặc người có nướu nhạy cảm, nên bắt đầu với áp suất thấp nhất và tăng áp suất dần sau vài tuần.