


halio


Máy ánh sáng đỏ Halio Hỗ trợ tăng sinh Collagen Halio Red Light Therapy Device




Công nghệ EMS

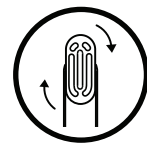

Đầu xoay 90°

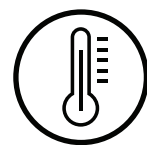

Nhiệt ấm nhẹ nhàng

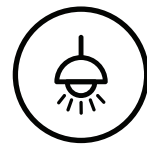


Ánh sáng đỏ

halio-sonic.com

1

Tổng quan máy

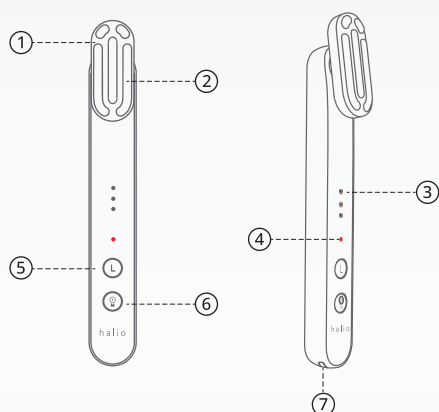

1. Ánh sáng đỏ
2. Đầu máy
3. Đèn báo mức độ xung điện
4. Đèn báo chế độ

5. Nút điều chỉnh mức độ xung điện EMS
6. Nút nguồn/ Nút thay đổi chế độ
7. Cổng sạc

2

Cách sử dụng

- Bước 1:** Rửa mặt với sữa rửa mặt
- Bước 2:** Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da yêu thích như serum, lotion, v.v
- Bước 3:** Hãy tháo tất cả các phụ kiện và đồ trang sức bằng kim loại trước khi sử dụng máy
- Bước 4:** Giữ nút nguồn M trong 3 giây để bật thiết bị
- Bước 5:** Nhấn nút nguồn lần nữa để chọn 1 trong 3 chế độ:
- SOOTHING (Đèn màu xanh) - dùng tần số EMS nhỏ nhất 10Hz kết hợp với ánh sáng đỏ, nhiệt nóng 42°C và rung sóng âm sonic giúp thư giãn cơ mặt
 - ACTIVATION (Đèn màu đỏ) - dùng tần số EMS biến thiên thấp kết hợp với ánh sáng đỏ, nhiệt nóng 42°C và rung sóng âm sonic tăng cường sức sống cơ bắp và cải thiện tình trạng tổng thể của khuôn mặt
 - CONTRACTION (Đèn màu tím) - dùng tần số EMS biến thiên cao kết hợp với ánh sáng đỏ, nhiệt nóng 42°C và rung sóng âm sonic kích thích cơ bắp sâu từ đó làm đường quai hàm sắc nét hơn
- Bước 6:** Nhấn nút điều chỉnh cường độ EMS chữ L. Mỗi chế độ sẽ có ba cường độ EMS. Nếu là lần đầu sử dụng hoặc da nhạy cảm, nên chọn cấp độ 1. Đối với da bình thường, bạn có thể sử dụng cấp độ 2. Để đạt hiệu quả nhanh chóng và nâng cơ tức thì, bạn nên chọn cấp độ 3
- Bước 7:** Di chuyển đầu máy đến các vùng trên khuôn mặt. Nhắm mắt khi sử dụng máy ở vùng quanh mắt. Để có kết quả tốt hơn, vào mùa đông, bạn nên sử dụng thiết bị trên tay trước, để thiết bị nóng lên trước khi sử dụng trên mặt
- Bước 8:** Điều chỉnh đầu thiết bị với các góc độ phù hợp cho các khu vực khác nhau của khuôn mặt, chuyển đổi giữa trạng thái "I" và "T"
- CẢNH BÁO:** Chú ý đến hướng mũi tên quay trên sản phẩm. Quay đầu theo chiều kim đồng hồ từ trạng thái "I" sang trạng thái "T" và ngược chiều kim đồng hồ từ trạng thái "T" sang trạng thái "I". KHÔNG quay đầu theo hướng ngược lại, điều này sẽ làm hỏng đầu máy
- Bước 9:** Hãy chia khuôn mặt thành 3 khu vực: trán, mặt phải, mặt trái. Vào buổi sáng, hãy sử dụng máy trên trán 2 phút, mặt phải 2 phút và mặt trái 2 phút. Vào buổi tối, hãy sử dụng thiết bị trên trán 3 phút, mặt trái 3 phút, và mặt phải 3 phút
- Bước 10:** Giữ nút nguồn M trong 3 giây để tắt máy
- Bước 11:** Sử dụng kem dưỡng ẩm để khoá các dưỡng chất lại