

halio

Máy Triệt Lông Lạnh Cá Nhân Halio IPL Cooling Hair Removal Device



Công nghệ IPL

Loại bỏ nan lông, trẻ hóa da



Hệ thống làm lạnh


Giảm đau rất hiệu quả

25
regime
temperature

2 chế độ &

5 cường độ triệt

Phù hợp cho nhiều nhu cầu

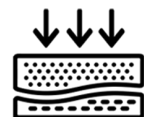


999,999 lần xung

Tuổi thọ lên đến 30 năm

halio-sonic.com

1 Tổng quan máy

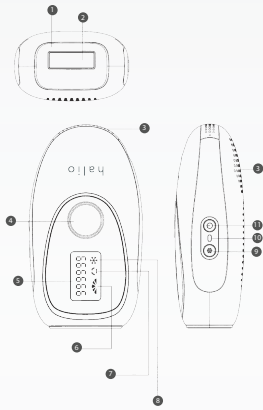

1. Bảng ứng dụng lạnh
2. Cửa sổ bắn xung
3. Lỗ thông hơi
4. Nút thao tác
5. Số xung còn lại
6. Bánh răng thể hiện cường độ từ 1 - 5 cấp

7. Biểu tượng chế độ: Đèn sáng (chế độ trượt nhanh), đèn tắt (chế độ triệt điểm)
8. Biểu tượng chế độ lạnh
9. Nút nguồn/ Cường độ
10. Đèn báo nguồn
11. Nút nén lạnh

2 Cách sử dụng

Trước khi sử dụng:

- 1 Loại bỏ lông trên da bằng dao cạo hoặc waxing
Lưu ý: Nếu chọn phương pháp waxing, chờ 24h trước khi sử dụng máy để da phục hồi
- 2 Kiểm tra da. Chọn vùng da bạn muốn triệt, mở máy & bắt đầu triệt theo cấp độ 1. Sau khi triệt, chờ 2 tiếng & kiểm tra xem có phản ứng gì không. Nếu không có phản ứng thì có thể chọn mức cao hơn lần triệt trước. Việc kiểm tra nên thực hiện trên tất cả các bề mặt da muốn triệt.
Lưu ý: Khi lông không còn mọc trở lại sau 4-5 lần triệt thì không cần cạo hay kiểm tra vùng da trước khi triệt

Sau khi sử dụng

- 1 Hạn chế tiếp xúc với nước và vận động mạnh gây mồ hôi nhiều trong vòng 2 tiếng sau khi triệt lông
- 2 Sau khi sử dụng máy, da có thể có biểu hiện đỏ nhẹ, châm chích hoặc khô da. Đây là những phản ứng hoàn toàn bình thường và có thể biến mất trong vòng vài ngày. Để giảm tình trạng này, có thể dùng gel nha đam để làm dịu da sau khi triệt
- 3 Có thể sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, nước hoa lên vùng da triệt sau khi da trở lại trạng thái ban đầu
- 4 Không sử dụng sản phẩm khử mùi hay kem cạo lông trong vòng 24 - 28 tiếng sau khi triệt lông

Khi sử dụng

- 1 Lau nhẹ cửa sổ phát tia sáng bằng khăn giấy khô
- 2 Cắm dây điện 1 đầu vào thiết bị, đầu kia vào ổ cắm điện
- 3 Nhấn giữ nút nguồn 2s để mở máy. Tăng mức độ xung theo kết quả của lần kiểm tra da. Nhấn nút làm lạnh tại cùng thời điểm nếu bạn muốn sử dụng chế độ làm lạnh.
- 4 Chọn chế độ sử dụng:
 - Stamp Flash (Triệt điểm): là chế độ mặc định khi mở máy phù hợp triệt vùng nhỏ như bikini và vùng dưới tay: nhấn thả nút Operation để phát từng xung
 - Slide Flash (Triệt trượt): nhấn giữ nút Operation 3s cho đến khi icon chế độ sáng lên, máy sẽ luôn ở trạng thái phát xung mà không cần nhấn thả nút liên tục.
 - **Lưu ý:** muốn quay lại chế độ Stamp Flash Mode, nhấn nút Operation.
- 5 Đeo kính đi kèm để bảo vệ mắt
- 6 Đặt máy góc 90° (vuông) so với bề mặt da
- 7 Nhấn nút Operation để bắt đầu phát xung & nhấn nút làm lạnh tại cùng thời điểm nếu muốn triệt lạnh. Làm lần lượt trên vùng cần triệt.
Lưu ý: Vùng da sẽ hơi nóng do xung ánh sáng, điều này là bình thường
- 8 Sau khi triệt xong, bấm giữ nút nguồn để tắt thiết bị.
Lưu ý: Sẽ có 10s đếm ngược trước khi quạt không khí tắt hẳn & thiết bị sẽ tự động tắt sau 5 phút khi không sử dụng để đảm bảo an toàn

halio

Máy Triệt Lông Lạnh Cá Nhân Halio IPL Cooling Hair Removal Device




Công nghệ IPL
Loại bỏ nan lông, trẻ hóa da



Hệ thống làm lạnh
Giảm đau rất hiệu quả

25
regime
temperature

**2 chế độ &
5 cường độ triệt**
Phù hợp cho nhiều nhu cầu

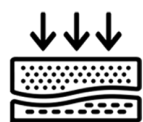


999,999 lần xung
Tuổi thọ lên đến 30 năm

halio-sonic.com

halio

1 Tổng quan máy

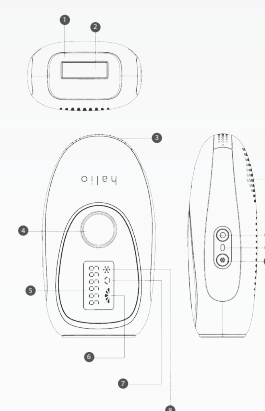

- | | |
|---|--|
| 1. Bảng ứng dụng lạnh | 7. Biểu tượng chế độ: Đèn sáng (chế độ trượt nhanh), đèn tắt (chế độ triệt điểm) |
| 2. Cửa sổ bắn xung | 8. Biểu tượng chế độ lạnh |
| 3. Lỗ thông hơi | 9. Nút nguồn/ Cường độ |
| 4. Nút thao tác | 10. Đèn báo nguồn |
| 5. Số xung còn lại | 11. Nút nén lạnh |
| 6. Bánh răng thể hiện cường độ từ 1 - 5 cấp | |

2 Cách sử dụng

Trước khi sử dụng:

- Loại bỏ lông trên da bằng dao cạo hoặc waxing
Lưu ý: Nếu chọn phương pháp waxing, chờ 24h trước khi sử dụng máy để da phục hồi
- Kiểm tra da. Chọn vùng da bạn muốn triệt, mở máy & bắt đầu triệt theo cấp độ 1. Sau khi triệt, chờ 2 tiếng & kiểm tra xem có phản ứng gì không. Nếu không có phản ứng thì có thể chọn mức cao hơn lần triệt trước. Việc kiểm tra nên thực hiện trên tất cả các bề mặt da muốn triệt.
Lưu ý: Khi lông không còn mọc trở lại sau 4-5 lần triệt thì không cần cạo hay kiểm tra vùng da trước khi triệt

Sau khi sử dụng

- Hạn chế tiếp xúc với nước và vận động mạnh gây mồ hôi nhiều trong vòng 2 tiếng sau khi triệt lông
- Sau khi sử dụng máy, da có thể có biểu hiện đỏ nhẹ, châm chích hoặc khô da. Đây là những phản ứng hoàn toàn bình thường và có thể biến mất trong vòng vài ngày. Để giảm tình trạng này, có thể dùng gel nha đam để làm dịu da sau khi triệt
- Có thể sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, nước hoa lên vùng da triệt sau khi da trở lại trạng thái ban đầu
- Không sử dụng sản phẩm khử mùi hay kem cạo lông trong vòng 24 - 28 tiếng sau khi triệt lông

Khi sử dụng

- Lau nhẹ cửa sổ phát tia sáng bằng khăn giấy khô
- Cắm dây điện 1 đầu vào thiết bị, đầu kia vào ổ cắm điện
- Nhấn giữ nút nguồn 2s để mở máy. Tăng mức độ xung theo kết quả của lần kiểm tra da. Nhấn nút làm lạnh tại cùng thời điểm nếu bạn muốn sử dụng chế độ làm lạnh.
- Chọn chế độ sử dụng:
 - Stamp Flash (Triệt điểm): là chế độ mặc định khi mở máy phù hợp triệt vùng nhỏ như bikini và vùng dưới tay: nhấn thả nút Operation để phát từng xung
 - Slide Flash (Triệt trượt): nhấn giữ nút Operation 3s cho đến khi icon chế độ sáng lên, máy sẽ luôn ở trạng thái phát xung mà không cần nhấn thả nút liên tục.**Lưu ý:** muốn quay lại chế độ Stamp Flash Mode, nhấn nút Operation.
- Đeo kính đi kèm để bảo vệ mắt
- Đặt máy góc 90° (vuông) so với bề mặt da
- Nhấn nút Operation để bắt đầu phát xung & nhấn nút làm lạnh tại cùng thời điểm nếu muốn triệt lạnh. Làm lần lượt trên vùng cần triệt.
Lưu ý: Vùng da sẽ hơi nóng do xung ánh sáng, điều này là bình thường
- Sau khi triệt xong, bấm giữ nút nguồn để tắt thiết bị.
Lưu ý: Sẽ có 10s đếm ngược trước khi quạt không khí tắt hẳn & thiết bị sẽ tự động tắt sau 5 phút khi không sử dụng để đảm bảo an toàn

halio-sonic.com