

halio

halio

Advanced Innovation for Exceptional Care



#1 Ranking
Beauty Tool




#1 Ranking
On Ecommerce in IPL

Hair Care



Oral Care

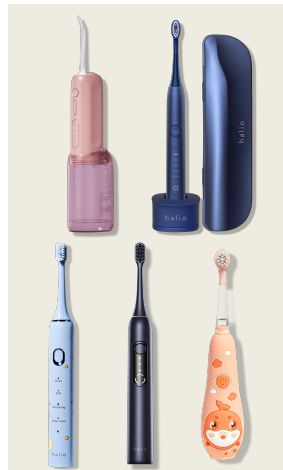

Facial Care



Body Care



Máy Triệt Lông Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling Hair Removal Device

Listing price: 8,000,000



Brand	Halio
Tên sản phẩm	Máy Triệt Lông Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling Hair Removal Device
Công dụng chính	Máy sử dụng công nghệ xung ánh sáng IPL để triệt lông hiệu quả. Được trang bị bóng đèn kép với mức năng lượng cao, và công nghệ làm lạnh đá Sapphire giúp giảm thiểu kích ứng miễn đỏ mà vẫn đem lại hiệu quả nhanh chóng!
Nhiệt độ triệt lạnh	10 độ C
Số xung ánh sáng IPL	Unlimited. Sử dụng máy trọn đời
Tốc độ chiếu xung	0.14s/xung cho cường độ ánh sáng level 1 - chế độ Fast
Các chế độ	Triệt điểm (Manual), Triệt trượt (Auto), Triệt xung đơn (Single), Triệt xung kép (Dual), Triệt nhanh (Fast)
Số cường độ ánh sáng	5 cường độ
Xuất xứ	Mỹ
Sản xuất	Trung Quốc
Giá bán	8,000,000 VND

Giới thiệu sản phẩm

Khám phá làn da mịn màng, rạng rỡ với Máy triệt lông Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling. **Công nghệ ĐÈN KÉP** tiên tiến mang lại **năng lượng mạnh gấp BA LẦN** so với các thiết bị triệt lông thông thường và cửa sổ phát xung lớn hơn, cho phạm vi phủ rộng hơn, mang lại **kết quả rõ rệt** trong chưa đầy **ba tuần**. Với tốc độ phát xung cực nhanh **7 xung mỗi giây**, triệt lông toàn thân chỉ mất **8 phút**. Bề mặt Làm mát Sapphire, nay lớn gấp ba lần, làm mát dễ chịu **10°C**, đảm bảo thoải mái và không gây bỏng rát. Lựa chọn giữa chế độ Xung đơn cho vùng da nhỏ, Xung kép cho hiệu quả gấp đôi hoặc chế độ Nhanh cho các vùng triệt lớn. Với ổ cắm đa điện áp và hộp đựng máy bằng da tiện dụng, dễ dàng mang theo khi đi du lịch, cùng số lần phát xung không giới hạn, mang đến làn da mịn màng trọn đời.



Tính năng nổi bật của **Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling Hair Removal Device**

Lợi ích khách hàng

Hiệu quả triệt lông chỉ dưới 3 tuần sử dụng

nhờ vào công nghệ **Đèn Kép** tiên tiến và năng lượng mạnh **gấp 3 lần**

Tại sao?

Triệt lông không đau, không bỏng rát

nhờ vào diện tích **đá Sapphire** làm lạnh lớn nhất **11.82cm² ở 10°C**

Triệt toàn thân siêu nhanh chỉ trong 8 phút

nhờ vào tốc độ phát xung siêu tốc **0.14s/xung**

Dễ dàng mang theo và bảo quản tốt hơn

nhờ vào **hộp đựng bằng da**



Các ưu điểm khác của **Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling Hair Removal Device**



Phù hợp với mọi nhu cầu triệt
5 chế độ & **5** cường độ triệt




Triệt thả ga không lo hết xung
Không giới hạn số xung



Du lịch thoải mái
Tích hợp ổ cắm đa điện áp **100-240V**

Cấu tạo sản phẩm

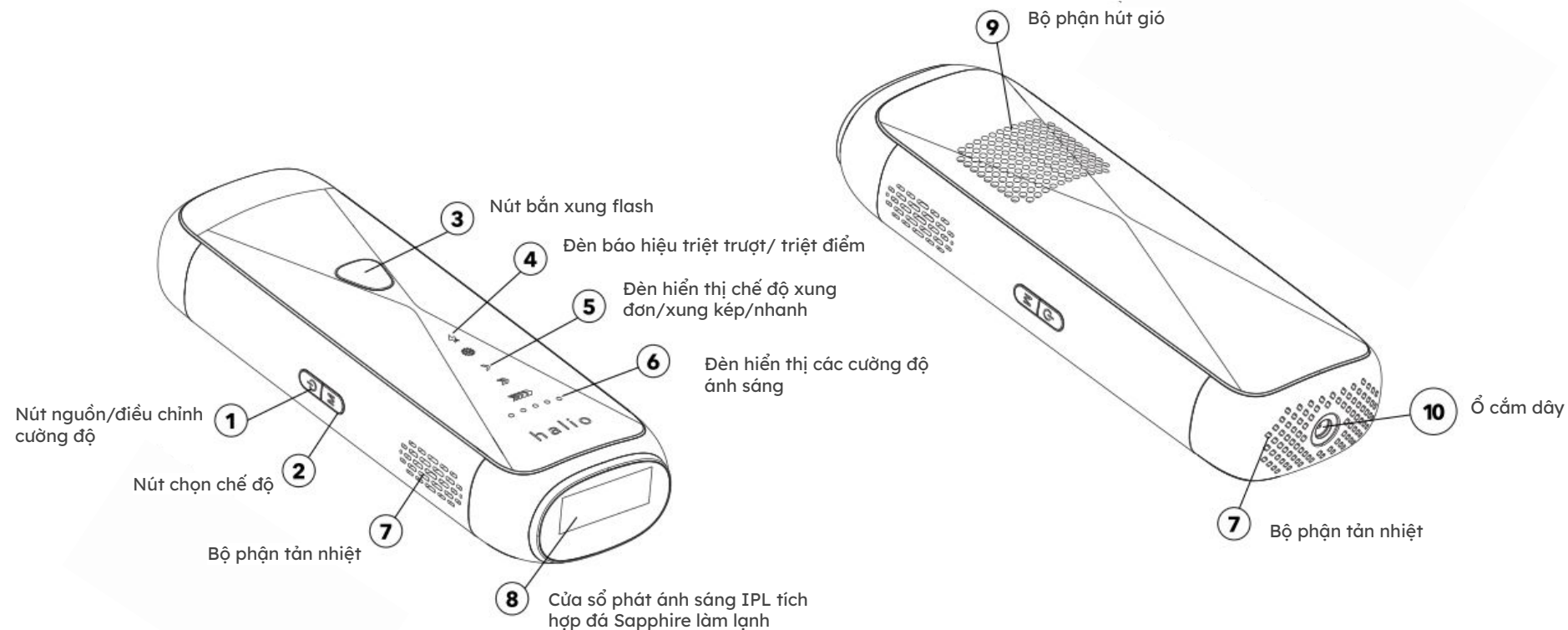

Products Benchmarking

Nhãn hàng	Giá thành	Công nghệ	Đặc điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling Hair Removal Device 	8,000,000	IPL & Sapphire Cooling	- Diện tích làm lạnh 11.82 cm² - Năng lượng ánh sáng lên tới 24J hiệu quả dưới 3 tuần sử dụng - Tốc độ phát xung siêu tốc 0.14s/xung - triệt toàn thân chỉ 8 phút - 3 chấu cắm, du lịch thoải mái - Có leather box bảo quản tiện lợi, dễ dàng mang theo	Có
Halio InfinityGlow Advanced IPL Sapphire Cooling 	7,000,000	IPL & Sapphire Cooling	- Diện tích làm lạnh 3.3 cm² - Năng lượng ánh sáng lên tới 19J hiệu quả sau 4 tuần sử dụng - Tốc độ phát xung siêu nhanh 0.25s/xung, triệt toàn thân chỉ 10 phút - 3 chấu cắm, du lịch thoải mái	Có

Products Benchmarking

Nhãn hàng	Giá thành	Công nghệ	Ưu điểm	Khuyết điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling Hair Removal Device 	8,000,000	IPL & Sapphire Cooling	- Năng lượng 24J - Diện tích làm lạnh 11.82cm² - Tốc độ phát xung siêu tốc 0.14s/xung - triệt toàn thân chỉ 8 phút - Hiệu quả dưới 3 tuần sử dụng - Có leather box bảo quản tiện lợi, dễ dàng mang theo - 3 chấu cắm, du lịch thoải mái		Có
Ulike Air 3 	8,600,000	IPL & Sapphire Cooling		- Năng lượng 21J - Diện tích làm lạnh 3.3cm² - Tốc độ phát xung 0.7s chậm hơn triệt toàn thân mất 12 phút - Giá thành cao - Đi nước khác cần mua thêm plug	Có

Products Benchmarking

Nhãn hàng	Giá thành	Công nghệ	Ưu điểm	Khuyết điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling Hair Removal Device 	8,000,000	IPL & Sapphire Cooling	- Diện tích làm lạnh 11.82cm² - Tốc độ phát xung siêu tốc 0.14s/xung - triệt toàn thân chỉ 8 phút - Có leather box bảo quản tiện lợi, dễ dàng mang theo - 3 chấu cắm, du lịch thoải mái	- Mức năng lượng 24J - Không có SmartSkin sensor	Có
Ulike Air 10 	9,100,000	IPL & Sapphire Cooling	- Mức năng lượng 26J - Có SmartSkin sensor	- Diện tích làm lạnh nhỏ chỉ 3.9cm² - Tốc độ phát xung 0.25s/xung - Triệt toàn thân 10 phút - Giá thành cao hơn - Không có leather box - Đi nước khác cần mua thêm plug converter - Khó tìm mua do chưa phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam	Không


COMMUNICATION PLAN

Product Name	Máy Trị Liệu Lông Lạnh Đá Sapphire Halio SilkGlow IPL Cooling Hair Removal Device Công Nghệ Đèn Kép			
Phasing	PRE-LAUNCHING 7 July - 14 July	LAUNCHING / Education x Product Awareness HSG only 15 July - 31 July	AMPLIFICATION HSG x GWP 1 Aug -> 15 Aug	AMPLIFICATION HSG only 15 Aug -> Sep
Communication Material	- KSP Album - Teasing - Web banner	- UGC content - KOL/KOC Booking - Seeding (Tiktok, Facebook, Thread)	- UGC content - KOL/KOC Booking Seeding (Tiktok, Facebook, Thread) - High push	- UGC content - Seeding (Tiktok, Facebook, Thread)
Content Angles Plan	- OC: Unboxing - OC: HDSD - OC: Before - After - OC: Teasing new color	- Trigger: new hair removal of Halio. What's it? - Guideline: how to use HSG in body care routine - First impressions of using HSG - Choose product color based on zodiac sign/personality/...	- Reaction video from big KOLs - Seasonal Content (Remove hair before Independence Day, Summer Vacation,...) Buy HSG get GWP	- Body care routine to recover your skin after a summer at the beach - Skin care challenge from now until the end of the year
KOL/KOC Plan	Not yet 10/7: Product on stock	4 KOL/KOC start from 23 July - Nguyễn Newin - Kiểu Ly Phạm - Em Ly Review - Gia đình Chuột con	Estimate: 6-10 KOL/KOCs KOL List: TBU	Estimate: 2-3 KOL/KOCs/month TBU

MARKETING ACTIVITIES - HSG - KOL/KOC Booking

halio

Launching
HSG only

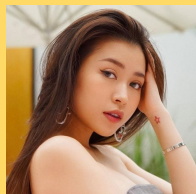

Nguyễn Newin
Sau 15/07



Kiều Ly Phạm
Sau 15/07



Em Ly Review
Sau 15/07



Gia đình Chuột con
Sau 15/07

HSG - add in GWP
From 1/8



[thutheooo](#)



[julie.phmm](#)



[mpuong.278](#)



[mymidichoi](#)



[fuongenh](#)

Products Benchmarking

Nhãn hàng	Giá thành	Giá bán trung bình	Xung ánh sáng	Công nghệ	Ưu điểm	Khuyết điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling Hair Removal Device 	8,000,000		Unlimited	IPL & Sapphire Cooling	- Diện tích làm lạnh (11.82cm²) lớn gấp 3 lần - Tốc độ phát xung siêu nhanh 0.14s/xung triệt lông toàn thân siêu tốc chỉ 8p - Đèn kép gấp đôi năng lượng hiệu quả ít hơn 3 tuần sử dụng - Màu sắc trẻ trung, bắt mắt - 3 chấu cắm, du lịch thoải mái	- Không có smart skin sensor - Không có app - Bảo hành 1 năm	Có
Máy triệt lông cao cấp Philips Lumea 9900pert 5 	18,800,000		450,000 flashes - 39 years	IPL	- Có SmartSkin sensor - Có app theo dõi và phân tích da, đếm số xung đủ, phân tích số lông - Bảo hành lên đến 5 năm - Không cần đeo kính - Có kèm 1 máy cạo lông mặt	- Không có công nghệ làm mát Sapphire - Tốc độ phát xung lâu - 2s/xung - Giá thành cao - Đi nước khác cần mua thêm plug converter	Không

Products Benchmarking

Nhãn hàng	Giá thành	Giá bán trung bình	Xung ánh sáng	Công nghệ	Ưu điểm	Khuyết điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling Hair Removal Device 	8,000,000		Unlimited	IPL & Sapphire Cooling	- Diện tích làm lạnh (11.82cm²) lớn gấp 3 lần - Tốc độ phát xung siêu nhanh 0.14s/xung triệt lông toàn thân siêu tốc chỉ 8p - Đèn kép gấp đôi năng lượng hiệu quả dưới 3 tuần sử dụng - Màu sắc trẻ trung, bắt mắt - 3 chấu cắm, du lịch thoải mái	- Không có SmartSkin sensor - Không có app - Bảo hành 1 năm	Có
Máy triệt Lông Braun Silk Expert 5 	13,000,000		400,000 flashes - 6 years	IPL	- Có SmartSkin sensor tự điều chỉnh energy tùy vào skin tone - Có app theo dõi và phân tích tình trạng lông - Bảo hành lên đến 5 năm - Không cần đeo kính vì có filter lọc UV, skin contact sensor chỉ phát xung khi bề mặt hoàn toàn tiếp xúc da	- Không có công nghệ làm mát Sapphire - Tốc độ phát xung chậm hơn 7 lần, 1s/xung triệt lông toàn thân lâu hơn - Giá thành cao - Đi nước khác cần mua thêm plug converter	Không

Products Benchmarking

Nhãn hàng	Giá thành	Giá bán trung bình	Xung ánh sáng	Công nghệ	Ưu điểm	Khuyết điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling Hair Removal Device 	8,000,000		Unlimited	IPL & Sapphire Cooling	- Diện tích làm lạnh (11.82cm²) lớn gấp 3 lần - Năng lượng cao 24J - Tốc độ phát xung siêu nhanh 0.14s/xung triệt lông toàn thân siêu tốc chỉ 8p - Đèn kép gấp đôi năng lượng hiệu quả dưới 3 tuần sử dụng - Màu sắc trẻ trung, bắt mắt - 3 chấu cắm, du lịch thoải mái - Triệt trượt không cần giữ nút flash	- Bảo hành 1 năm - Không có smartskin sensor	Có
Máy triệt Lông Smooth Skin - Pure fit 	13,000,000		Unlimited	IPL	- Có SmartSkin sensor tự điều chỉnh energy tùy vào skin tone - Có app theo dõi và phân tích - Bảo hành 2 năm - Không cần đeo kính vì có 4 skin sensors chỉ phát xung khi đặt đầu máy firmly - Có đầu riêng dành riêng cho ria mép, ngón chân, và ngón tay	- Không có công nghệ làm mát Sapphire - Năng lượng chỉ 18.6J triệt lông hiệu quả chậm hơn - Tốc độ phát xung chậm hơn 0.49s/xung triệt lông toàn thân lâu tổng 10p - Giá thành cao - Đi nước khác cần mua thêm plug converter - Triệt trượt phải bấm giữ mỗi tay	Không

Hướng dẫn sử dụng HSG

1. Kiểm tra màu da và màu lông trước khi triệt lông để đảm bảo bạn phù hợp để sử dụng máy triệt lông lạnh Sapphire của Halio:

Skin type/color	View	Safety grade
Type I Pale white skin		Applicable
Type II White skin		Applicable
Type III Cream white skin		Applicable
Type IV Moderate brown skin		Applicable
Type V Dark brown skin		Not Applicable
Type VI Deeply pigmented dark brown to darkest brown, black skin		Not Applicable

Bảng kiểm tra màu da



Bảng kiểm tra màu lông

- Công nghệ IPL nhắm đến melanin, vì vậy hiệu quả của nó phụ thuộc vào mức độ melanin trong da và lông. Nó có thể **kém hiệu quả hơn** trên lông sáng màu và có thể **không an toàn** cho da tối màu do sự hấp thụ melanin cao. Vui lòng tham khảo hai bảng trên để kiểm tra tính phù hợp.
- Máy chỉ có **hiệu quả và an toàn** với ai có tông da từ Loại I đến Loại IV. Máy chỉ có **hiệu quả** đối với ai có màu lông đen hoặc nâu. Lông màu vàng, đỏ hoặc trắng sẽ không có hiệu quả.
- Bất kể màu da, luôn bắt đầu từ cường độ ánh sáng thấp nhất khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên và sau đó tăng dần.
- Tông da sẫm màu hấp thụ ánh sáng nhiều hơn dễ gây kích ứng da. Do đó, những người có tông da sẫm màu được khuyến cáo sử dụng ánh sáng với cường độ thấp nhất và điều chỉnh cường độ theo cảm giác chịu nhiệt của bạn.

Hướng dẫn sử dụng HSG


2. dành cho những người dùng máy triệt lông IPL lần đầu, chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra trên các vùng da nhỏ ở tất cả các khu vực bạn muốn triệt để xem phản ứng bằng cách làm theo các bước sau:

- Bật thiết bị, chọn mức cường độ 1, nhấn nút flash và bắn xung một lần.
- Tăng cường độ lên một mức và di chuyển thiết bị đến khu vực tiếp theo (không phát xung quá 3 lần ở cùng một khu vực). Ngừng tăng cường độ và ngừng thử nghiệm khi thiết bị gây ra bất kỳ cảm giác khó chịu (hoặc đau) nào. Ví dụ: Bạn có thể tăng cường độ lên mức 2 và thử nghiệm theo các bước trên chỉ khi thiết bị không gây khó chịu (hoặc đau) ở mức 1.
- Sau khi tăng đến mức cường độ ánh sáng mà bạn cảm thấy thoải mái. Hãy đợi 24 giờ và kiểm tra da để xem có bất kỳ phản ứng nào bất thường.
- Nếu da ở khu vực thử nghiệm hoàn toàn bình thường sau 24h (không có biểu hiện bất thường), bạn có thể tiếp tục sử dụng. Nếu có dấu hiệu bất thường như nóng rát, đỏ thì hãy giảm mức cường độ xuống một mức và đợi 24h. Nếu da ở khu vực thử nghiệm hoàn toàn bình thường sau 24h (không có biểu hiện bất thường), bạn có thể tiếp tục sử dụng mức cường độ này.

Lưu ý: Bước kiểm tra da nên được thực hiện ở vùng da nhỏ trên tất cả các khu vực bạn muốn triệt lông.

Hướng dẫn sử dụng HSG

3. Trước khi sử dụng, làm sạch lông trên bề mặt da bằng dao cạo hoặc máy cạo lông (không nhổ lông, không wax hoặc sử dụng các kem tẩy lông). Đảm bảo da hoàn toàn khô và không có bất cứ sản phẩm nào khác trên da (kem dưỡng, kem chống nắng, nước hoa,...).
4. Kết nối thiết bị với đầu dây cắm. Sau đó, cắm phích vào ổ cắm điện
5. Nhấn và giữ nút **Nguồn/Cường độ** khoảng 2 giây để bật máy
6. Nhấn nút **Nguồn/Cường độ** để chọn cường độ ánh sáng phù hợp với da như trong bước thứ 2.

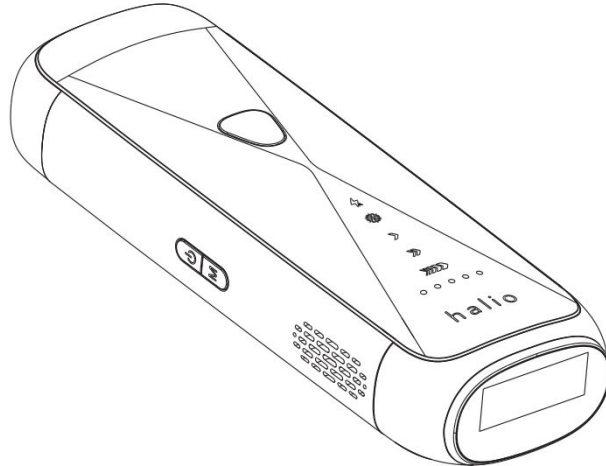

Hướng dẫn sử dụng HSG

7. Chọn chế độ Triệt (Triệt trượt/Triệt điểm) và chế độ phát xung (Xung đơn/Xung kép/Nhanh)

- Giữ nút Flash hình tam giác 2 giây để chuyển qua lại giữa chế độ Triệt Trượt Tự Động (Tự phát xung liên tục mà không cần nhấn nút Flash - đèn trắng hình tia sét sáng đèn) và chế độ Triệt Điểm Thủ Công (Phải nhấn nút Flash máy mới bắn xung - đèn trắng hình tia sét tắt)

- Nhấn nút chữ M để chuyển qua lại giữa chế độ Xung đơn (Phát 1 xung ánh sáng - Đèn trắng hình 1 mũi tên), chế độ Xung kép (Phát 2 xung ánh sáng cùng lúc - Đèn hình 2 mũi tên), và chế độ Nhanh (Phát nhiều xung cùng lúc - Đèn hình nhiều mũi tên)

8. Đeo kính bảo hộ để ánh sáng bớt chói vào mắt, tránh nhìn trực tiếp vào xung ánh sáng

9. Đặt thiết bị ở góc 90° trên da để ánh sáng thoát ra từ cửa sổ tiếp xúc hoàn toàn với bề mặt da của bạn

10. Nhấn nút Flash để bắt đầu triệt lông. Cùng một vùng triệt, chỉ nên bắn tối đa là 3 lần. Bắn xung quá 3 lần cho cùng một khu vực có thể gây đỏ da đối với những ai có làn da nhạy cảm.

11. Khi bạn kết thúc quá trình triệt lông, hãy nhấn và giữ Nguồn/Cường độ để tắt thiết bị. Sau khi bấm nút tắt, bạn sẽ nghe tiếng quạt trong khoảng 15 giây. Đây là âm thanh từ quạt giúp làm mát các bộ phận bên trong máy từ đó giúp bảo đảm độ bền cho máy. Hãy đợi tiếng quạt ngừng hẳn rồi mới rút phích cắm và vệ sinh thiết bị.

Tần suất sử dụng HSG



- 2 tuần đầu tiên: Triệt 3 lần mỗi tuần
- Tuần thứ 3-4: Triệt 2 lần mỗi tuần
- Tháng thứ hai trở đi: Triệt mỗi 15 ngày hoặc 30 ngày

Khuyến Cáo HSG

- Mỗi vùng lông có độ dày cứng và độ đậm nhạt khác nhau, chu kỳ sinh trưởng và độ nông sâu của gốc lông cũng khác nhau nên cần tính thời điểm sử dụng IPL triệt lông với mức năng lượng và thời gian triệt lông phù hợp nhất để có kết quả tốt
- Cần lưu ý không được triệt lông IPL trên vùng da phơi nắng hoặc kem làm nâu da.
- Không khuyến nghị sử dụng với người có màu lông đỏ, xám và vàng.
- Người đã sử dụng triệt lông cơ học (nhổ bằng nhíp, dùng điện phân hay wax) dưới ba tuần không được dùng phương pháp IPL. Trong khi triệt lông bằng IPL, không được sử dụng tất cả các loại hình triệt lông trên.
- Người có sử dụng Tretinol, Retinol , BHA, AHA dạng bôi trên vùng da triệt lông cần ngưng dùng sản phẩm ít nhất 1 tuần trước và trong quá trình sử dụng máy triệt lông IPL

Chăm sóc da sau khi triệt lông HSG

- Hạn chế tiếp xúc với nước và vận động mạnh gây đổ mồ hôi nhiều trong vòng 2 tiếng sau khi triệt lông. Khuyến khích tắm trước khi triệt lông, sau đó đợi 24h mới tắm lại.
- Sau khi sử dụng máy, da có thể có biểu hiện đỏ nhẹ, châm chích, khô da. Đây là những phản ứng hoàn toàn bình thường và có thể biến mất trong vòng vài ngày. Để giảm tình trạng này, có thể dùng gel nha đam để làm dịu da sau khi triệt
- Có thể sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, nước hoa lên vùng đã triệt sau 24 giờ lúc da đã trở lại trạng thái ban đầu (da không còn đỏ, hay châm chích)
- Không sử dụng sản phẩm khử mùi hay kem cạo lông trong vòng 24-48 giờ sau khi triệt lông
- Tránh tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp trong 2 tuần kể từ sau khi triệt lông (mặc áo khoác, quần dài, đeo khẩu trang, ở trong phòng kín, ...). Nếu cần tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng sau khi triệt lông (Photoshoot) khuyến khích sử dụng kem chống nắng trên vùng da đã triệt (Test kem chống nắng trên vùng da nhỏ và đợi 24 tiếng)



Vệ sinh và bảo quản máy HSG

- Sau khi sử dụng, tắt thiết bị, rút phích cắm và để nguội trong 20 phút.
- Sử dụng khăn khô/khăn ướt/khăn mềm ướt với 70% isopropyl alcohol hoặc 90% ethanol để làm sạch bề mặt thiết bị trong 15 giây và cửa sổ phát xung trong 3 giây.
- Để tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trong 10 phút.
- Bảo quản ngoài tầm với của trẻ em và ở nơi an toàn, khô ráo.

