



Ghé thăm chúng tôi tại:

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2024 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

PHILIPS

Máy Massage Chân

Máy Massage Chân

PPM6333



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mục Lục

1	Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng	1
	Mô tả biểu tượng	1
	Đối tượng phù hợp	
	Không được phép sử dụng	1
	Lưu ý khi sử dụng	2
	Các biện pháp bảo trì an toàn	3

2	Tính năng sản phẩm	4
---	--------------------	---

3	Chi tiết sản phẩm	4
---	-------------------	---

4	Hướng dẫn sử dụng	5
	Lưu ý trước khi sử dụng	5
	Thao tác sử dụng	5

5	Bảo trì sản phẩm	7
	Vệ sinh	7

6	Thông số kỹ thuật	8
---	-------------------	---

7	Hướng xử lý lỗi	9
---	-----------------	---

8	Hướng dẫn dịch vụ	10
	bảo hành sản phẩm	
	Bảo hành và dịch vụ	10
	Phiếu bảo hành	11

9	Danh sách đóng gói	11
---	--------------------	----

1 Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và bảo quản cẩn thận trước khi sử dụng sản phẩm.

Mô tả biểu tượng

Để tránh nguy cơ chấn thương cá nhân hoặc hư hỏng thiết bị, hãy tuân thủ các nội dung sau:

- Các biểu tượng dưới đây được sử dụng để minh họa những điều cần lưu ý khi sử dụng thiết bị.



BIỂU TƯỢNG CẤM



BIỂU TƯỢNG LÀM THEO CHỈ DẪN

Những đối tượng cần thận trọng khi sử dụng sản phẩm:



Sản phẩm cần được sử dụng cẩn thận với các nhóm đối tượng sau:

Những người đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc đang gặp các tình trạng sức khỏe dưới đây nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên viên vật lý trị liệu trước khi sử dụng sản phẩm.

- Người có thiết bị y tế cấy ghép (ví dụ: máy tạo nhịp tim).
- Người mắc bệnh tim mạch.
- Người bị tổn thương hoặc viêm da.
- Người có nhiệt độ cơ thể trên 38°C.
- Người đang bị đau lưng, đau đầu, đau chân hoặc có tiền sử đau tại các vị trí này.
- Người thường xuyên bị tê bì tay chân.
- Người bị rối loạn hô hấp.
- Người mắc bệnh cao huyết áp.
- Người bị thoát vị đĩa đệm, viêm cột sống, v.v.
- Người mắc bệnh viêm khớp thoái hóa, viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh gout.
- Người bị gãy xương cột sống hoặc sưng xương.

- Người bị rối loạn khả năng cảm nhận nhiệt độ da.
 - Người có tiền sử bỏng do nhiệt độ thấp.
 - Người mắc bệnh lý về cột sống.
 - Người có cảm giác cơ thể bất thường.
-

Những đối tượng sau bị cấm sử dụng sản phẩm

Người được bác sĩ khuyến cáo không nên tập thể dục hoặc vận động kéo giãn, chẳng hạn như người bị huyết khối tĩnh mạch, phình động mạch, viêm tĩnh mạch cấp, viêm da, hoặc nhiễm trùng da — vì có thể làm bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.

· Thiết bị này không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) bị hạn chế về thể chất, cảm giác, hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức, trừ khi có người giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng an toàn.

· Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không chơi đùa với thiết bị.

· Nếu trong quá trình sử dụng, bạn cảm thấy đau lưng, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh hoặc các phản ứng cơ thể bất thường, hãy ngưng sử dụng ngay lập tức.

· Thiết bị này có chức năng hẹn giờ 15 phút cho mỗi lần sử dụng. Không sử dụng quá 15 phút/lần. Sau khi dùng, nên để máy nghỉ 30 phút trước khi dùng lại để kéo dài tuổi thọ sản phẩm

Không sử dụng thiết bị trong các trường hợp sau:

- Khi quá mệt mỏi.
 - Trong vòng 1 giờ trước hoặc sau khi ăn.
 - Khi đang say rượu hoặc sử dụng chất kích thích.
-

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm:

-  Kiểm tra tình trạng sản phẩm trước khi dùng. Nếu phát hiện hư hỏng hoặc nứt vỡ, dù nhỏ, ngưng sử dụng ngay lập tức.
-  Làm sạch bụi bám trên adapter thường xuyên. Bụi tích tụ có thể gây ẩm, giảm khả năng cách điện và dẫn đến cháy nổ.

- ❗ Thiết bị chỉ được sử dụng với bộ nguồn đi kèm theo sản phẩm.
 - ❗ Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem công tắc hoạt động bình thường hay không.
 - ❗ Khi không sử dụng hoặc phát hiện tình trạng bất thường, hãy ngừng sử dụng ngay và rút adapter khỏi nguồn điện.
 - ❗ Rút adapter khi có mất điện.
 - ❗ Khi không sử dụng trong thời gian dài, cần rút adapter ra khỏi ổ cắm.
 - ❗ Sản phẩm có bề mặt sinh nhiệt, hãy cẩn thận để tránh gây bỏng cho người nhạy cảm với nhiệt khi sử dụng.
 - ⊘ Không đặt vật nặng lên adapter hoặc làm hư hại adapter.
 - ⊘ Không đứng lên sản phẩm hoặc sử dụng sản phẩm như đồ chơi, tránh gây tai nạn.
 - ⊘ Không tự ý tháo rời, sửa chữa, thay đổi cấu trúc sản phẩm, hoặc tự mở khóa kéo (nếu có).
 - ⊘ Không sử dụng khi cơ thể còn ướt, vì có thể gây điện giật.
 - ⊘ Khi sử dụng, không mặc quần áo quá dày, và không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da để tránh bỏng do nhiệt độ thấp.
 - ⊘ Không sử dụng thiết bị khi lớp vỏ ngoài bị tháo rời, vì có thể gây tai nạn.
 - ⊘ Không kéo mạnh hoặc đâm chọc sản phẩm bằng dao hoặc vật sắc nhọn.
-

Lưu ý khi bảo quản sản phẩm:


- ❗ Rút cáp sạc ra khỏi nguồn điện trước khi tiến hành bảo dưỡng.
- ❗ Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- ⊘ Không làm rơi sản phẩm hoặc adapter, và không va đập mạnh.
- ⊘ Không bôi dung dịch hoặc chất lỏng lên sản phẩm.
- ⊘ Không đổ nước trực tiếp lên thiết bị.
- ⊘ Không sử dụng ở nơi có nhiệt độ trên 35°C hoặc dưới ánh nắng trực tiếp.
- ⊘ Không sử dụng trong nhà tắm hoặc khu vực có độ ẩm cao.
- ❗ Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy kiểm tra lại hoạt động của công tắc trước khi dùng lại.
- ⊘ Khi vệ sinh sản phẩm, không dùng dầu dễ bay hơi, dung môi, cồn, chất tẩy mạnh hoặc thuốc tẩy để làm sạch.


- ❗ Sản phẩm được trang bị bộ giảm chấn cơ bản, thích hợp cho việc vận chuyển bằng đường hàng không, đường bộ hoặc đường thủy.
Khi vận chuyển, tránh để sản phẩm bị mưa, tuyết, lật úp hoặc va đập mạnh.
- ❗ Không để sản phẩm trong tầm với của trẻ em hoặc trẻ sơ sinh.
- ❗ Khi bảo quản sản phẩm, hãy để sản phẩm nguội hoàn toàn trước khi cất giữ.
- ❗ Thường xuyên kiểm tra tình trạng hao mòn hoặc hư hại của sản phẩm.
Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc sản phẩm bị sử dụng sai cách, hãy ngừng sử dụng và liên hệ nhà cung cấp để kiểm tra hoặc thay thế trước khi sử dụng lại.

2 Tính năng sản phẩm

Sản phẩm được thiết kế với các tính năng xoa bóp túi khí, con lăn massage và liệu pháp nhiệt cảm biến. Các chức năng này kết hợp với tùy chỉnh cường độ túi khí, cường độ con lăn và mức nhiệt độ sưởi, giúp thư giãn gân bàn chân, mu bàn chân và gót chân. Phù hợp với nhiều nhu cầu massage chân khác nhau của người dùng.

3 Chi tiết sản phẩm

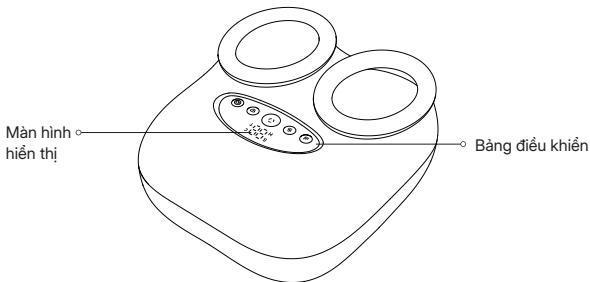

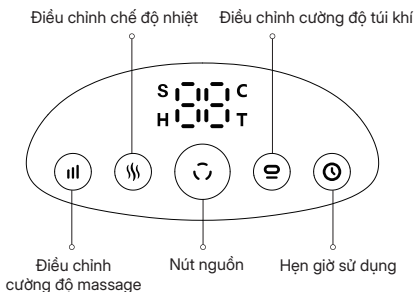

4 Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý trước khi sử dụng

1. Kiểm tra xem sản phẩm và các phụ kiện đi kèm đã đầy đủ hay chưa.
2. Tháo bỏ các vật trang sức hoặc phụ kiện (như vòng chân, lắc tay, v.v.) trước khi sử dụng để tránh ảnh hưởng đến quá trình massage.

Thao tác sử dụng

Nút Nguồn

Nhấn nhẹ nút nguồn để bật hoặc tắt máy.

Khi bật nguồn, đèn màu xanh lam trên bảng điều khiển sẽ sáng (tất cả biểu tượng được hiển thị), và màn hình hiển thị số "15" — tương ứng với thời gian mặc định 15 phút cho mỗi lần sử dụng.

Khi tắt nguồn, tất cả đèn báo sẽ tắt.

Nút điều chỉnh túi khí

1. Mặc định khi khởi động: mức áp lực túi khí thấp (đèn báo "C" màu xanh dương).
2. Nhấn nhanh một lần để chuyển sang mức trung bình (đèn báo "C" màu xanh lá).
3. Nhấn nhanh thêm lần nữa để chuyển sang mức cao (đèn báo "C" màu đỏ).

Nhấn thêm một lần để tắt chế độ túi khí (đèn tắt). Các mức sẽ luân phiên thay đổi mỗi lần nhấn.

Nút điều chỉnh nhiệt

1. Mặc định khi khởi động: mức nhiệt thấp (đèn báo "H" màu xanh dương).
2. Nhấn nhanh một lần để chuyển sang mức nhiệt cao (đèn báo "H" màu đỏ).
3. Nhấn thêm một lần để tắt chế độ nhiệt (đèn tắt). Các mức luân phiên thay đổi mỗi lần nhấn.

Nút hẹn giờ

Có 2 mức thời gian: 15 phút / 30 phút

Mặc định khi khởi động: 15 phút (đèn xanh dương).

Nhấn để chuyển sang 30 phút (đèn đỏ). Sau khi sử dụng xong, nếu chuyển lại 15 phút thì thời gian sẽ được đặt lại mặc định là 15 phút. Màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị thời gian đếm ngược trong quá trình hoạt động.

Nút điều chỉnh cường độ massage

1. Mặc định khi khởi động: chế độ tốc độ thấp (đèn báo "S" màu xanh dương).
2. Nhấn nhanh một lần để chuyển sang tốc độ cao (đèn báo "S" màu đỏ).
3. Nhấn thêm một lần để tắt chế độ cường độ (đèn tắt).

Khi tắt cả các nút chức năng đều tắt, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ — các chức năng vẫn sẵn sàng, và bộ đếm thời gian vẫn tiếp tục.

Thiết bị tự động tắt nguồn khi hết thời gian hẹn giờ.

Sản phẩm được trang bị chức năng ghi nhớ — tự động lưu lại cài đặt gần nhất cho lần sử dụng sau.

5 Bảo trì sản phẩm

Vệ sinh

1. Dùng khăn mềm sạch để lau bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm.
 2. Dùng khăn ẩm thấm dung dịch tẩy rửa trung tính, sau đó lau nhẹ nhàng các vết bẩn cứng đầu.
 3. Không để nước thấm vào bên trong sản phẩm.
 4. Đặt sản phẩm ở nơi khô ráo và để khô tự nhiên.
- ❗ Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nơi ẩm ướt. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy làm sạch sản phẩm trước, sau đó phủ khăn bảo vệ để tránh bụi bẩn bám vào.
- ⊘ Không sử dụng các dung môi sau để vệ sinh sản phẩm, vì có thể làm hư hại linh kiện hoặc gây nứt, đổi màu bề mặt:



Cồn



Dung môi pha loãng



Xăng

6 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy Massage Chân Philips
Model	PPM6333
Điện áp hoạt động	12V ---
Công suất hoạt động	30W
Tần số định mức	50-60Hz
Kích thước sản phẩm	360×327×180mm
Trọng lượng	2 65kg

7 Hướng xử lý lỗi

Phần này liệt kê các vấn đề thường gặp khi sử dụng sản phẩm.

Nếu bạn không thể tự khắc phục theo hướng dẫn dưới đây, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền để được hỗ trợ.

Hiện tượng	Nguyên nhân	Giải pháp
Không khởi động được	Nút nguồn chưa được bật.	Nhấn nút nguồn để bật thiết bị.
	Sản phẩm vừa hoàn tất chu trình massage 15 phút và tự động chuyển sang chế độ tắt.	Nếu muốn tiếp tục massage, vui lòng bật lại thiết bị.
Không gia nhiệt trong quá trình sử dụng	Adapter nguồn bị lỏng hoặc chưa cắm chặt.	Cắm lại phích cắm nguồn cho chặt.
	Hết thời gian hẹn giờ tự động.	Khởi động lại thiết bị.
	Chức năng bảo vệ quá nhiệt đã kích hoạt.	Tắt nguồn, rút phích cắm và chờ sản phẩm nguội trước khi sử dụng lại.
Có tiếng kêu khi hoạt động	Âm thanh cơ học bên trong thiết bị (khi đầu massage quay).	Đây là hiện tượng bình thường, không ảnh hưởng đến hoạt động của sản phẩm.
Có khói phát ra từ thiết bị	Mạch điện bên trong bị chập.	Ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ trung tâm bảo hành.

Nếu sản phẩm không được sử dụng trong thời gian dài, hãy chắc chắn kiểm tra kỹ trước khi dùng lại để đảm bảo chức năng hoạt động bình thường

Kiểm tra định kỳ	Kiểm tra các lỗi sau	Nếu xảy ra các hiện tượng trên, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và rút nguồn điện để tránh tai nạn. Hãy gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành của công ty để được sửa chữa.
	• Dây nguồn hoặc phích cắm có bị nóng không. • Dây nguồn có bị trầy xước, biến dạng nặng hoặc có mùi khét không. • Có tiếng ồn bất thường hoặc rung lắc trong quá trình vận hành. • Sau khi bật công tắc, thiết bị không hoạt động bình thường. • Có lỗi hay hiện tượng bất thường nào khác không.	

Lưu ý

Nếu bạn không thể tự khắc phục sự cố hoặc sản phẩm vẫn hoạt động bất thường, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng.

Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc can thiệp vào sản phẩm.

8 Hướng dẫn dịch vụ bảo hành sản phẩm

Dịch vụ & Hỗ trợ

Nếu bạn cần thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng truy cập:

www.philips.com/support hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng tại quốc gia /khu vực của bạn.

Nếu không có trung tâm chăm sóc khách hàng tại quốc gia/ khu vực của bạn, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương.

Trong vòng hai (2) năm kể từ ngày mua hàng, bạn sẽ được bảo hành miễn phí đối với các hư hỏng do lỗi sản xuất hoặc hư hỏng linh kiện trong điều kiện sử dụng bình thường, được xác nhận bởi nhân viên bảo trì của chúng tôi.

Bảo hành không bao gồm các vật tư tiêu hao thay thế thường xuyên, thiết bị phụ trợ, chi phí vận chuyển và dịch vụ giao – nhận tận nơi.

Vui lòng xuất trình hóa đơn mua hàng cho nhân viên bảo hành khi cần sửa chữa.

Việt Nam

Chăm sóc khách hàng: +84-909800829

Email: Philips.massager.VN@orrohome.vn

Phiếu bảo hành

Mã sản phẩm		Tên khách hàng	
Nơi mua hàng		Số điện thoại	
Ngày mua hàng		Địa chỉ	
Dịch vụ bảo hành			
Nội dung bảo hành	Ngày bảo hành	Nhân viên bảo hành	

9 Danh sách đóng gói

Máy chính	1x	Bộ nguồn	1x
Sách hướng dẫn sử dụng	1x	Hướng dẫn nhanh	1x