

breo[®] P2

SIMPLY RELAX

Mục lục

Những điều cần chú ý
Bên trong hộp
Đặc điểm sản phẩm
Tên của từng bộ phận
Phương pháp sạc
Phương pháp sử dụng đúng
Kiểm tra và xử lý sự cố
Yêu cầu thải bỏ sản phẩm
Thông tin thẻ bảo vệ môi trường
Thông tin sản phẩm

Những điều cần lưu ý

- 1 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, không sử dụng sản phẩm này liên tục trong thời gian dài để tránh đau cơ do mát-xa quá mức
- 2 Không sử dụng sản phẩm này khi đang thực hiện các thao tác chính xác, lái xe hoặc điều khiển phương tiện
- 3 Không sử dụng nếu vùng mát-xa đã từng phẫu thuật hoặc có tổn thương da, sưng đỏ, viêm, tấy mủ và các triệu chứng khó chịu khác
- 4 Không sử dụng nếu bạn có tiền sử bệnh tim, bệnh nhân cấp tính, bệnh nhân da liễu, bệnh nhân u ác tính, người có xu hướng chảy máu (bệnh về máu), loãng xương, bệnh mô mềm, đột quỵ hoặc các bất thường cơ thể khác
- 5 Người chậm chạp trong hành động, có chức năng thể chất và tinh thần không tốt hoặc suy giảm trí tuệ không nên sử dụng, nếu cần sử dụng, vui lòng tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ
- 6 Phụ nữ mang thai không nên sử dụng máy mát-xa, nếu cần sử dụng vui lòng tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ
- 7 Không sử dụng cho mục đích giải trí, khi cất giữ sản phẩm, vui lòng để ở nơi trẻ em khó tiếp cận
- 8 Không dùng vật sắc nhọn cào, đâm sản phẩm này
- 9 Trẻ em dưới 8 tuổi bị cấm sử dụng, trẻ em từ 8-12 tuổi phải sử dụng dưới sự hướng dẫn và giám sát của cha mẹ hoặc người có khả năng giám sát

Lưu ý khi sử dụng

- 1 Sản phẩm này là sản phẩm chăm sóc sức khỏe điện tử gia dụng, không phải là thiết bị y tế, không dùng để chẩn đoán, điều trị và các mục đích thương mại khác
- 2 Trước khi sử dụng, vui lòng tháo các phụ kiện trang sức ở vùng mát-xa hoặc các vật dụng khác có thể ảnh hưởng đến việc mát-xa
- 3 Trong quá trình sử dụng, nếu vùng mát-xa có cảm giác đau hoặc khó chịu, vui lòng ngừng sử dụng
- 4 Khi sử dụng, nếu sản phẩm có hiện tượng bất thường, vui lòng tắt máy ngay lập tức, ngắt nguồn điện và liên hệ đường dây nóng dịch vụ khách hàng, không tự ý tháo gỡ sửa chữa
- 5 Vùng mát-xa có bề mặt tỏa nhiệt, người không nhạy cảm với nhiệt cần lưu ý khi sử dụng
- 6 Khi sử dụng trong các môi trường đặc biệt khác, vui lòng tuân thủ các quy định an toàn
- 7 Vui lòng sử dụng thiết bị sạc phù hợp với điện áp đầu vào của sản phẩm để sạc, chú ý an toàn điện, không nên dùng chung với các thiết bị sạc khác

Bảo vệ sản phẩm

- 1 Vui lòng sử dụng thiết bị sạc phù hợp với điện áp đầu vào của sản phẩm và bộ đổi nguồn có công suất đầu ra không quá 15W theo tiêu chuẩn để sạc sản phẩm, và chú ý an toàn điện
- 2 Vui lòng để sản phẩm này tránh xa nguồn nước, nguồn lửa và môi trường có tính ăn mòn

Kiến thức cần thiết

• Tần suất sử dụng

- 1 Sử dụng theo nhu cầu, mỗi lần trong vòng 10 phút, sau khi sử dụng một lần, nên nghỉ ngơi hợp lý rồi mới sử dụng lại
- 2 Nếu sử dụng quá mức, có thể gây khó chịu cho cơ thể, tổn thương da
- 3 Do đó, khi sử dụng lần đầu, cần quan sát tình trạng cơ thể và sự thay đổi của da, điều chỉnh thời gian sử dụng phù hợp.

• Về lưu ý trước khi sử dụng


- 1 Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng chọn tư thế thoải mái cá nhân, thả lỏng hoàn toàn cơ thể
- 2 Nếu cảm thấy da bị đau hoặc khó chịu, vui lòng ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ ngay

• Về tình trạng sau khi sử dụng

Sau khi mát-xa trong thời gian dài, vùng mát-xa có thể cảm thấy thoải mái đồng thời có thể xuất hiện hiện tượng đỏ và nóng, đây là hiện tượng bình thường

• Vệ sinh sản phẩm


Nếu cần vệ sinh bên ngoài, có thể dùng khăn thấm nước hoặc cồn 75% lau sạch bề mặt nhẵn, không dùng nước để rửa

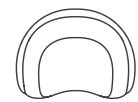

Máy mát xa



Hướng dẫn sử dụng

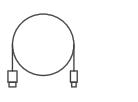

Cáp sạc

Đặc điểm sản phẩm



Mát xa và xoa bóp



Rảnh tay




Chườm nóng cảm ứng nhiệt



Thiết kế pin lithium

Thao tác sản phẩm

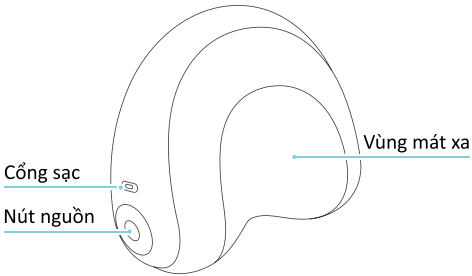

Cổng sạc

Nút nguồn

Vùng mát xa

Phương pháp sạc

- 1 Sản phẩm này không thể sử dụng khi đang sạc.
 - 2 Cắm đầu cáp sạc vào cổng sạc trên sản phẩm.
 - 3 Khi sản phẩm đang hoạt động mà cắm sạc, sản phẩm sẽ kích hoạt chương trình tự bảo vệ và tự động ngừng hoạt động.
- *Việc thân máy và bộ đổi nguồn hơi nóng lên trong khi sạc là hiện tượng bình thường.
- **Khi sạc xong**
- Sau khi sạc xong, vui lòng rút nguồn điện.

Phương pháp sử dụng đúng

- Chuẩn bị trước khi sử dụng**
- Vui lòng kiểm tra sản phẩm và phụ kiện có đầy đủ, có bị hư hỏng không.
- Khởi động sản phẩm**
- Nhấn giữ nút nguồn 2 giây, sản phẩm bắt đầu hoạt động
- **Lựa chọn chế độ**
- 1 Chế độ mặc định khi khởi động - Chế độ Thư giãn nhẹ nhàng;
 - 2 Nhấn nhanh nút nguồn, chuyển sang chế độ hai - Chế độ Sáng khoái;
 - 3 Nhấn nhanh nút nguồn, có thể chuyển sang chế độ ba - Chế độ Ngủ (chỉ chườm nóng); Lặp lại theo thứ tự.
- **Chế độ chườm nóng**
- 1 Mặc định chườm nóng mức cao khi khởi động;
 - 2 Nhấp đúp nhanh nút nguồn, có thể điều chỉnh sang chườm nóng mức thấp; Mức cao - Mức thấp - Tắt chườm nóng, lặp lại theo thứ tự.
- **Đèn báo pin**
- Khi khởi động**
- 1 Khi sản phẩm hoạt động bình thường, đèn báo hiển thị ánh sáng trắng liên tục.
 - 2 Khi pin dưới 20%, đèn báo hiển thị ánh sáng đỏ nhấp nháy.
- Khi sạc**
- 1 Trong quá trình sạc, đèn báo hiển thị ánh sáng đỏ nhấp nháy.
 - 2 Sau khi sạc xong, đèn báo hiển thị ánh sáng trắng liên tục.
- **Tắt sản phẩm**
- 1 Tự động tắt: Sau khi sử dụng tổng cộng 10 phút, sản phẩm sẽ tắt.
 - 2 Tắt thủ công: Nhấn giữ nút chờ/nguồn ≥2 giây, sản phẩm sẽ tắt.

Kiểm tra và xử lý sự cố

Nếu xảy ra sự cố khi sử dụng, vui lòng thực hiện các kiểm tra sau. Nếu không thể khắc phục sự cố hoặc sản phẩm vẫn không hoạt động như ý muốn, vui lòng ngắt nguồn điện và nhờ kỹ thuật viên chuyên nghiệp sửa chữa, không tự ý tháo lắp sản phẩm này!

Sự cố cơ bản	Nguyên nhân	Phương pháp khắc phục cơ bản
Không thể khởi động	Pin quá yếu	Vui lòng sạc kịp thời
Lực mát-xa yếu	Pin quá yếu	Vui lòng sạc kịp thời
Không có chườm nóng	Chức năng chườm nóng chưa bật	Vui lòng bật chức năng chườm nóng

Yêu cầu thải bỏ sản phẩm

Lưu ý

- Trước khi thải bỏ sản phẩm này, theo quy định, phải tháo pin ra;
- Khi tháo pin, sản phẩm phải được ngắt điện;
- Pin phải được xử lý an toàn theo quy định của pháp luật.

Người không chuyên nghiệp vui lòng không tự ý tháo dỡ!

Các bước tháo pin:

1. Ngắt nguồn điện bên ngoài, tháo vỏ sản phẩm;
2. Rút nguồn điện trên pin;
3. Tháo pin;
4. Vui lòng đặt pin đã thải bỏ vào điểm thu gom cố định;
5. Vui lòng tuân thủ luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn thải bỏ của địa phương, bảo vệ môi trường.

Thông tin thẻ bảo vệ môi trường

Bảo quản

Khi thời gian bảo quản quá 3 tháng, nên mở hộp kiểm tra và sạc lại máy trước khi sử dụng. Khi đặt không được sát mặt đất, tường và mái nhà. Trong nhà nên thông thoáng, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp và khí ẩm nóng.

Vận chuyển

Bao bì sản phẩm có thiết bị chống sốc đơn giản, phù hợp vận chuyển bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy, cần tránh mưa, tuyết bắn vào, lật ngược và va chạm.

Kiểm tra nguồn điện

Kiểm tra nguồn điện, nếu điện áp nguồn vượt quá phạm vi quy định thì không được bật máy sử dụng.

Bảo dưỡng

Thực hiện các biện pháp chống ẩm, chống chuột, chống ô nhiễm. Nên vệ sinh khi máy đã tắt. Sau khi sử dụng, nên đặt thiết bị ở nơi an toàn, không đặt vật nặng lên thiết bị. Khi xảy ra sự cố, nên nhờ kỹ thuật viên chuyên nghiệp sửa chữa, người không chuyên không được tự ý tháo lắp sản phẩm.

Thải bỏ và tái chế

Sản phẩm này không nên vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt. Khi bạn quyết định thải bỏ sản phẩm này, vui lòng tuân theo luật và hướng dẫn về môi trường của địa phương.

Thông tin sản phẩm

Product name	Breo Neck and Waist Massager
Product Model	P2
Rated voltage	5V=
Rated power	10W
Battery capacity	2200mAh
Product weight	1400g
Product dimensions	L350xW270xH120(mm)
Place of productionstandards	China

Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd
19/F, Hiseense Southern Building, No.1777 Chuangye Road , Nanshan District , Shenzhen , Guangdong,CN,518056.
www.breo.com

